



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

# „3M™ Littmann® CORE“ skaitmeninis stetoskopas

## Trumpasis vadovas

Atsisiųskite programėlę „Eko“ iš „Apple App Store“ arba „Google Play Store“.

Junkite „Bluetooth“ belaidį ryšį telefone arba planšetiniame kompiuteryje, paleiskite programėlę ir įjunkite CORE stetoskopą.


Eko

## Pakuotėje

- „Eko CORE“ skaitmeninis priedas ir „3M™ Littmann® Cardiology IV™“ stetoskopas
- Papildomas „3M Littmann“ užmaunamas tvirtos švelniai sandarinančios ausinių pagalvėlės (mažos)
- Nešaldanti varpelio mova
- USB įkrovimo laidas
- Trumpasis vadovas

## Ausinių pagalvėlės

Įstatykite ausų pagalvėle nukreipę į priekį.

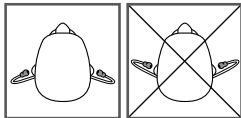

## Garsumas

Garsumą reguliuokite mygtukais (+) ir (-). Yra 7 garsumo pakopos.

## Jungimas ir išjungimas

Kai stetoskopas CORE yra išjungtas, jis veikia, kaip stetoskopas be stiprintuvo.

Norėdami įjungti stetoskopą CORE, nuspauskite maitinimo mygtuką. Pradės mirksėti lemputė. Tada per ausų pagalvėles girdėsite sustiprintą ir filtruojamą garšą.

## Telemedicinos ir DI funkcijos

„Eko“ teikia telemedicinos ir DI funkcijas, kurioms reikalinga programinės įrangos prenumerata (jei pasiekiami, parduodama atskirai).

Prenumeratą galite įsigyti internetu svetainėje [ekohealth.com](http://ekohealth.com)

## Aktyvūs triukšmo slopinimas

CORE stetoskopas pasižymi aktyviuoju triukšmo slopinimu, kuris pašalina aplinkos triukšmą. Aktyvųjį triukšmo slopinimą galima išjungti arba įjungti programėle „Eko“.



## Pranešimai

((Ⓞ)) (mirksi)

stetoskopas  
„CORE“ įjungtas ir  
ieško įrenginio

● (geltona)

stetoskopas  
„CORE“ išjungtas  
ir kraunamas

(●●) (geltona)

stetoskopo  
„CORE“  
akumuliatoriaus  
įkrova senka

○

stetoskopas  
„CORE“ įjungtas ir  
prijungtas

● (žalia)


stetoskopas  
„CORE“  
visiškai įkrautas

(●●) (mėlyna)

stetoskopas  
„CORE“ įrašinėja

## Įrašymas

Prisijungę prie programėlės „Eko“, paspauskite mygtuką (o), kad pradėtumėte įrašyti.

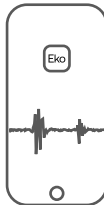

## **Įkrovimas**

Prijunkite „micro USB“ laidą prie stetoskopo „CORE“ ir naudokite UL sertifikuotą arba CE pažymėtą 5 V USB kroviklį. Stetoskopas „CORE“ visiškai įkraunamas per maždaug 2 valandas. Visiškai įkrovus, lemputė pradės šviesti žaliai.

## **Naudotojo vadovas**

Prieš naudodami stetoskopą „Littmann CORE“ perskaitykite naudotojo vadovą. Vadovą rasite: [ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Norėdami gauti daugiau informacijos apie 3M įrenginius, žr. [HCBGRegulatory.3M.com](http://HCBGRegulatory.3M.com)

## **Priežiūra ir palaikymas**

JAV apsilankykite [www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) arba paskambinkite telefonu 1-800-228-3957. Jei esate ne JAV, apsilankykite svetainėje [littmann.com](http://littmann.com), kurioje rasite savo vietos 3M biuro kontaktinę informaciją.

„Apple App Store“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas.  
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.  
„Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG“ prekės ženklas  
LBL 143 Rev B



System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

 **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia


 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

 **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0