



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO D'EMERGENZA NEO
NEO EMERGENCY TROLLEY
CHARIOT D'URGENCE NEO
CARRO DE EMERGENCIAS NEO
CARRINHO DE EMERGÊNCIA NEO
NEO NOTFALLWAGEN
NEO ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
WÓZEK AWARYJNY NEO
CĂRUCIOR MEDICAL DE URGENȚĂ NEO

NEO NOUZOVÝ VOZÍK
NEO NÖDLÄGESVAGN
NEO TROLLEY - ANESTHESIEWAGEN
NEO KOLICA ZA HITNE SLUČAJEVE
NEO ÉRZÉSTELENÍTŐ KOCSI
NEO КОЛИЧКА ЗА СПЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ
NEO-ELVYTYSKÄRRY
NEO SKUBIOS PAGALBOS VEŽIMĖLIS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja
/ Gamintojas: **Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /
Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SKR054-ET

Gima 45722


1. RATUKŲ MONTAVIMAS

Suderinkite rato varžtą su montavimo anga vežimėlio apačioje ir įstatykite ratą. Įstatykite varžtą į montavimo angą ir priveržkite varžtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę.


**1****2****3**

2. NAUDOKITE RATUKŲ METODĄ

Užblokuokite ratuką: Nustūmę skubios pagalbos vežimėlis į pageidaujamą padėtį, koja paspauskite mygtuką „ON“ (ĮJUNGTI) ir užblokuokite ratuką, kai išgirsite „spragtelėjimą“, kaip parodyta toliau pateiktame paveiksle.

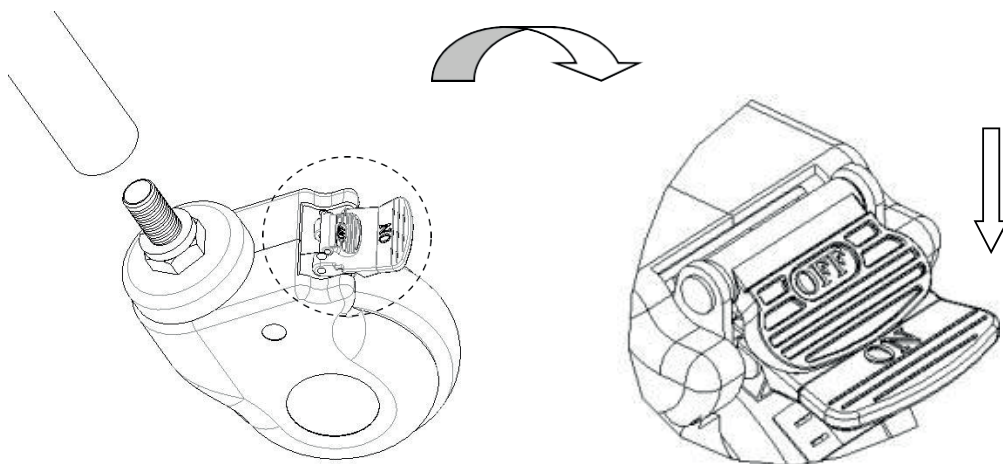

Atblokuokite ratuką: Koją paspauskite mygtuką „OFF“ (IŠJUNGTI) ir atrakinkite ratuką, kai išgirsite „spragtelėjimą“.

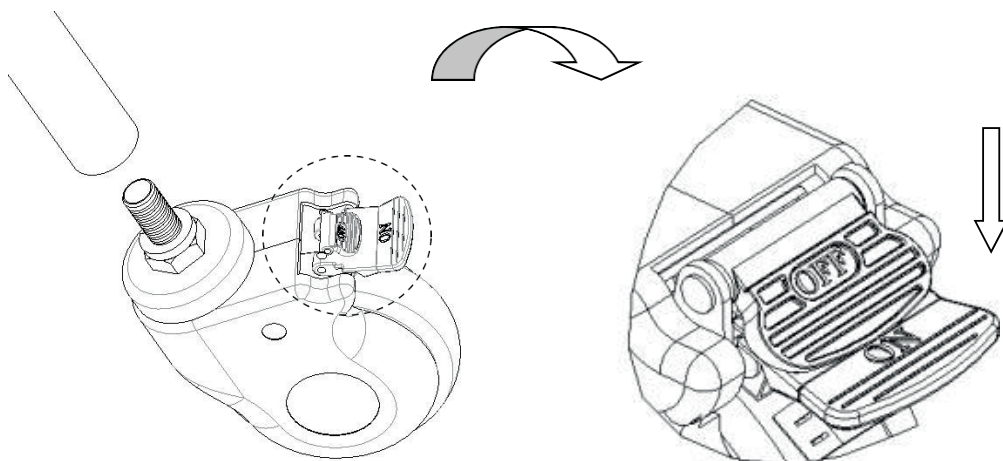

3. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Dažniausios triktys	Galimos priežastys	Šalinimo būdai
Sunku pajudinti visą vežimėlį	1. Ratukas užblokuotas neatleidžiant stabdžio 2. Ratukas yra pažeistas	1. Atleiskite stabdį 2. Pakeiskite ratuką

4. PRIEŽIŪRA

- Kad saugiai naudotumėte skubios pagalbos vežimėlis, reikia atlikti skubios pagalbos vežimėlis reguliarias saugos patikras. Jį rekomenduojama patikrinti kas šešis mėnesius siekiant įsitikinti, kad jungtys neatsilaisvinto ir viskas veikia gerai.
- Kai skubios pagalbos vežimėlis pasensta ir pasiekia tam tikrą naudojimo laiką, kai kurias skubios pagalbos vežimėlis metalines dalis ir skubios pagalbos vežimėlis rėmo plastikines dalis galima perdirbti.
- Naudodami nebraižykite skydelio aštriais prietaisais ar peiliais ir dažnai nuvalykite, kad būtų švarus ir sausas.
- Jei skydelis bus netyčia suteptas dėmėmis, rekomenduojama jį nuvalyti. skubios pagalbos vežimėlis valyti nenaudokite šarminių ar korozinių cheminių medžiagų, nes dėl jų nerūdijančio plieno paviršius gali pradėti rūdyti.
- Reguliariai tikrinkite ratukus, kad nesutrenktumėte ar neperkrautumėte, o tai gali sugadinti ratukus.
- Stabdant draudžiama ratukus stabdyti iš jėgos, nes galima sugadinti stabdžių sistemą.
- Rato padangos paviršiaus susidėvėjimą galima nustatyti vizualiai patikrinus. Aplink ratą gali būti apsvynioję kai kurie verpti siūlai ir kitos san-kaupos. Nuimkite varžtus ir veržles nuo rato, išvalykite nešvarumus ir patikrinkite, ar rato guolis nėra pažeistas. Jei dalys nepažeistos, jas galima vėl surinkti ir naudoti.
- Sprendžiant iš to, ar ratuką reikia pakeisti pasibaigus naudojimo laikui, dėl nusidėvėjimo, ratus galite pakeisti ir įsitikinti, kad ašių varžtai ir veržlės gerai uždėti ir sujungti. Jei įmanoma, kad būtų lengviau atlikti šį procesą naudokite fiksavimo poveržlę arba antveržlę.
- Ratukams su stabdžiais reikia reguliariai tikrinti, ar stabdžiai veikia tinkamai. Stabdžius patikrinkite kartą per dieną arba prieš kiekvieną nau- dojimą. Jei skubios pagalbos vežimėlis sumontuoti keli stabdomi ratukai, vienu metu užblokuoti galima tik vieną stabdomą ratuką, o tai leis jums pabandyti ir pastumti skubios pagalbos vežimėlis. Taip pat patikrinkite, ar vienas kiekvieno ratuko stabdys veikia gerai. Jei stabdžio funkci- ja sutrinka dėl susidėvėjimo ar pažeidimo, nedelsdami pakeiskite ratus ir tada iš naujo patikrinkite stabdymo sistemą.
- Jei ratuko stabdymo sistemos mechanizmas pažeistas ir stabdį reikia pataisyti arba pakeisti, kreipkitės į mūsų bendrovės aptarnavimo po parda- vimo skyrių arba įgaliotą pardavimo atstovą. Kiekvieną kartą keičiant stabdžius, reikia iš naujo patikrinti ratukų stabdymo savybes.

5. PAKAVIMAS, GABENIMAS, SANDĖLIAVIMAS

- Vežimėlis supakuojamas pagal sutartį arba produkto standartą.
- Venkite staigių judesių, didelės vibracijos, o gabendami vežimėlį, saugokite nuo saulės šviesos ir lietaus.
- Vežimėlį reikėtų laikyti:
 - Aplinkos temperatūra: +5 °C ~ +40 °C.
 - Santykinis drėgnumas: ≤ 85 %.
 - Atmosferinis slėgis: 70 kPa ~ 106 kPa
 - Didžiausia apkrova yra 50 kg.

GIMA GARANTIJOS SĄLYGOS

Galioja standartinė „Gima“ B2B 12 mėnesių garantija