




**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l'utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

**COD 27701**

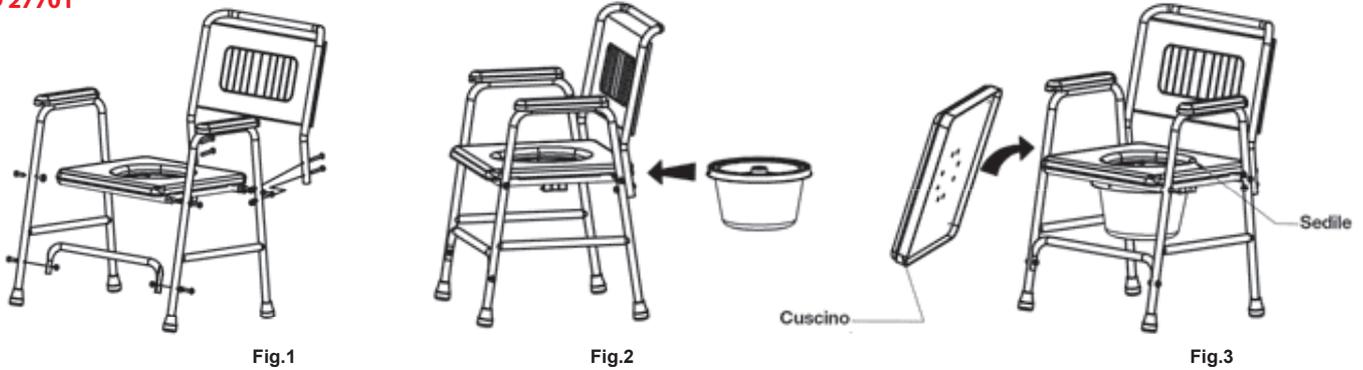


**Istruzioni di montaggio**

Fig. 1. Aprire la confezione e assemblare la sedia come indicato in figura. Fissare con viti e bulloni.

Fig. 2. Inserire la bacinella wc nel verso indicato dalla freccia.

Fig. 3. Dopo l'utilizzo coprire con l'apposito cuscino.

**COD 27702 - 27703**

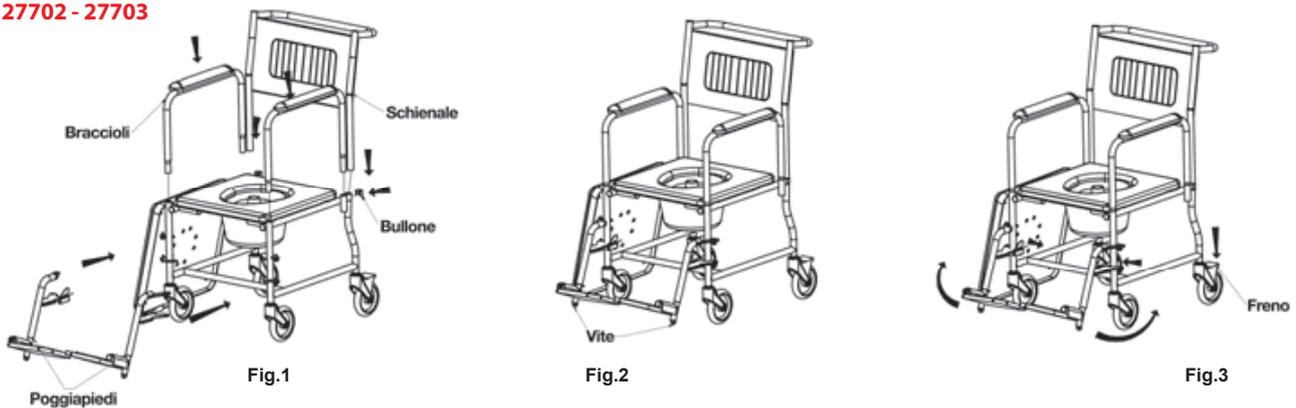

**Istruzioni di montaggio**

Fig. 1. Aprire la confezione e inserire i braccioni e i poggiapiedi e lo schienale sul corpo principale del telaio. Fissare lo schienale con il bullone.

Fig. 2. Regolare l'altezza del poggiapiedi tramite la vite in base alle necessità dell'utente e quindi serrare la vite.

Fig. 3. Prima dell'uso, premere verso il basso il freno delle ruote. Ruotare il poggiapiedi fino a quando il poggiapiedi non si blocca.

**Sicurezza e manutenzione**

1. Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
2. Riporre in un locale ventilato.
3. Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
4. Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

**Pulizia**

Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di candeggina.

**Condizioni di esercizio**

Temperatura: 5 ÷ 38°C  
Percentuale umidità: 20÷ 90%  
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

**Condizioni di conservazione e trasporto**

Temperatura: - 10°C ÷ 50°C  
Percentuale umidità: 20÷ 90%  
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	<b>REF</b>	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	<b>LOT</b>	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	<b>MD</b>	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	<b>UDI</b>	Identificativo Unico


**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

 You have purchased an aid designed to facilitate disabled users. Any other use is prohibited. Use only in a seated position and never stand up, for assembly refer to the explanatory images below.


**COD 27701**

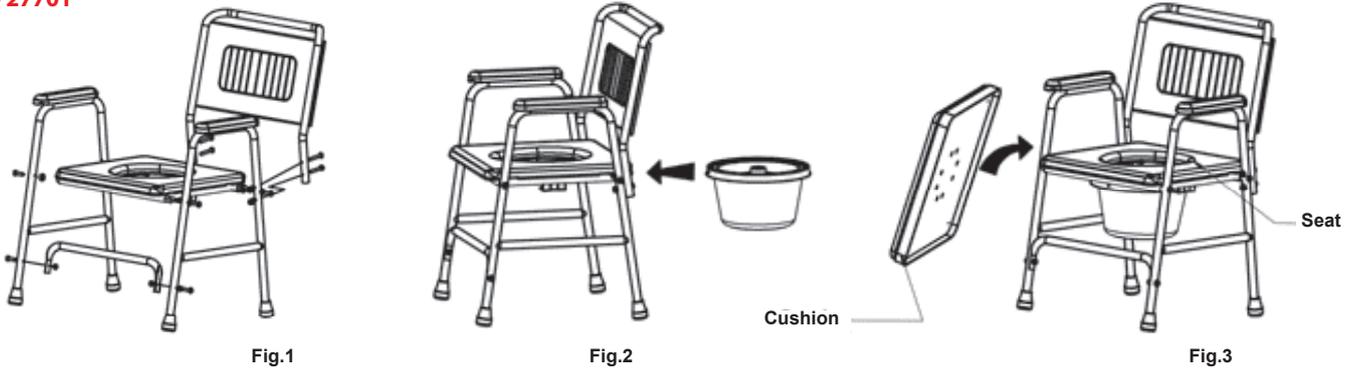

**Assembly instructions**

Fig. 1. Open the package and assemble the chair as shown in the figure. Secure with screws and bolts  
 Fig. 2. Insert the toilet bowl in the direction indicated by the arrow.  
 Fig. 3. Cover with the appropriate cushion after use.

**COD 27702 - 27703**

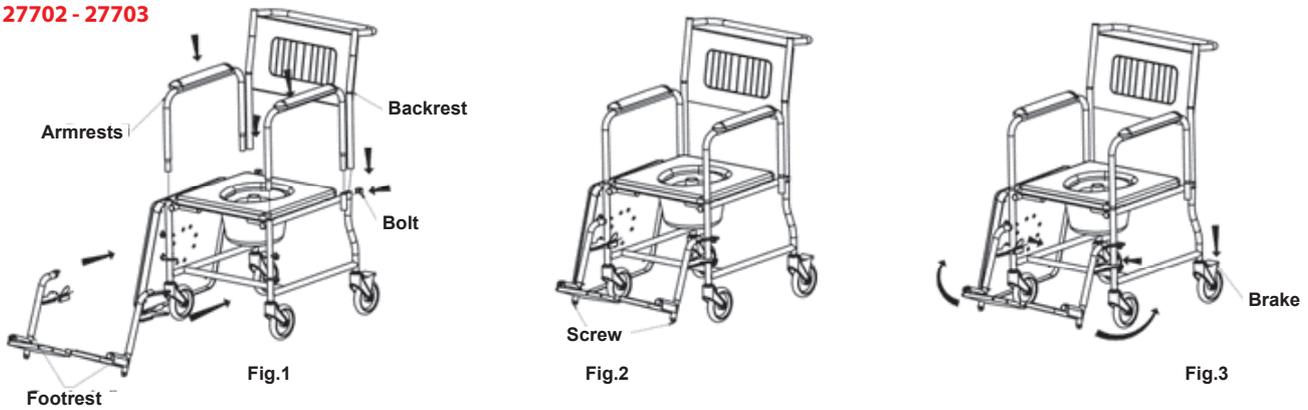

**Assembly instructions**

Fig. 1. Open the package and insert the armrests and footrests and the backrest on the main body of the frame. Fasten the backrest with the bolt.  
 Fig. 2. Adjust the height of the footrest by the screw according to the user's need and then tighten the screw.  
 Fig. 3. Before use please push down the brake of the wheels, rotate the footrest as Fig. 3 until the footrest is locked.

**Safety and maintenance**

1. Before use, please check all the screws are tighten and the main frame is stable. The maximum load weight is 100 kg.
2. Placed in ventilation place.
3. Verify that the test leads are in good condition. If necessary, replace them immediately if worn or missing.
4. Add the lubricating oil to the transmission parts regularly.

**Cleaning**

Use damp cloth with normal detergents. Do not submerge the seat in the bath water; drain after use and dry the seat. Don't use harsh abrasives or bleach based cleaners.

**Working Condition**

Temperature: 5 ÷ 38°C  
 Humidity percentage: 20 ÷ 90% RH  
 Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa

**Conservation condition and Transport**

Temperature: - 10 ÷ 50°C  
 Humidity percentage: 20 ÷ 90%  
 Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa

	Keep in a cool, dry place	<b>REF</b>	Product code
	Keep away from sunlight	<b>LOT</b>	Lot number
	Consult instructions for use	<b>MD</b>	Medical Device
	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Manufacturer
	Caution: read instructions (warnings) carefully		Date of manufacture
	Authorized representative in the European community	<b>UDI</b>	Unique Identifier

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

**GIMA 27701 - 27702 - 27703**

 **Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**  
 5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
 Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
 Made in China

**REF** FS893 - FS691 - FS691S

 **MedNet EC-Rep GmbH**  
 Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:  
**Gima S.p.A.**  
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com  
 export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

