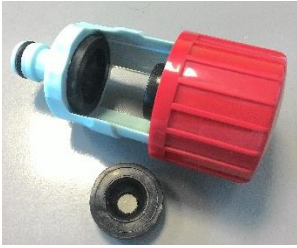


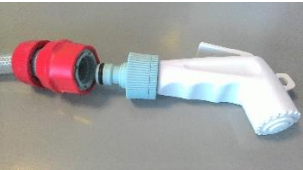
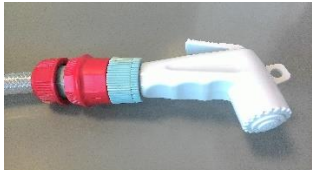



**01938 – SHOWER EXTENSION HOSE  
PROLUNGA DOCCIA**



<b>Manufacturer</b>	<b>CHINESPORT S.P.A.</b> , Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. Phone. +39 0432 621 621 – Fax +39 0432 621 620 – website: www.chinesport.com The company produces according to UNI EN ISO 13485:2012
<b>Intended use and equipment description</b>	Flexible, 6 m hose complete with button-operated shower head and tap adapter. Used for cleaning and hygiene of bedridden patients.
<b>Composition</b>	Plastics.
<b>Storage</b>	In case of storage the following ambient conditions must be respected: - relative humidity 10% / 90 %; - temperature -10°C / +50°C.
<b>Special warning and use restrictions</b>	<b>These devices must not be used:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• without making all the settings required and recommended setups.</li> <li>• when use is not advisable or causes the patient serious discomfort.</li> <li>• if the original product has been tampered with and/or modified</li> <li>• when set incorrectly or when there is any suspicion that it may harm the patient</li> </ul>
<b>Collateral effects and contraindications</b>	There is no collateral effects or contraindications during proper use. Use the device always in the proper way. The knowledge of this instruction manual is recommended.
<b>Unpacking and mounting</b>	Simply remove the device from the package. Never use cutters to open box to prevent damages. Properly dispose of the packaging. The carrier and the supplier must be immediately notified of any damage that may have occurred during transport. Damaged equipment cannot be used.
<b>Installation and use</b>	<p>Insert the seal with the correct size into the tap adapter (Fig. 1). Install the adapter over the tap and tighten it screwing the top red cylinder (Fig. 2). Push the quick lock to connect the hose to the adapter (Fig. 3) and then connect the the shower in the same way to the other quick lock. (Fig. 4 e 5). In order to unlock the quick lock, pull the the top red connector holding the connected component with the hand (Fig. 6).</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Fig. 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

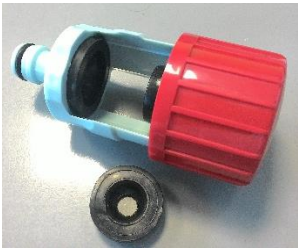


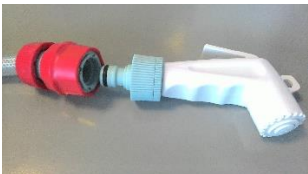
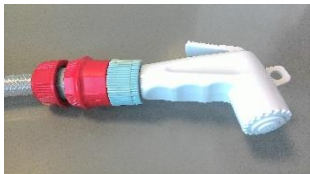

**01938 – SHOWER EXTENSION HOSE  
PROLUNGA DOCCIA**



	<i>Fig. 4</i>	<i>Fig. 5</i>	<i>Fig. 6</i>
<b>Maintenance</b>	<p>Check the condition of the safety of the device after each situation of "rough treatment" (ex.: fall, heavy impacts, liquid spills, etc.) and any time you are unsure about the state security apparatus. Routine maintenance tasks are to be carried out at least once every 6 months. Keep the device constantly clean and check the status of the parts and the seals.</p>		
<b>Cleaning</b>	<p>Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let dry avoiding direct exposure to the sunlight. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.</p>		
<b>Disinfection</b>	<p>For the disinfection of surfaces such as chassis, sky, hand control, etc. we recommend the use of disinfectants such as AMUCHINA® 10% or equivalent disinfectant with sodium hypochlorite 0.1%</p>		
<b>Additional informations</b>	<p>Please visit <a href="http://www.chinesport.com">www.chinesport.com</a></p>		

**01938 – SHOWER EXTENSION HOSE  
PROLUNGA DOCCIA**



<b>Costruttore</b>	<b>CHINESPORT S.P.A.</b> , Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. Tel. +39 0432 621 621 – fax+39 0432 621 620 – sito internet: www.chinesport.it. L'azienda ha un sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 13485:2012
<b>Destinazione d'uso e descrizione dell'apparecchiatura</b>	Tubo flessibile da 6 m completo di doccetta a pulsante e adattatore per rubinetto. Utilizzato per pulizia ed igiene di pazienti allettati.
<b>Composizione</b>	Plastiche
<b>Immagazzinaggio</b>	In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: 1. umidità relativa 10% / 90 %; 2. temperatura -10°C / +50°C.
<b>Limitazioni d'uso e avvertenze particolari</b>	<b>I sussidi non devono essere utilizzati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate.</li> <li>• Quando l'uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente.</li> <li>• Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.</li> <li>• In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.</li> </ul>
<b>Effetti collaterali</b>	Non si riscontrano effetti collaterali. Utilizzare sempre l'apparecchiatura in maniera consona. È raccomandata la conoscenza del presente libretto di istruzioni.
<b>Disimballaggio</b>	Estrarre i sussidi dall'imballo <b>senza utilizzare taglierino per evitare di danneggiarli</b> e smaltire correttamente gli imballi. Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere prontamente segnalati al trasportatore e al fornitore: i sussidi danneggiati non devono essere utilizzati.
<b>Installazione ed utilizzo</b>	<p>Inserire nell'adattatore del rubinetto la guarnizione della corretta dimensione (Fig. 1). Inserire l'adattatore a cavallo del rubinetto e stringerlo avvitando il cilindro rosso superiore (Fig. 2). Spingere l'attacco rapido per collegare il tubo all'adattatore (Fig. 3) e fare la stessa operazione per inserire la doccetta (Fig. 4 e 5). Per sganciare l'attacco rapido, tirare la porzione terminale verso il centro del tubo reggendo l'elemento connesso con l'altra mano (Fig. 6).</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 7</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 8</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 9</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 10</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 11</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 12</p>

**01938 – SHOWER EXTENSION HOSE  
PROLUNGA DOCCIA**



<b>Manutenzione</b>	<p>Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.</p> <p>Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: caduta, urti violenti, versamento di liquidi, etc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.</p> <p>Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni sei mesi.</p> <p>Mantenere il dispositivo costantemente pulito e controllare lo stato dei componenti e delle guarnizioni.</p>
<b>Lavaggio</b>	<p>Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole.</p> <p>Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente.</p>
<b>Disinfezione</b>	<p>Per la disinfezione delle superfici si consiglia l'utilizzo di prodotti disinfettanti quali AMUCHINA® 10% o equivalente con sodio ipoclorito allo 0,1.e neutro. Risciacquare bene.</p>
<b>Ulteriori informazioni</b>	<p>Visitare il sito <a href="http://www.chinesport.it">www.chinesport.it</a></p>