



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SUPPORTO A ROTELLE ROLLING STAND

REF 8030421049 (Gima 35148)

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China



Istruzioni per l'Utente

Si prega di leggere attentamente le istruzioni del supporto a rotelle prima dell'uso per assicurarne il corretto e ideale funzionamento. Il presente manuale descrive le operazioni di installazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto e lo stoccaggio. Conservare questo manuale per consultazione futura.



1 Caratteristiche



Rotelle silenziose
con freni



Cesto con manico
e gancio



Sedi di Installazione
del Cesto



Altezza regolabile



Fermo della piastra
di montaggio

2 Utilizzo designato

Questo prodotto è progettato per il trasporto di dispositivi come i Monitor paziente, Monitor ECG, ecc., e per rendere più facile ed efficiente il lavoro del personale sanitario.

3 Fotografie



4 Pulizia e Disinfezione

1. Rimuovere il monitor prima di effettuare la pulizia del supporto a rotelle.
2. Si consiglia di pulire periodicamente il supporto. Utilizzare esclusivamente detergenti non corrosivi. Diluire i prodotti detergenti seguendo le istruzioni del produttore.
3. Pulire la superficie del supporto con un panno imbevuto di alcool o detergente, quindi asciugare con un panno asciutto o lasciare asciugare all'aria.

5 Dimensioni e peso:

Dimensioni: 503*461*H 1050 mm

Peso (imballaggio compreso): 10 KG

Dimensioni dell'imballaggio: 780*470*H 185 mm

6 Trasporto e stoccaggio:

1. Trasporto

Trasportare o spostare il supporto a rotelle all'interno del suo imballaggio originale, mantenere asciutto ed evitare urti e buche.

2. Condizioni di stoccaggio:

Conservare il supporto a rotelle in un ambiente asciutto e ben ventilato, privo di polvere e di gas corrosivi.

Quando il supporto è all'interno nel suo imballaggio originale, non appoggiarvi sopra altri prodotti oltre quattro strati. La stanza di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente.

7 Elenco d'imballaggio

Kit di base *1

Piastra di montaggio *1

Asta di supporto *1

Rotella *4

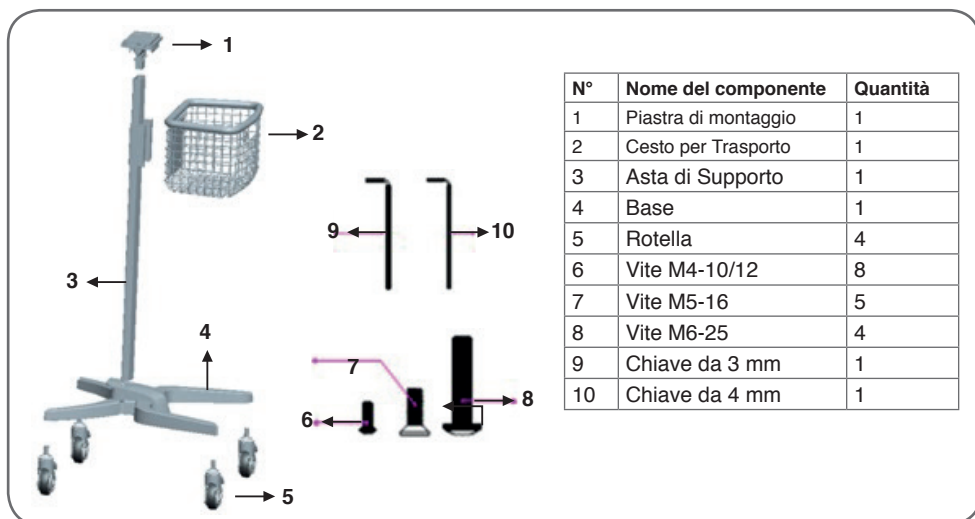
Utensile per l'installazione *1

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Analisi	Soluzione
L'asta di supporto vibra	Le viti di fissaggio alla base potrebbero essere allentate	Controllare le viti e stringerle se necessario
L'altezza del supporto non può essere regolata	Le viti di regolazione sul manico sono troppo strette / allentate	Effettuarne la regolazione come desiderato

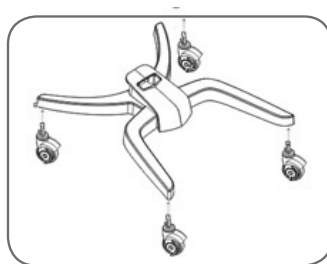
9 Installazione

Elenco dei componenti

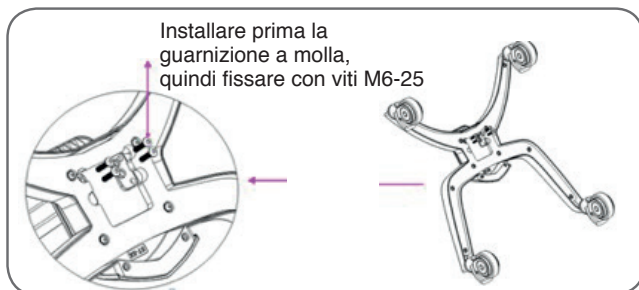


Fase 1:

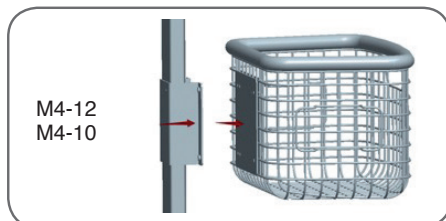
Fissare le rotelle nelle relative sedi sulla base.

**Fase 2:**

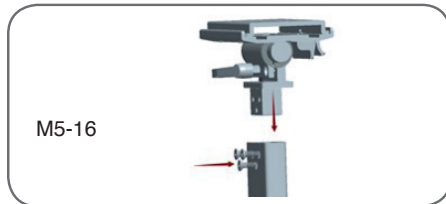
Inserire l'asta di supporto nella base e fissarla con viti M6-25.

**Fase 3:**

Installare il cesto di trasporto e fissarlo con viti M4-10 e M4-12 seguendo le immagini seguenti

**Fase 4:**

Inserire la piastra di montaggio nell'asta di supporto e fissarlo con viti M5-16.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Instructions to User

In order to operate properly and get the best performance, please read these instructions carefully before using this rolling stand. This manual describes installation, operation, maintenance, transportation and storage.

Please keep this manual for future reference!



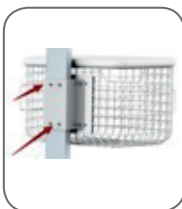
1 Features



Silent castors
with brakes



Basket with handle
and hook



Install Basket



Elevation angle
adjustable



Mounting
plate lock

2 Intended Use

This product is intended for transferring equipment such as Patient Monitor, ECG Monitor, etc. to help doctors work conveniently and effectively.

3 Photos



4 Cleaning and Disinfection

1. Remove the monitor before cleaning the rolling stand.
2. It is recommended to clean the rolling regularly. Only a non-corrosive cleanser is permitted. Dilute cleansing products as per the manufacturers instructions.
3. Use a cloth with alcohol or your choice of cleanser to wipe the surface of the rolling stand, and dry it with a clean cloth or leave to air-dry.

5 Dimensions and weight

Dimension: 503*461*H1050 mm

Weight (including package): 10KG

Dimension of package: 780*470*H185mm

6 Transportation and storage

1. Transportation

The rolling stand should be left in original packaging when being transported and kept dry and avoided bumping.

2. Storage conditions:

The rolling stand should be kept in a dry and well ventilated room free from dust and corrosive gases. If the stand is being stored in original packaging, stacking height should not exceed four layers, warehouse should be room temperature.

7 Packing List

Base kit *1

Mounting plate*1

Support pillar *1

Castor *4

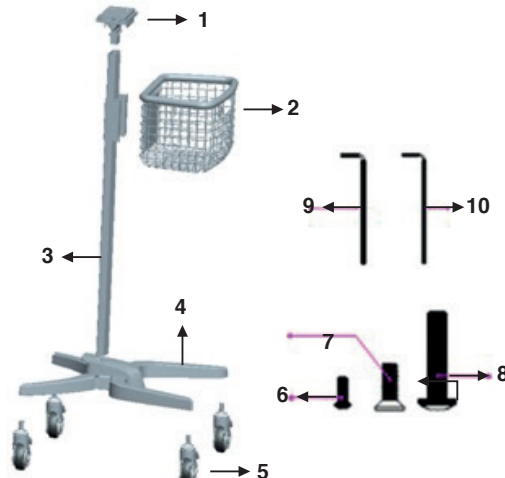
Installation tool *1

8 Troubleshooting

Problem	Analysis	Solution
Support pillar shakes	Fixing screws on the base may be loose	Check the screws and tighten if required
Elevation angle can be adjusted	Adjusting screws on the handle are too loose / tight	Adjust the tightness according to the requirements

9 Installation

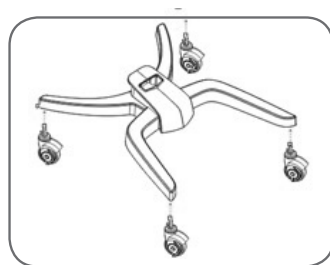
Part List



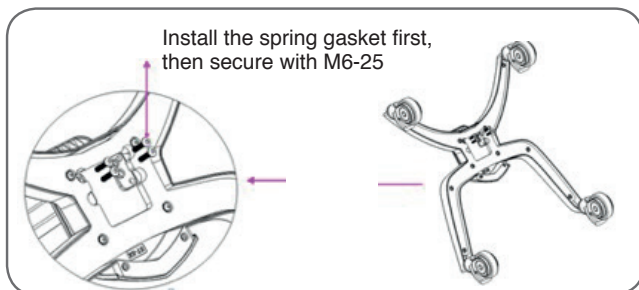
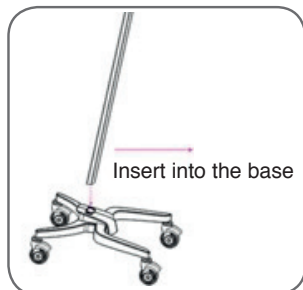
No	Part Name	Qty
1	Mounting plate	1
2	Storage Basket	1
3	Support Pillar	1
4	Base	1
5	Castor	4
6	Screw M4-10/12	8
7	Screw M5-16	5
8	Screw M6-25	4
9	3mm spanner	1
10	4mm spanner	1

Step 1:

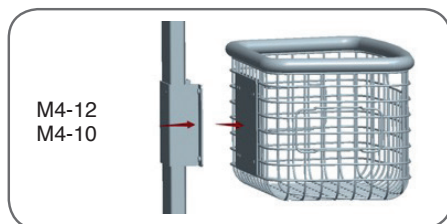
Fix four castors into the related holes on the base.

**Step 2:**

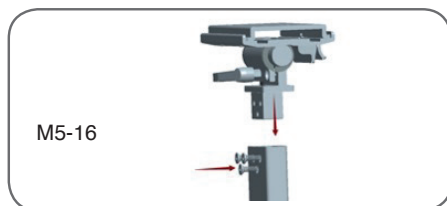
Insert the support pillar into the base and secure with M6-25 screws.

**Step 3**

Assemble the storage basket, and secure with M4-10 and M4-12 screws according to the following pictures

**Step 4**

Fix the bracket into the support pillar and secure with M5-16 screws.

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

