



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BASTONE A LED

Manuale utente




ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo, accertarsi di aver letto tutte le informazioni e le indicazioni!

- NON cercare di smontare da soli l'apparecchiatura.
- Non inserite aghi o elementi appuntiti nel manico.
- Non battere il bastone sul suolo o su superfici dure.
- ACCERTARSI di mantenere il bastone lontano dal fuoco.
- Spegnerne SEMPRE l'interruttore prima di estrarre le batterie.
- Max. capacità di peso **110 kg**.

SPECIFICHE MANICO

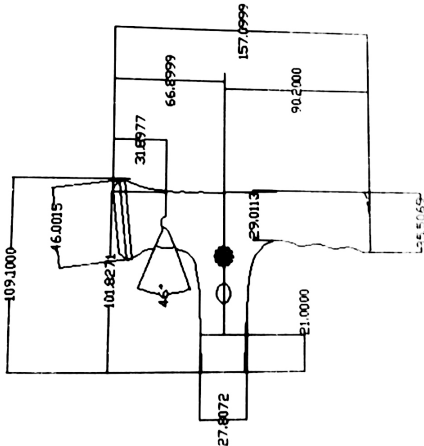


- 4 elementi di luce LED bianco ultra-brillante ϕ 5.
- 2 elementi di luce LED rosso ultra-brillante ϕ 5 - lampeggiante di avvertimento.
- Funzione sirena 100 dB.
- Fissaggio con nastro di fermo a mano.
- Bastone disponibile nei modelli pieghevole o regolabile.

ASSEMBLAGGIO



Sollevare per aprire il coperchio sul retro.

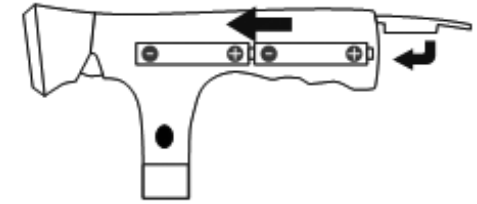


Posizionare due batterie AAA all'interno del manico, poi abbassare il coperchio per chiudere.

FUNZIONAMENTO DELL'INTERRUTTORE ON/OFF



Pulsante superiore


- Premere una volta per accendere le luci LED.
- Premere due volte per accendere e fare lampeggiare simultaneamente le luci di avvertimento a LED bianche + rosse.
- Premere nuovamente per spegnere.

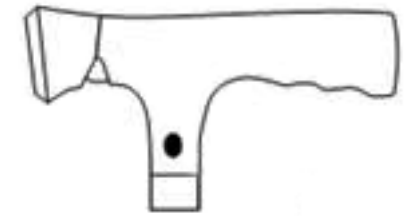

Pulsante laterale

- Premere per avviare il cicalino di avvertimento.

NOTA DI IMPIEGO

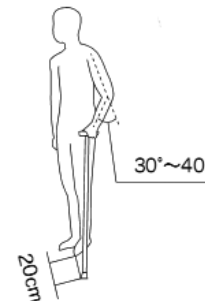

Posizione di utilizzo consigliata.



Altezza regolabile.
10 posizioni da 78 a 100.5 cm.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

LED CANE

User manual




WARNING:

Be sure to read all information and directions before use!!

- DO NOT try to disassembly this equipment by yourself.
- DO NOT insert any needle or sharp article into the grip.
- DO NOT knock the cane at the floor and any harden surface.
- ALWAYS turn off the switch before taking out the batteries.
- ENSURE to keep the cane from fire.
- **110kg** maximum weight capacity.

GRIP SPECIFICATION

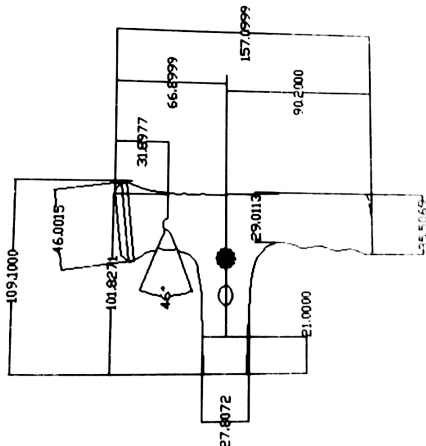

- 4 pieces of ultra-bright ϕ 5 white LEDs light.
- 2 pieces of ultra-bright ϕ 5 red LEDs flash warning.
- 100 dB siren function.
- Attach with a hand strap.
- Folding or adjustable cane available


REF GB-806 (GIMA 43050)
GB-806 (GIMA 43052)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por:
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd. No.1, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made in China



ASSEMBLY

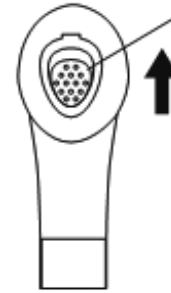


Flip up to open the lid on the back.

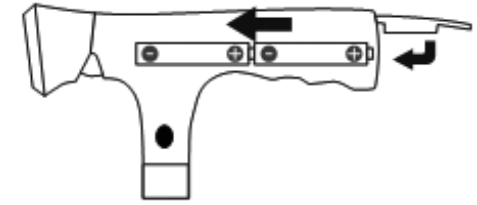


Put 2 pcs AAA batteries inside the grip, then flip down the lid to close it.

FUNCTIONS OF SWITCH ON/OFF

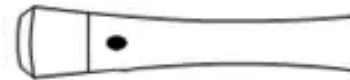

Top button


- Push once to turn on the LEDs light.
- Push twice to turn on the warning white LEDs light + red LEDs flash simultaneously.
- Push again to turn it off.

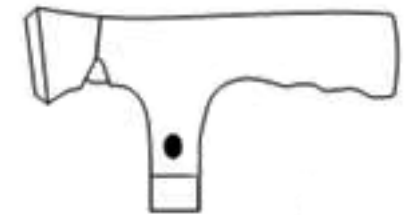

Side button

- Push to start the buzzer warning.

NOTE OF USE

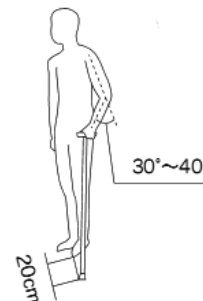

Best use position recommended.



Adjustable height.
10 position from 78 to 100.5 cm.



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CANNE LED

Notice d'utilisation




ATTENTION:

Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations et consignes avant l'utilisation!!


- N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS de démonter l'équipement vous-même.
- N'INSÉREZ aucune aiguille ou objet tranchant dans la poignée.
- NE cognez PAS la canne au sol ou sur une surface dure
- TOUJOURS éteindre l'appareil avant de retirer les piles.
- ÉLOIGNEZ la canne du feu.
- **110kg** de charge maximale.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CANNE

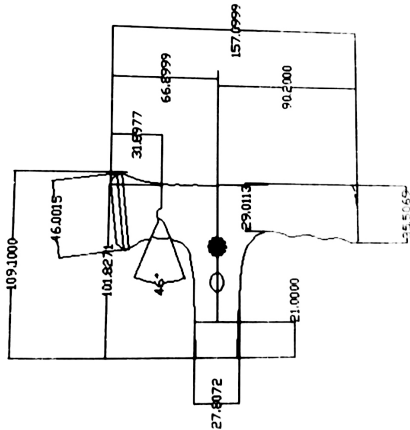


- 4 ampoules LED blanches ultra-lumineuses ϕ 5.
- 2 ampoules LED rouges clignotantes ultra-lumineuses d'avertissement ϕ 5.
- Sirène de 100 dB.
- Attache avec dragonne.
- Canne pliante ou réglable disponible.

ASSEMBLAGE

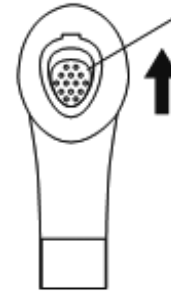

Soulever pour ouvrir le cache à l'arrière.

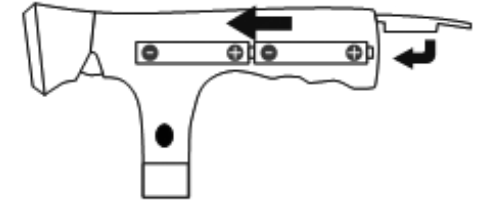


Insérer deux piles AAA dans la poignée, puis refermer le cache.

FONCTIONS MARCHÉ/ARRÊT



Bouton sur le haut


- Appuyer une fois pour allumer le voyant.
- Appuyer deux fois pour allumer les voyants blanc et rouge d'avertissement simultanément.
- Appuyer une fois encore pour éteindre.

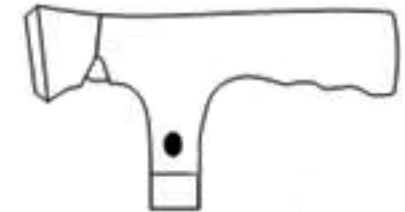

Bouton sur le côté

- Appuyer pour allumer l'avertisseur sonore.

REMARQUE D'UTILISATION

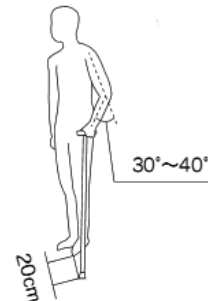

Meilleure position d'utilisation recommandée.



Canne réglable.
10 positions de 78 à 100,5 cm.



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

BASTÓN LED


Manual de uso

ADVERTENCIA:

¡Asegúrese de leer toda la información y las instrucciones antes de usar!

- NO intente realizar el desmontaje de este equipo usted mismo.
- NO insertar agujas o ningún artículo afilado en la empuñadura.
- NO golpear el bastón en el suelo o cualquier superficie dura.
- SIEMPRE apague el interruptor antes de extraer las pilas.
- ASEGÚRESE de mantener el bastón alejado del fuego.
- **110kg** de capacidad máxima de peso.

ESPECIFICACIÓN DE LA EMPUÑADURA

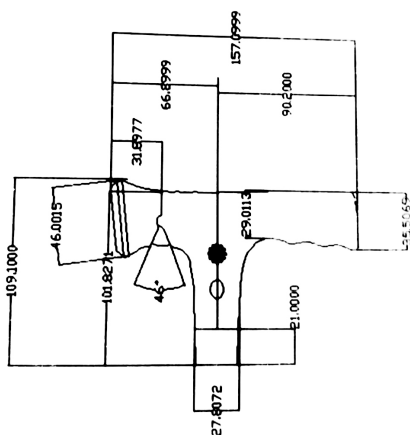

- 4 luces LED blancas ultrabrillantes de 5 φ.
- 2 luces LED intermitentes de advertencia ultrabrillantes de 5 φ.
- Función de sirena de 100 dB.
- Adjunto con una correa de mano.
- Disponible con bastón plegable o ajustable.


REF GB-806 (GIMA 43050) GB-806 (GIMA 43052)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqu  par/Fabricado por:
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd. No.1, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made in China



ENSAMBLADO

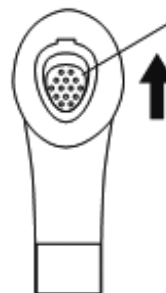

Levantar hacia arriba para abrir la tapa de la parte posterior.

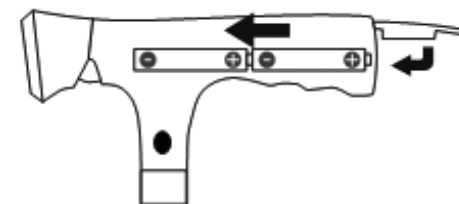


Colocar 2 pilas AAA en el interior de la empuñadura, luego bajar la tapa para cerrarla.

FUNCIONES DE ENCENDIDO/APAGADO



Bot n superior


- Pulsar una vez para encender las luces LED.
- Pulsar dos veces para activar las luces LED blancas y las luces LED rojas intermitentes de advertencia simult neamente.
- Vuelva a pulsar el bot n para apagar.

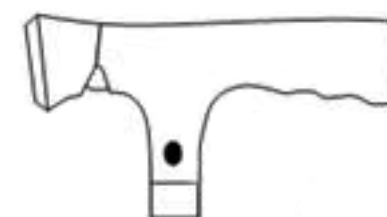

Bot n Lateral

- Pulsar para iniciar el zumbador de advertencia.

NOTA DE USO

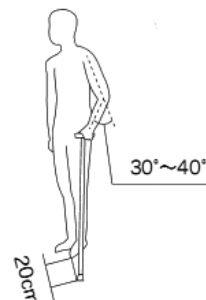

Mejor posici n de uso recomendada.



Bast n ajustable.
10 posiciones de 78 a 100,5 cm.



Eliminaci n: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos dom sticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminaci n de los aparatos por desguazar llev ndolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos el ctricos y electr nicos.

CONDICIONES DE GARANT A GIMA

Se aplica la garant a B2B est ndar de Gima de 12 meses.