



**PROFESSIONELE MEETLAT VOOR ZUIGELINGEN
MOD. WH80**



 **Lees aandachtig deze handleiding alvorens het instrument te gebruiken**

ÍNDEX

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEBRUIK.....	2
2. DE MEETLAT VAN DE BABYTWO ZUIGELINGENWEEGSCHAAL MONTEREN	2
3. METING	3

 AANDACHT!

De operators moeten deze handleiding aandachtig lezen, zich houden aan de instructies die erin worden verstrekt en vertrouwd geraken met de correcte gebruiks- en onderhoudsprocedures van het instrument.

- Bewaar deze handleiding voor verdere raadplegingen en ter ondersteuning van de opleiding van het personeel.
- Voer regelmatig een zorgvuldige reiniging van het product uit zodat het langer meegaat.
- Het instrument moet worden gereinigd met een zacht doek, bevochtigd met water of een neutraal reinigingsmiddel, vermijd het gebruik van oplosmiddelen of schurende stoffen.
- Als het instrument een lange periode niet wordt gebruikt, de batterijen verwijderen
- Let op tijdens het transport van het instrument, zodat het niet wordt onderworpen aan stoten of overmatige mechanische belastingen.
- Wend u voor reparaties of assistentie tot uw verkoper of een erkend servicecentrum, door contact op te nemen met **service2@wunder.it** of **sales@wunder.it**

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEBRUIK

TECHNISCHE SPECIFICATIES


MEETBEREIK	35~80cm
SCHAALVERDELING	1mm
AFMETINGEN	W87 x L30 x H7cm
GEWICHT	700g
BEDRIJFSTEMPERATUUR	10°C~40°C

2. DE MEETLAT VAN DE BABYTWO ZUIGELINGENWEEGSCHAAL MONTEREN


Ga als volgt te werk om de meetlat te installeren:

A) Bevestig de steun van de meetlat aan het weegplateau met de twee meegeleverde kruiskopschroeven (Afb.a)	Afb.A	
B) Schuif de meetlat op de steun die eerder aan het weegplateau is bevestigd (Afb.b)	Afb.B	
C) De installatie is nu voltooid (Afb.c)	Afb.C	

3. METING

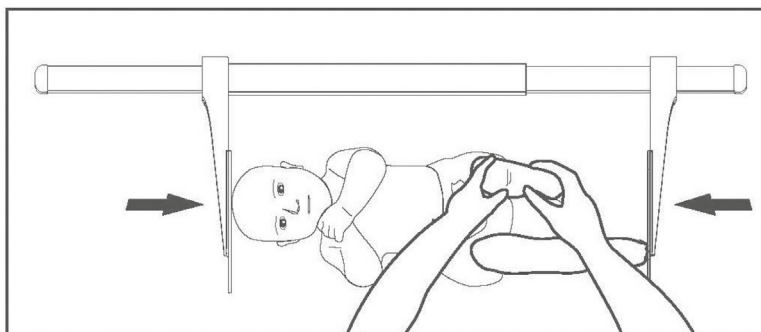

1. Laat het hoofd van het kind lichtjes rusten op de aanslag links
2. Strek de voeten van het kind

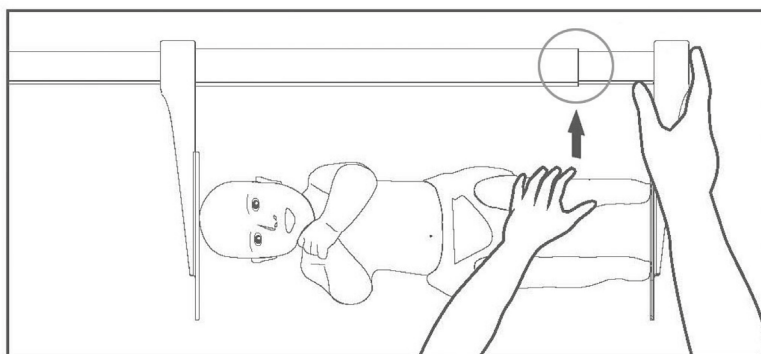

3. Beweeg de rechter aanslag totdat deze de voeten van het kind raakt
4. De lengte van het kind wordt afgelezen op de rode lijn op de meetlat



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it