

STATIVWAAGE 7730/7731

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ GB USER MANUAL
- Ⓜ FR MODE D'EMPLOI
- Ⓜ IT ISTRUZIONI D'USO
- Ⓜ NL GEBRUIKSAANWIJZING
- Ⓜ DK BETJENINGSVEJLEDNING
- Ⓜ SE BRUKSANVISNING
- Ⓜ ES INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ FI KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Ⓜ CZ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ NO BRUKSANVISNING
- Ⓜ TR KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓜ GR Οδηγίες χρήσης



Inbedrijfname

Weegschaal op een stevige vlakke ondergrond plaatsen. Met een waterpas de stelvoetjes instellen en de weegschaal in horizontale stand zetten. De kabel van de stekkeradapter aan de achterkant van het platform erin steken om de weegschaal te voorzien van stroom.

Wegen

Eenvoudig op de weegschaal gaan staan (inschakelen of aanraken is niet nodig).

Lengtemeting met BMI-weergave

Lengtemeter voorzichtig omhoogklappen en naar boven schuiven. Vervolgens het hoofddeel op het hoofd van de patiënt leggen. Op het scherm verschijnt de lengte in cm en daarna automatisch de Body Mass Index.

Tarreren

Met de functietoets aan de achterzijde van het scherm kan de weegschaal worden getarreed. Toets indrukken, op het scherm verschijnt »0,0 kg« en de weegschaal is klaar voor het wegen.

Moeder-/kindfunctie

- Een volwassen persoon gaat op de weegschaal staan.
> Weergegeven wordt bijvoorbeeld »47,6 kg«
- Druk nu op de functietoets. > Weergave wordt op »0,0 kg« gezet
- De moeder kan van de weegschaal stappen ... > weergave »-47,6 kg«
- ... en nu samen met het kind weer op de weegschaal gaan staan.
> Nu ziet u het gewicht van het kind, bijvoorbeeld »5,1 kg«

Als beiden weer van de weegschaal stappen verschijnt op het scherm in dit voorbeeld »-47,6 kg«. Met de functietoets kunt u de weegschaal weer op »0,0 kg« zetten.

De weegschaal wordt niet automatisch op »0,0 kg« gezet, zodat er meerdere keren achter elkaar kan worden getarreed.

Uitschakelen

Het scherm schakelt automatisch uit als het gedurende ca. 15 seconde op »0,0 kg« staat. Om de weegschaal helemaal uit te schakelen verwijderd u de adapter van de weegschaal of trekt de stekker uit het stopcontact.

Ijkteller

 De ijktellerstand geeft aan hoe vaak een weegschaal is gekalibreerd. De opgeslagen tellerstand moet gelijk zijn aan een met een stickermarkering beveiligd ijktellerplaatje.

Weergeven van de ijktellerstand

De ijktellerstand wordt na het insteken van de stekkeradapter twee seconden lang weergegeven.

Service-interface

Kan enkel worden gebruikt voor servicedoelinden aan medisch toegelaten toestellen conform EN 60601-1.
Optioneel: USB-interface

Foutmeldingen

 Err5

Nulstellen

- geen stilstand > vloerstabiliteit controleren
- > contact opnemen met service

 Err6

Tarreren niet mogelijk

- geen stilstand > rustig staan
- negatieve gewichtswaarde
- > stroomtoevoer kort onderbreken



Overbelasting (meer dan 250 kg op het plateau)

- > gewicht van het plateau nemen.



Onderbelasting

- > contact opnemen met service




Bij het inschakelen staat de weegschaal niet op nul


- > weegschaal ontlasten > opnieuw starten > contact opnemen met service

 Err77

Lengtemeter niet in referentiepositie bij het inschakelen

- > lengtemeter bij inschakelen helemaal inklappen en inschuiven

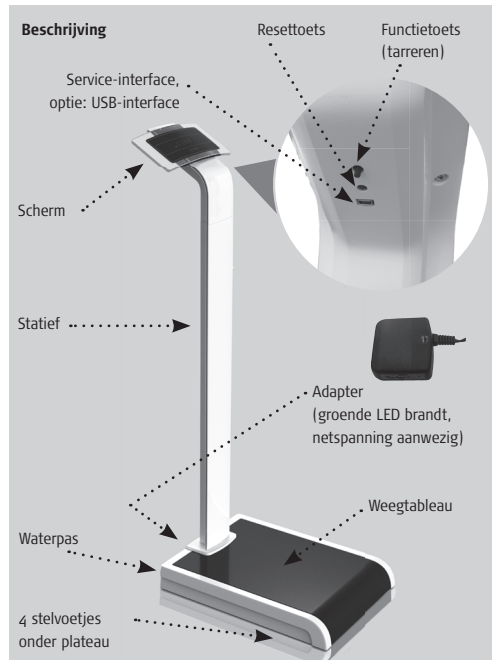

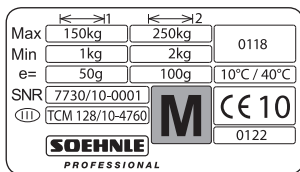

Deutsch

- ↔ Wägebereiche
- Max** Höchstlast des Wägebereichs
- Min** Mindestlast
- e=** Eichwert (Ziffernschritt)
- SNR** Seriennummer
- (II)** Nr. der EG-Zulassung
- 0118** Amtl. Nr. Medizin
- M** Zeichen für EG-Eichung
- 10°C / 40°C** Temperaturgrenzen
- CE 10** EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE10)
- 0122** Amtl. Nr. Waagen

Francias

- ↔ Portée
- Max** Charge maximale de la portée
- Min** Charge minimale
- e=** valeur d'étalonnage (échelon numérique)
- SNR** Numéro de série
- (II)** N° de l'homologation CE
- 0118** N° d'autor. médicale
- M** Marque d'étalonnage CE
- 10 °C / 40 °C** Limites de température
- CE 10** Sigle de conformité CE avec année d'application, simultanément début de la validité de l'étalonnage (p. ex. CE10)
- 0122** N° d'homolog. Balances

English

- ↔ Weighing ranges
- Max** Maximum load for weighing range
- Min** Minimum load
- e=** Calibration value (resolution)
- SNR** Serial number
- (II)** EC certification no.
- 0118** Medical registr. no.
- M** EC calibration mark
- 10°C / 40°C** Temperature limits
- CE 10** EC conformity mark with year of application, simultaneous start of calibration validity (e.g. CE10)
- 0122** Balances registr. no.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

SCALES, SYSTEM SOLUTIONS AND SPECIAL DEVELOPMENTS

All rights reserved. © Soehnle Professional GmbH & Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehnle Professional GmbH & Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten