

seca 745

Hartelijk gefeliciteerd

Met de zuigelingweegschaal seca 745 heeft u een zeer nauwkeurig en tegelijkertijd robuust apparaat verkregen.

Sinds meer dan 150 jaar stelt seca haar ervaring beschikbaar in dienst van de gezondheid en stelt als marktaanvoerder in vele landen der wereld met innovatieve ontwikkelingen voor het wegen en meten steeds nieuwe maatstaven.

De mechanische zuigelingweegschaal seca 745 is voor de toepassing in ziekenhuizen en praktijken van kinderartsen geconcepieerd.

Zij bestaat uit een wit gelakte metalen behuizing en een schaal.

Deze kunnen eenvoudig gereinigd worden en zorgen ervoor dat de zuigeling veilig op de weegschaal kan worden gewogen.

Verder beschikt de seca 745 over een gemakkelijk af te lezen ruiterbalk met 10 g indeling.


Veiligheid

Voor u de nieuwe weegschaal gebruikt, dient u zich een weinig tijd te nemen om de volgende veiligheidsinstructies te lezen:

- Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht.
- Laat de zuigeling nooit zonder toezicht op de weegschaal liggen.
- Let erop, dat de schaal regelmatig wordt gereinigd om infectie met besmettelijke ziektes te vermijden.
- U mag de weegschaal niet laten vallen of aan krachtige stoten blootstellen.
- Laat reparaties alleen door geautoriseerde personen uitvoeren.
- Laat onderhoud en naijken regelmatig uitvoeren.


Weegschaal opstellen en inrichten

1. Verpakking verwijderen
Open de doos en neem de schaal en de weegschaal eruit.

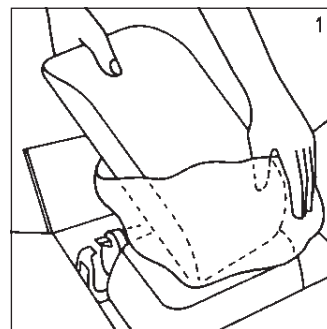


2. Transportbeveiliging verwijderen

Verwijder de O-ring, die voor de beveiliging van de schuifgewichten dient. Bewaar deze voor verdere transporten.

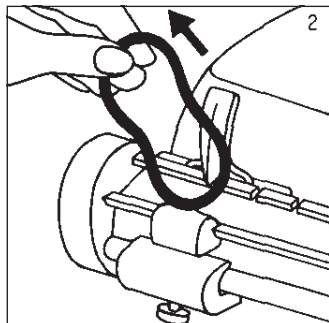


3. Ruiterbalk beveiligen

Beveilig de ruiterbalk door de vastzetinrichting naar onderen te kippen.

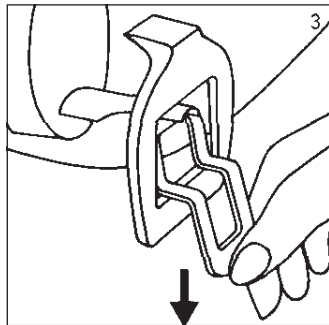


4. Schaal op de weegschaal zetten

Zet de schaal in het midden van de weegschaal. De afsluithendels moeten onder de behuizing grijpen.

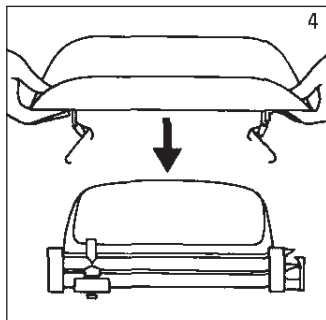


5. Schaal bevestigen

Bevestig de schaal op de weegschaal door de afsluithendel naar beneden te drukken.

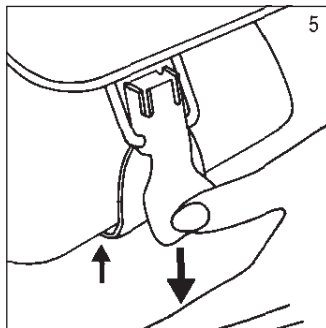


6. Vergrendeling losmaken

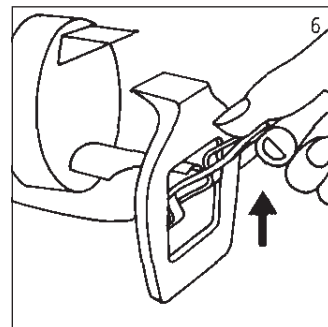

7. Grof tarreren


Opdat de weegschaal een correcte gewichtswaarde weergeeft, moet zij eerst op de gewichtswaarde 0 worden ingesteld. Schuif hiervoor op de ruiterbalk de beide schuifgewichten op 0.

Wanneer de wijzer en de contrawijzer niet tegenover elkaar staan, moet met het tarragewicht de 0-waarde worden ingesteld. Maak daarvoor de kartelmoer (zie afbeelding 8) los en schuif het tarragewicht op de stang zover tot de wijzer en de contrawijzer tegenover elkaar staan.

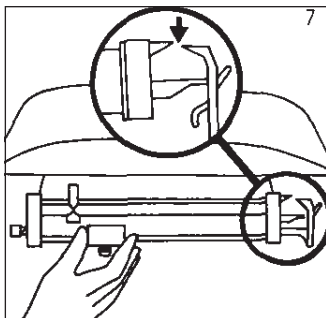


8. Fixeren van het tarragewicht

Fixeer het tarragewicht met de kartelmoer. Met het tarragewicht kunnen voorwerpen op de schaal, bijv. onderlagen enz. tot ca. 3000 g uitgetarreerd worden.

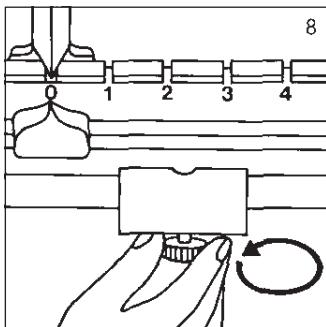

9. Fijne instelling

Door de fijne tarreerschroef kunnen de wijzer en de contrawijzer precies worden ingesteld. Hiervoor wordt de fijne tarreerschroef zover naar links of rechts gedraaid tot de wijzer en de contrawijzer precies tegenover elkaar staan.

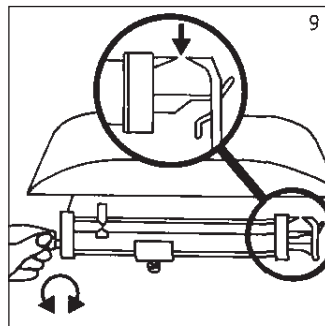

Bediening

Nadat de weegschaal als onder hoofdstuk „weegschaal opstellen en inrichten“ werd voorbereid, kan met het wegen worden begonnen. Daartoe plaatst u de zuigeling in de schaal en schuift u eerst het grote schuifgewicht op de bij benadering juiste gewichtswaarde.

Met het kleine schuifgewicht kunt u nu de exacte gewichtswaarde bepalen. Verschuif daarvoor het kleine schuifgewicht zover, tot de wijzer en de contrawijzer tegenover elkaar staan.

Lees de gewichtswaarde op de scala van de ruiterbalk af.

Reiniging

Reinig de behuizing en de schaal desgewenst met een huishoudreiniger of een in de handel gebruikelijk desinfecteermiddel. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Wat te doen, wanneer...

... bij belasting geen gewichtsheffing plaatsvindt?

- De transportbeveiligingshefboom (zie afbeelding 6) is niet losgemaakt.
- De transportbeveiliging d.w.z. de o-ring werd niet verwijderd.

Onderhoud

Laat de weegschaal in afstanden van 4 jaar onderhouden en naïken. Onderhoud en naïken mag alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd. Richt u zich tot uw servicepartner of de seca-klantendienst.

Technische gegevens

Draagkracht:	16 kg
Indeling:	10 g
Afmetingen (B x H x D):	550 mm 190 mm 305 mm
Eigengewicht:	ca. 6 kg
Temperatuurbereik:	+ 10°C tot + 40°C
IJking	
overeenkomstig	
Richtlijn	
90/384/EEG:	medisch geïkt, klasse III
Medisch product	
overeenkomstig	
richtlijn	
93/42/EEG:	klasse I
Precisie bij	
eerste ijking:	tot 5 kg: +/- 5 g boven 5 kg: +/- 10 g

Verwijderen van afvalstoffen

Wanneer de weegschaal niet meer wordt gebruikt, verstrekt het voor u verantwoordelijke afvalbedrijf inlichtingen over de noodzakelijke maatregelen voor een vakkundige verwijdering.

Garantie

Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaal- of fabricagefouten, geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de aankoopwaarde kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het apparaat zich op een andere plaats bevindt, dan de woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken geldend gemaakt worden, wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer de weegschaal hierin volgens de origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat door personen wordt geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te richten.

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-07-348e/08 G

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria