



Littmann®
Classic III™
Stethoscope



Gebruikershandleiding

3M™ Littmann®

Classic III™-stethoscoop

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe 3M™ Littmann® Classic III™-stethoscoop.

De Littmann Classic III-stethoscoop biedt een uitstekende akoestische gevoeligheid in combinatie met een uitzonderlijke veelzijdigheid. Het innovatieve ontwerp bestaat uit een instelbaar membraan uit één stuk aan beide kanten van het borststuk. De grote zijde is bestemd voor volwassen patiënten, terwijl de kleine zijde vooral nuttig is voor pediatrische toepassingen. Ook kan de pediatrische zijde van het borststuk gemakkelijk worden geconverteerd naar een traditionele kelk door het instelbare membraan te vervangen door de antikoudering die bij de stethoscoop wordt geleverd. Bezoek voor meer informatie de website www.littmann.com.

Verklaring van symbolen

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

 Niet vervaardigd met natuurlijk latexrubber.

Instructies voor gebruik


Stethoscoop in de oren plaatsen

De oorbeugel van deze stethoscoop heeft een vorm die aansluit bij de anatomie van de gemiddelde gehoorgang en is ontworpen voor optimaal comfort en akoestische isolatie. De oordopjes moeten naar voren wijzen terwijl u ze in uw oren steekt.




Spanning van de oorbeugel afstellen

Indien nodig kunt u de spanning op de oorbeugel veranderen om te zorgen dat de dopjes stevig maar comfortabel in uw oren zitten.

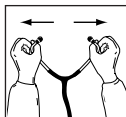

Trek de oorbuisjes uit elkaar om de veerspanning van de oorbeugel te verminderen. Herhaal dit tot u de gewenste spanning hebt bereikt.

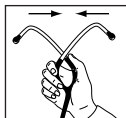


Om de veerspanning van de oorbeugel te verhogen, duwt u de oorbuisjes tegen elkaar. Herhaal dit tot u de gewenste spanning hebt bereikt.

Actieve zijde van het borststuk selecteren


De Littmann Classic III-stethoscoop heeft een tweezijdig borststuk. Er kan altijd slechts één zijde van het borststuk akoestisch actief zijn. Dit is te zien aan een markering op de nippel. Draai het borststuk om de andere zijde akoestisch actief te maken.

Instelbaar Littmann-membraan - Luisteren naar laagfrequente en hoogfrequente geluiden

Beide zijden van het borststuk zijn uitgerust met het gepatenteerde instelbare Littmann-membraan. Dit membraan stelt u in staat om hoogfrequente of laagfrequente geluiden te beluisteren door de druk op de patiënt aan te passen.

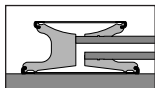

Lage frequenties: als u de nadruk wilt leggen op geluiden met lage frequenties, oefent u lichte druk op de patiënt uit.

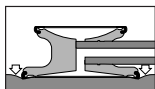

Hoge frequenties: als u de nadruk wilt leggen op geluiden met hoge frequenties, oefent u stevige druk op de patiënt uit.

Converteren naar een traditionele open kelk



De kleine zijde van het borststuk kan met het instelbare Littmann-membraan worden gebruikt of worden veranderd in een traditionele open kelk met behulp van de meegeleverde antikoudering.



Om het instelbare Littmann-membraan te verwijderen, plaatst u de nagels van uw duim en wijsvinger in de rand van het membraan. Trek vervolgens aan het membraan om het van het borststuk af te halen.



Om de antikoudering te monteren, plaats u één zijde van de ring op de rand van het borststuk en trekt u de ring over de rand van het borststuk, zodat deze eromheen komt te zitten.




Verwijder de antikoudering om het instelbare Littmann-membraan weer te monteren. Plaats de flexibele rand van het instelbare membraan in de groef van de rand en duw de flexibele rand voorzichtig rondom en over de rand van het borststuk.

Reiniging, desinfectie en opslag

Reinig uw stethoscoop tussen twee patiënten met een doekje met 70% isopropylalcohol of een wegwerpdoekje met zeep en water. Het is verstandig om bij het reinigen van de stethoscoop een wegwerpdoekje te gebruiken om organisch materiaal te verwijderen.

Voor het desinfecteren van uw stethoscoop kunt u een oplossing van 2% bleekmiddel gebruiken. Stethoscopen waarvan de slang is gekleurd met rode pigmenten (bordeaux, roze, perzik, framboos, oranje enz.) kunnen licht verkleuren bij blootstelling aan bleekmiddel. Vanwege het destructieve karakter van bleekmiddelen dient u bleekoplossingen slechts af en toe en/of indien nodig te gebruiken.

De instelbare membranen, antikoudering en oordopjes kunnen verwijderd worden voor een grondige reiniging (zorg dat alle onderdelen en oppervlakken goed droog zijn voordat u ze weer monteert). Trek stevig aan de oordopjes om ze van de oorbeugel te verwijderen. Om de oordopjes te monteren, duwt u de kleine kant van het oordopje stevig op het oorbuisje tot het dopje op zijn plaats klikt.

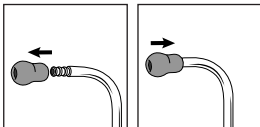

Dompel uw stethoscoop niet onder in vloeistoffen.

Pas geen sterilisatieprocedures op uw stethoscoop toe.

Bewaar uw stethoscoop niet op plaatsen waar extreme hitte heerst.

Service- en garantieprogramma voor Littmann-stethoscopen

Registreer uw stethoscoop online via:
<http://www.littmann.com/warranty-registration>

De Littmann Classic III-stethoscoop is gegarandeerd tegen fouten in materiaal en montage gedurende een periode van vijf (5) jaar. Binnen de garantieperiode worden reparaties gratis uitgevoerd wanneer u de stethoscoop terugstuurt naar 3M, behalve indien er sprake is van misbruik of accidentele schade.


Voor onderhoud en reparatie in de VS gaat u naar www.littmann.com/service of belt u 1-800-292-6298. Als u zich buiten de VS bevindt, kunt u www.littmann.com bezoeken voor de contactgegevens van uw lokale 3M-vestiging.

3M, Littmann, het L Littmann-logo, de L en Classic III zijn handelsmerken van 3M.

Onder licentie gebruikt in Canada.

© 2015, 3M. Alle rechten voorbehouden.



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website www.littmann.com



Not Made
With Natural
Rubber Latex

Consult
instructions
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,
and Classic III are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany