



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

# 3M™ Littmann® CORE digitale stethoscoop

## Snelstartgids

Download de Eko-App in de Apple App Store® of Google Play Store®.

Schakel Bluetooth® draadloze technologie in op uw telefoon of tablet, start de app en schakel de CORE-stethoscoop in.


Eko

## Inhoud doos

- Eko CORE digitaal opzetstuk en 3M™ Littmann® Cardiology IV™-stethoscoop
- Extra set met 3M Littmann klikvastе оordopjes met zachte аfdichting (klein)
- Antikoude kelkmof
- USB-oplaadkabel
- Snelstartgids

## Oordopjes

Houd de оordopjes naar voren gericht als u deze in doet.

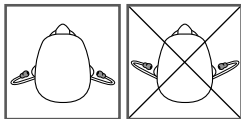

## Volume

Pas het volume met de knoppen (+) en (-) aan. Er zijn 7 volumestappen.

## In- en uitschakelen

Als de CORE uitgeschakeld is, werkt deze als een stethoscoop zonder versterking.

Druk op de aan/uit-knop om de CORE in te schakelen. Het licht begint te knipperen. U hoort nu versterkte en gefilterde geluiden door de оordopjes.

## Telemedische en AI-functies

Eko biedt telemedische en AI-functies waarvoor een softwareabonnement vereist is (apart verkocht indien leverbaar).

U kunt zich hiervoor online via [ekohealth.com](http://ekohealth.com) aanmelden

## Actieve ruisonderdrukking

De CORE-stethoscoop bevat actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluiden te onderdrukken. Actieve ruisonderdrukking kan via de Eko-App worden uit- of ingeschakeld.



## Meldingen

((o@o)) (knipperend)

● (geel)

(••) (geel)

CORE-stethoscoop is ingeschakeld en het apparaat aan het zoeken

CORE-stethoscoop is uitgeschakeld en aan het opladen

De batterij van de CORE-stethoscoop is bijna leeg

○

● (groen)

(••) (blauw)


CORE-stethoscoop is ingeschakeld en verbonden

CORE-stethoscoop is volledig opgeladen

CORE-stethoscoop is aan het opnemen

## Opnemen

Klik op de knop (o) om de opname te starten als de CORE met de Eko-App verbonden is.

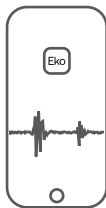

## Opladen

Sluit de micro-USB-kabel op de CORE-stethoscoop aan en maak gebruik van een UL-gecertificeerde of CE-gemarkeerde 5 V USB-wandlader. Het duurt ongeveer 2 uur totdat de CORE-stethoscoop volledig opgeladen is. Het lampje wordt groen als de CORE-stethoscoop volledig opgeladen is.

## Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding door alvorens uw Littmann CORE-stethoscoop te gebruiken. Om de handleiding te bekijken, gaat u naar: [ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Ga naar [HCBGRegulatory.3M.com](http://HCBGRegulatory.3M.com) voor meer informatie over 3M-hulpmiddelen.

## Onderhoud en ondersteuning

Als u zich in de VS bevindt, gaat u naar [littmann.com/service](http://littmann.com/service) of neemt u contact op op 1-800-228-3957. Als u zich buiten de VS bevindt, gaat u naar [littmann.com](http://littmann.com) voor de contactgegevens van uw lokale 3M-vestiging.



Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc.  
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.  
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG  
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

**3M Company**  
2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

EC REP **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

**Eko Devices, Inc.**  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

EC REP **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.  
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11  
34-8726-3344-0