

**Bruksanvisning**

**ETHILON™**  
**POLYAMID 6 ELLER POLYAMID 6,6**  
**STERIL, SYNTETISK, IKKE-ABSORBERBAR KIRURGISK SUTUR, USP / Ph. Eur.**

**BESKRIVELSE**

ETHILON™-suture er en steril, syntetisk, ikke-absorberbar, kirurgisk monofilament-suture bestående af polyamid 6 [NH-CO-(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>- eller polyamid 6,6 [NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-NH-CO-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-CO]-. ETHILON™-suture er tilgængelig ufarvet og svartfarvet med hematin HCK (fargeindeks 75290) og grønfarvet med D&C Grønn No.5 (fargeindeks 61570) for å bedre synligheden i operasjonsfeltet. ETHILON™-suture er tilgjengelig i en rekke størrelser og lengder, uten nål eller med nåler av ulike størrelser og typer, og som beskrevet i avsnittet LEVERINGSMÅTE.

ETHILON™-suture er utviklet i henhold til kravene til Den europeiske farmakopé (Ph. Eur.) for steril polyamid 6 eller polyamid 6,6-suture og Den amerikanske farmakopé (United States Pharmacopeia, USP) for ikke-absorberbare kirurgiske suturer. Den europeiske farmakopé anerkjenner metriske og Ph. Eur.-størrelser som like, noe som gjenspeiles på merkingen.

**INDIKASJONER**

ETHILON™-suture er ment for bruk i generell bløtvevsapprosimering og/eller ligasjon, inkludert bruk i kardiovaskulær kirurgi, nevrokirurgi og oftalmiske prosedyrer.

**BRUK**

Suturer skal utvelges og implanteres avhengig av pasientens tilstand, kirurgens erfaring, kirurgisk teknikk og størrelse.

**YTELSE / VIRKEMÅTE**

ETHILON™-suture kan forårsake en innledende, minimal inflammatorisk reaksjon i vev, etterfulgt av en gradvis innkapsling av suturen med fibrøst bindevev. Siden polyamid ikke absorberes, kan progressiv hydrolyse av polyamid *in vivo* føre til gradvis tap av strekkstyrke over tid.

no

**KONTRAIINDIKASJONER**

Som følge av det gradvise tapet av strekkstyrke som oppstår i lengre perioder *in vivo*, skal ikke ETHILON™-suture brukes der permanent retensjon av strekkstyrke er ønskelig.

**ADVARSLER**

Brukeren skal være kjent med kirurgiske prosedyrer og teknikker som innbefatter ikke-absorberbare suturer for bruk av ETHILON™-suture for sårlukning, siden sårheisensens kan variere med påføringsstedet og suturmaterialet som brukes.

Godkjent kirurgisk praksis skal følges for håndtering av infiserte eller kontaminerte sår.

Skal ikke resteriliseres / brukes på nytt. Gjenbruk av denne enheten (eller deler av denne enheten) kan føre til produktforringelse, som kan føre til svikt av enheten og/eller krysskontaminering, som kan føre til infeksjon eller overføring av blodbårne patogener til pasienter og brukere. Som med alle andre fremmedlegemer, kan dette produktet videreutvikle en infeksjon.

**FORHOLDSREGLER**

Ved håndtering av dette eller annet suturmateriale skal det utvises forsiktighet for å unngå skade. Unngå klemme- eller krympeskade som følge av bruk av kirurgiske instrumenter, som f.eks. tang eller nålholdere.

Som med alle andre suturmateriale, krever tilstrekkelig knutesikkerhet standard kirurgisk teknikk for flate, firkanterede knuter med ekstra kast, som indikerer kirurgiske omstendigheter og kirurgens erfaring. Bruk av ekstra kast kan være spesielt hensiktsmessig ved knytning av monofilamentsuturer.

Det må utvises forsiktighet for å unngå skade ved håndtering av kirurgiske nåler. Grip nålen i et område som er en tredjedel (1/3) til halvparten (1/2) av avstanden fra festenden til spissen. Hvis det gripes i spissområdet, kan dette forringe penetreringsytelsen og forårsake nålfraktur. Hvis det holdes på festenden, kan dette forårsake bøyning eller knekk. Hvis nåler omformes, kan de miste styrken og bli mindre resistente for bøyning og knekk.

Brukerne skal utvises forsiktighet ved håndtering av kirurgiske nåler for å unngå utilsiktede nålstikkader. Ødelagte nåler kan føre til forlengede eller ekstra kirurgiske inngrep eller rester av fremmedlegemer. Utilsiktede

nålestikk med kontaminerte kirurgiske nåler kan føre til overføring av blodbårne patogener. Kast brukte nåler i beholdere merket "Skarpe gjenstander".

**BIVIRKNINGER**

Bivirkninger knyttet til bruken av denne enheten inkluderer sårheisensens, gradvis tap av strekkstyrke over tid, kalkdannelse i urin- eller galleverier ved langvarig kontakt med saltløsninger slik som urin eller galle, minimal inflammatorisk vevsreaksjon og forbigående lokal irritasjon på størstedet.

**STERILITET**

ETHILON™-suture steriliseres ved bestråling. Skal ikke resteriliseres. Ikke bruk hvis pakningen er åpnet eller skadet. Kast åpnede, ubrukte suturer.

**OPPBEVARING**

Ingen spesielle oppbevaringsforhold kreves. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

**LEVERINGSMÅTE**

Vær oppmerksom på at ikke alle størrelser er tilgjengelige på alle markeder. Kontakt din lokale salgspresentant for tilgjengelige størrelser. ETHILON™-suture er tilgjengelig som sterile monofilamenttråder i USP-størrelsene 11-0 til 2 (metriske størrelser 0,1–5,0) i en rekke lengder med og uten permanent festede nåler.


Suturene er også tilgjengelige i pakninger som inneholder følgende: 1. Blyplombe og kirurgisk suturhylse der blyplommen brukes til å holde suturhylsen på riktig plass i forhold til suturknuten for å opprettholde korrekt tensjon.

2. Retensjonsslange (elastomer-slange), som brukes til å fordele suturens belastning på hudens overflate.


ETHILON™-suture er tilgjengelig i esker med én, to eller tre dusin enheter.

ar معرفة حبة التصنيع القانونية المعترف بها، راجع الملحق الخاص بالمنتج.  
cs Označení zákonného výrobce naleznete na etiketě výrobku.  
de For anerkennt, legal producent henvises der til produktmærkningen.  
da For den behørlig zugelassenen Hersteller siehe Produktetikett.  
el Για πληροφορίες σχετικά με τον αναγνωρισμένο νόμιμο κατασκευαστή, ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.  
en For recognized legal manufacturer, refer to product label.  
es Para conocer el fabricante legal, remítase a la etiqueta del producto.  
fi Tunnistettu laillinen valmistaja käy ilmi tuotetarrasta.  
fr Fabricant légal reconnu, voir l'étiquette du produit.  
hu A jogilag elismert gyártót lásd a termék címkéjén.  
it Per il fabbricante legalmente riconosciuto, consultare l'etichetta del prodotto.  
kk Белгілі заңды өндірушісін анықтау үшін өнім жапсырмасын қараңыз.  
ko 인증된 법적 제조사에 대한 정보는 제품 라벨을 참조하십시오.  
nl Raadpleeg het productetiket voor de erkende wettelijke fabrikant.  
no For anerkjent juridisk produsent, se produktets etikett.  
pl Informacje dotyczące uprawnionego legalnego producenta podano na etykietce produktu.  
pt Para conhecer o fabricante legal reconhecido, consulte a etiqueta do produto.  
ro Pentru producătorul legal recunoscut, a se consulta eticheta produsului.  
ru См. данные об официальном производителе на ярлыке изделия.  
sk Zákonne uznaný výrobca je uvedený na etikete výrobku.  
sv För erkänd, laglig tillverkare, se produktetiketten.  
tr Yetkili yasal imalatçı için ürün etiketine bakınız.  
zh-cn 关于认定的合法制造商的信息，请参阅产品标签。  
zh-tw 有關認定的合法製造廠的資訊，請參閱產品標籤。

 ETHICON, LLC  
475 C Street  
Los Frailes Industrial Park  
Suite 401  
Guaynabo, Puerto Rico 00969  
USA  
1-877-ETHICON  
+1-513-337-6928

 ETHICON, LLC  
Highway 183 Km 8.3  
San Lorenzo, Puerto Rico 00754  
USA  
1-877-ETHICON  
+1-513-337-6928

 Johnson & Johnson International  
c/o European Logistics Centre  
Leonardo Da Vinciiaan, 15  
BE-1831 Diegem  
Belgium  
+1-513-337-6928

 Johnson & Johnson Medical GmbH  
Robert-Koch-Strasse 1  
Norderstedt  
22851  
Germany

**ETHILON™**

pt FIO DE SUTURA  
ro FIR DE SUTURĂ  
ru ШОБНЬИ МАТЕРИАЛ  
sk CHIRURGICKÁ NIŤ  
sv SUTUR  
tr SÜTÜR  
zh-cn 缝线  
zh-tw 缝合線

fr FIL DE SUTURE  
hu VARRÓVNYAG  
it SUTURA  
kk ТІТІ МАТЕРІАЛЫ  
ko 봉합사  
nl HECHTMATERIAAL  
no SUTUR  
pl NICI CHIRURGICZNE


ar خيط جراحى  
cs ŠÍČÍ MATERIÁL  
da SUTUR  
de NAHTMATERIAL  
el ΠΑΜΜΑ  
en SUTURE  
es SUTURA  
fi OMMELAINE




390323R02  
LAB100601593v2  
08/2019



© Ethicon, Inc. 2015

 لا تستعمل لمدة واحدة فقط  
**ar** - **cs**-Nepoužívat znovu /  
**da**-Må ikke genbruges / **de**-Nicht zur Wiederverwendung /  
**el**-Μην επαναχρησιμοποιείτε / **en**-Do not re-use /  
**es**-No reutilizar / **fi**-Ei saa käyttää uudelleen / **fr**-Ne pas réutiliser / **hu**-Ne használja újra / **it**-Non riutilizzare /  
**kk**-Қайта пайдаланбаңыз /  
**ko**-재사용하지 마십시오 / **nl**-Niet opnieuw gebruiken / **no**-Skal ikke brukes flere ganger / **pl**-Nie używać powtórnie / **pt**-Não reutilizar / **ro**-Nu reutilizați / **ru**-Ne использовать повторно / **sk**-Nepoužívať opakovane / **sv**-Får ej återanvändas / **tr**-Tekrar kullanılmayın / **zh-cn**-不得重复使用 / **zh-tw**-不得重複使用


 **ar** / **cs**-Použit do data /  
**da**-Anvendes inden / **de**-Verwendbar bis (Datum) /  
**el**-Χρησιμοποιή μέχρι / **en**-Use-by date / **es**-Usar antes de fecha / **fi**-Viimeinen käyttöpäivä / **fr**-A utiliser avant / **hu**-Lejárató idő / **it**-Utilizzare entro il /  
**kk**-Жарамдылык мерзімі /  
**ko**-사용기한일 / **nl**-Uiterste gebruiksdatum /  
**no**-Utløpsdato / **pl**-Wykorzystać do dnia /  
**pt**-Data de validade / **ro**-A se utiliza până la data de /  
**ru**-Использовать до (даты) / **sk**-Datum spotreby /  
**sv**-Används före-datum / **tr**-Son kullanma tarihi /  
**zh-cn**-使用有效期 / **zh-tw**-使用有效日期

**LOT**  
**ar** - **cs**-Kód šarže / **da**-Batch kode /  
**de**-Chargenbezeichnung / **el**-Κωδικός παρτίδας /  
**en**-Batch code / **es**-Código de lote / **fi**-Eräkoodi /  
**fr**-Code de lot / **hu**-Ététéklőd / **it**-Codice di lotto /  
**kk**-Бума коды / **ko**-배치 코드 /  
**nl**-Batchcode / **no**-Batchkode / **pl**-Kod partii / **pt**-Código do lote / **ro**-Codul lotului / **ru**-Код партии / **sk**-Kód šarže / **sv**-Satskod / **tr**-Parti kodu / **zh-cn**-批号 / **zh-tw**-批號


**STERILE R**  
**ar** - **cs**-Sterilizováno radiací / **da**-Steriliseret ved stråling / **de**-Sterilisiert durch Bestrahlung / **el**-Αποστειρωμένο με χημική ακτινοβολία / **en**-Sterilized using irradiation / **es**-Esterilizado mediante irradiación / **fi**-Steriloitu sädettämällä / **fr**-Stérilisé par irradiation / **hu**-Besugárzással sterilizálva / **it**-Sterilizzato con radiazioni ionizzanti / **kk**-Сәулелену арқылы зарарсыздандырылған / **ko**-방사선조사를 사용하여 멸균되었음 /

**STERILE R**  
**nl**-Gesteriliseerd door bestraling / **no**-Sterilisert med stråling / **pl**-Wysterylizowano promieniowaniem / **pt**-Esterilizado por irradiação / **ro**-Sterilizat prin iradiere / **ru**-Стерилизовано облучением / **sk**-Sterilizované žiarením / **sv**-Steriliserad med strålning / **tr**-İşme ile sterilize edilmiştir / **zh-cn**-使用辐照灭菌 / **zh-tw**-經放射線滅菌

**REF**  
**ar** - **cs**-Katalogové číslo / **da**-Varenummer / **de**-Katalognummer / **el**-Αριθμός καταλόγου / **en**-Catalogue Number / **es**-Número de catálogo / **fi**-Luettelunumero / **fr**-Numéro de référence au catalogue / **hu**-Katalógusszám / **it**-Numero di catalogo / **kk**-Каталог бойынша нөмөрі / **ko**-카탈로그 번호 / **nl**-Catalogusnummer / **no**-Katalognummer / **pl**-Numer katalogowy / **pt**-Número de catálogo / **ro**-Număr de catalog / **ru**-Номер по каталогу / **sk**-Katalógové číslo / **sv**-Katalognummer / **tr**-Katalog numarasi / **zh-cn**-目录编号 / **zh-tw**-目錄型號


 **ar** - **cs**-Upozornění / **da**-Bemærk / **de**-Achtung / **el**-Προσοχή / **en**-Caution / **es**-Atención / **fi**-Huomio / **fr**-Attention / **hu**-Vigyázat / **it**-Attenzione / **kk**-Назар аударыңыз / **ko**-주의 / **nl**-Let op / **no**-Forsiktig / **pl**-Przeostroga / **pt**-Atenção / **ro**-Atentie / **ru**-Внимание / **sk**-Upozornenie / **sv**-Obs / **tr**-Dikkat / **zh-cn**-注意 / **zh-tw**-注意

 **ar** - **cs**-Výrobce / **da**-Producent / **de**-Hersteller / **el**-Κατασκευαστής / **en**-Manufacturer / **es**-Fabricante / **fi**-Valmistaja / **fr**-Fabricant / **hu**-Gyártó / **it**-Fabbricante / **kk**-Дайындаушы / **ko**-제조사 / **nl**-Fabrikant / **no**-Produsent / **pl**-Producent / **pt**-Fabricante / **ro**-Producător / **ru**-Производитель / **sk**-Výrobca / **sv**-Tillverkare / **tr**-İmalatçı / **zh-cn**-制造商 / **zh-tw**-製造廠

 **ar** - **cs**-Neprovádět opětovnou sterilizaci / **da**-Må ikke resteriliseres / **de**-Nicht erneut sterilisieren / **el**-Μην επαναποστειρωθείτε / **en**-Do not re-sterilize / **es**-No reesterilizar / **fi**-Ei saa steriloida uudelleen / **fr**-Ne pas restériliser / **hu**-Ne sterilizálja újra / **it**-Non risterrilizzare / **kk**-Қайта зарарсыздандырмаңыз / **ko**-재멸균하지 마십시오 / **nl**-Niet opnieuw steriliseren / **no**-Skal ikke resteriliseres / **pl**-Nie wyjalawiać powtórnie / **pt**-Não reesterilizar / **ro**-Nu reesterilizați / **ru**-Не стерилизовать повторно / **sk**-Nesterilizujte opakovane / **sv**-Får ej omsteriliseras / **tr**-Tekrar sterilize etmeyin / **zh-cn**-不得重复灭菌 / **zh-tw**-不得重複滅菌


**EC REP**  
**ar** - **cs**-Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství / **da**-Autoriseret repræsentant i EU / **de**-Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft / **el**-Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / **en**-Authorized Representative in the European Community / **es**-Representante autorizado en la Comunidad Europea / **fi**-Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / **fr**-Mandataire agréé dans la Communauté européenne / **hu**-Engedélyelt rendelkező képviselő az Európai Közösségen / **it**-Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / **kk**-ЕР Resmi өкілі / **ko**-유럽연합 공식 대리인 / **nl**-Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Unie / **no**-Autorisert representant i EU / **pl**-Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / **pt**-Representante autorizado na Comunidade Europeia / **ro**-Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / **ru**-Официальный представитель в ЕС / **sk**-Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / **sv**-Auktoriserad representant i Europeiska gemenskaperna / **tr**-Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / **zh-cn**-欧洲共同体授权代理 / **zh-tw**-歐洲共同體授權代表

 **ar** - **cs**-Příloha není součástí výrobku / **da**-Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget / **de**-Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / **el**-Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά / **en**-Do not use if package is damaged / **es**-No usar si el empaque está dañado / **fi**-Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut / **fr**-Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / **hu**-Ne használja, ha a csomagolás megsérült / **it**-Non utilizzare se l'imballaggio non è integro / **kk**-Егер қаптама зақымданған болса пайдаланбаңыз / **ko**-포장이 파손되어 있는 경우에는 사용하지 마십시오 / **nl**-Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is / **no**-Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet / **pl**-Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / **pt**-Não utilizar se a embalagem estiver danificada / **ro**-Nu se utilizează dacă ambalajul este deteriorat / **ru**-Не использовать, если упаковка повреждена / **sk**-Nepoužívať, ak je obal poškodený / **sv**-Får inte användas om förpackningen är skadad / **tr**-Ambalaj hasarlıysa kullanılmayın / **zh-cn**-如果包装有损坏，不得使用 / **zh-tw**-如果包装有破損，不得使用

 **ar** - **cs**-Počet kusů / **da**-Antal enheder / **de**-Stückzahl / **el**-Αριθμός μονάδων / **en**-Number of Units / **es**-Número de unidades / **fi**-Yksiköiden lukumäärä / **fr**-Nombre d'unités / **hu**-Az egységek száma / **it**-Numero di unità / **kk**-Бірліктер саны / **ko**-제품 개수 / **nl**-Aantal eenheden / **no**-Antall enheter / **pl**-Liczba jednostek / **pt**-Número de unidades / **ro**-Număr de unități / **ru**-Число единиц / **sk**-Počet kusov / **sv**-Antal enheter / **tr**-Ünite sayısı / **zh-cn**-件数 / **zh-tw**-數量

**MS/X**  
**ar** - **cs**-Multi-strand / **da**-Flertrådet / **de**-Mehrfachstrang / **el**-Πολυκλώβιο νήμα / **en**-Multi-strand / **es**-Multithebra / **fi**-Monilankainen / **fr**-Multibrins / **hu**-Többszáls / **it**-Multifilo / **kk**-Көп түйін / **ko**-다중 가닥 / **nl**-Meerdere draden / **no**-Flertådet / **pl**-Wielopasmowy / **pt**-Multifios / **ro**-Multifilament / **ru**-Мультижильный / **sk**-Viacvláková / **sv**-Multi-strand / **tr**-Çok iplikli / **zh-cn**-多股 / **zh-tw**-多股


 **ar** - **cs**-ZDE ODLoupNĚTE / **da**-TRÆK AF / **LOFT** / **ÅBEN HER** / **de**-HIER ABZIEHEN / **ANHEBEN** / **ÖFFNEN** / **el**-ΑΠΟΚΛΗΜΕΤΕ / **ANAKKOZTE** / **ANÓTETE** ΕΔΩ / **en**-PEEL LIFT / **OPEN HERE** / **es**-DESPEINDE / **LEVANTAR** / **ABRIR** AQUÍ / **fi**-KUIORI / **NOSTA** / **AVAA** TÄSTÄ / **fr**-DÉTACHEZ / **SOULEVEZ** / **OUVRIR** ICI / **hu**-ITT HÚZZA LE / **EMELJE** FEL / **NYISSA** FEL / **it**-STRAPPARE / **SOLLEVARE** / **APRIRE** QUI / **kk**-ОСЫ ЖЕРДЕН СЫДЫРЫЛЫҢЫЗ / **KÖTEPIHİZ** / **АШЫЛЫҢЫЗ** / **ko**-여기를 떼어 내십시오 / **올리십시오** / **개봉하십시오** / **nl**-HIER OPENTREKKEN / **OMHOOGTREKKEN** / **OPENEN** / **no**-RIV / **LOFT** / **ÅPNE** HER / **pl**-ODERWAC / **UNIĘŚĆ** / **OTWIERACZTUJ** / **pt**-PUXAR / **LEVANTAR** / **ABRIR** AQUÍ / **ro**-ZDĂRĂCUI / **RĂDUCI** / **DESCHIDEȚI** AICI / **ru**-ЧРНТЬ / **ПРИПОДНТЬ** / **ОТКРЫТЬ** ЗДЕСЬ / **sk**-TU ODLUPNÚT / **NADVIHNÚT** / **OTVORIŤ** / **sv**-DRA AV / **LYFT** / **OPPNÄ** HÄR / **tr**-BURADAN SOYUN / **KALDIRIN** / **AÇIN** / **zh-cn**-剥开 / **提起** / **此处开开** / **zh-tw**-剝開 / **提起** / **此處開啟**

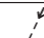 **ar** - **cs**-ZDE OTRHNĚTE / **da**-RIV HER / **de**-HIER AUFREISSEN / **el**-ΞΕΚΛΙΣΤΕ ΕΔΩ / **en**-TEAR HERE / **es**-RASGAR AQUÍ / **fi**-REVI TÄSTÄ / **fr**-DÉCHIRER ICI / **hu**-ITT SZAKÍTSA LE / **it**-ROMPERE QUI / **kk**-ОСЫ ЖЕРДЕН ЖЫРТЫЛЫҢЫЗ / **ko**-여기를 찢으십시오 / **nl**-HIER AFSCHEUREN / **no**-RIV HER / **pl**-ROZERWAC W TYM MIEJSIU / **pt**-RASGAR AQUÍ / **ro**-RUPETI AICI / **ru**-ОТОВАРЬ ЗДЕСЬ / **sk**-TU ODRHNÚT / **sv**-RIV HÄR / **tr**-BÜRADAN YRITIN / **zh-cn**-由此撕开 / **zh-tw**-在此撕開

THIS PANEL IS LEFT BLANK INTENTIONALLY.

### IFU PRINTING SPECIFICATION SHEET





#### PAGE LAYOUT

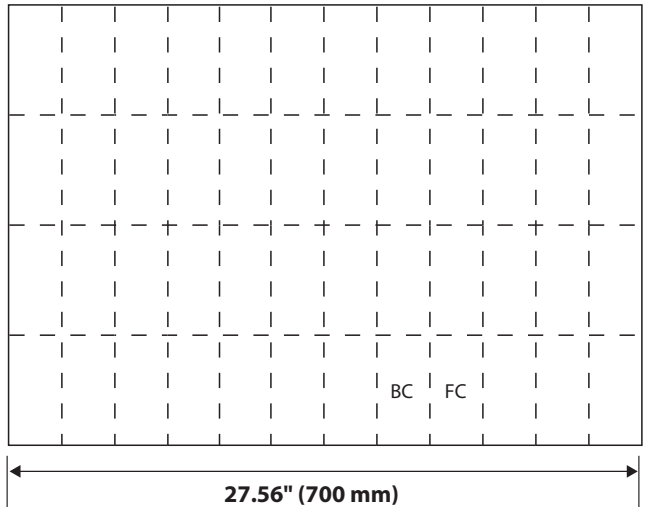

27.56" (700 mm)

Flat Size

#### FOLD PATTERN

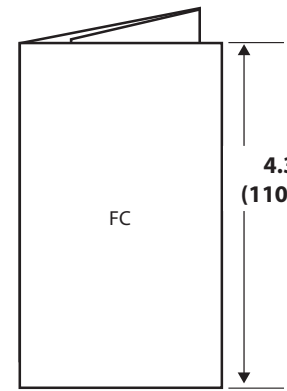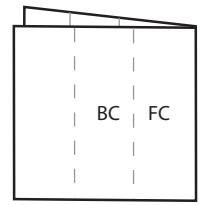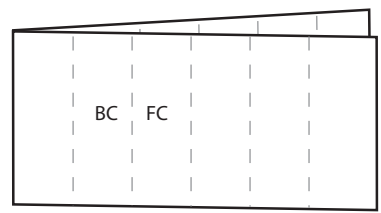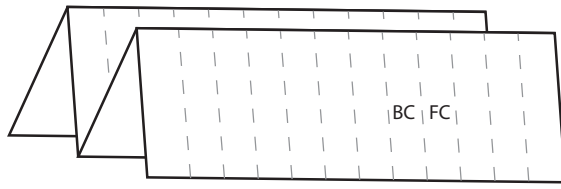

17.28"  
(439 mm)

4.32"  
(110 mm)

2.3" (58.42 mm)

Folded Size

TITLE <b>ETHILON™</b>		DESCRIPTION <b>Map IFU</b>		LAB NUMBER <b>LAB100601593v2</b>	SPECIAL INSTRUCTIONS/COMMENTS n/a			BINDING n/a	COLORS <b>Black</b>			
FLAT SIZE <b>27.56" x 17.28"</b> <b>700 mm x 439 mm</b>		FOLDED SIZE <b>2.3" x 4.32"</b> <b>58.42 mm x 110 mm</b>		RMC NUMBER <b>390323R02</b>	PAGE COUNT <b>2</b>		LANGUAGES <b>ar, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, it, kk, ko, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sv, tr, zh-cn, zh-tw</b>		SELF COVER <input checked="" type="checkbox"/>	PLUS COVER <input type="checkbox"/>	SEALING METHOD	WAFER SEAL <input checked="" type="checkbox"/>
BLEED SIZE .5" (12.7 mm) <input type="checkbox"/> .125" (3.175 mm) <input type="checkbox"/>		NONE <input checked="" type="checkbox"/> BLEED ALL SIDES <input type="checkbox"/>		BLEED TOP <input type="checkbox"/>	BLEED RIGHT <input type="checkbox"/>	BLEED LEFT <input type="checkbox"/>	BLEED BOTTOM <input type="checkbox"/>	<b>DRAWING IS NOT TO SCALE:</b> DRAWINGS REFLECT INFORMATION FOR PRODUCTION OF PRINTED PIECES AND DO NOT CONTAIN ACTUAL ARTWORK. This document or data herein or herewith is not to be reproduced, used or disclosed in whole or part without the permission of Ethicon, Inc.				
STOCK Refer to MS159-007					<b>ETHICON</b>							