

# Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Straight)

BRUKSANVISNING

CE 0086

Manufacturer:  
**Smiths Medical International Ltd.**  
St. Crispin Way, Haslingden,  
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.  
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:  
**Smiths Medical ASD, Inc.**  
201 West Queen St,  
Southington, CT 06489, USA.  
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:  
**Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.**  
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,  
Brisbane, QLD 4113, Australia.  
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com

smiths medical

CCN.004/008/015 REV.001 06/12



no Norsk

Forsiktig



Til engangsbruk



Skal ikke resteriliseres



Katalognummer



Kode for parti



Produksjonsdato



Brukes innen



Produsent



Inneholder ikke naturlig gummlateks



Antall

STERILE EO

Sterilisert med etylenoksid



Ikke-pyrogene væskebanekomponenter



Temperaturgenre



Denne siden opp



Skjøre saker, håndteres forsiktig



Må ikke brukes hvis emballasjen er ødelagt



Oppbevares tørt



Oppbevares utenfor direkte sollys

Norsk

no

## Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ (Rett)

### BRUKSANVISNING

Denne bruksanvisningen gjelder ved bruk av følgende produkter fra Jelco®:


7130 til 7138 & 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP 14G til 24G  
7260 til 7269 & 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR 14G til 24G

**Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes på en trygg måte. Les hele innholdet i denne bruksanvisningen, også Advarsler og forsiktighetsregler, før systemet tas i bruk. Hvis advarsler, forsiktighetsregler og bruksanvisning ikke følges nøye, kan det føre til dødsfall eller alvorlig skade på pasient og/eller helsepersonell.**

**MERK: DETTE VEDLEGGET SKAL SENDES UT TIL ALLE STEDER HVOR PRODUKTET ER LAGRET**

#### 1. BESKRIVELSE:

Alle utgaver av Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ består av en innføringsnål og en innebygd nålespissbeskyttelse. Hoveddelene er: (1) avfaset spiss, (2) nål, (3) kateter, (4) kateterkobling, (5) spissbeskyttelse, (6) glimtkammer, (7) sett for glimtplugg, (8) hylse, (9) nålekoplingskammer.

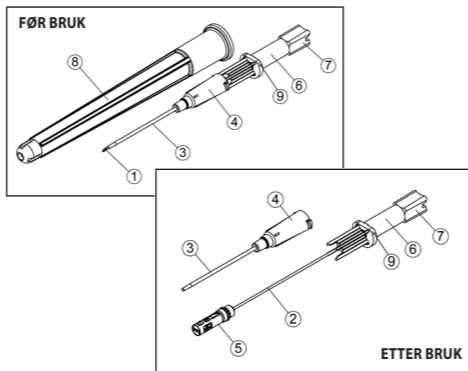

#### TABELL FOR KATETERMÅL OG REFERANSER

Mål	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Farge	Oransje	Grå	Grønn	Rosa	Blå	Gul

Dette utstyret er beregnet til bruk på enkeltpasienter og leveres sterilt og ikke-pyrogen. Materialene som er brukt ved tilvirkning av dette strålingsugjennomsiknelige IV-kateteret inneholder ikke lateks og er uten PVC og DEHP.

#### 2. INDIKASJONER:

- Et korrekt innsatt Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ gir tilgang til en vene eller en arterie for å ta blodprøver, overvåke blodtrykk eller tilføre væske.
- Spissbeskyttelsen som låses fast over nålen når denne trekkes ut bidrar til å minske risikoen for utilsiktede nålestikk.
- Disse katetrene kan brukes til enhver pasientpopulasjon under hensyntagen til pasientens størrelse, egnethet av oppløsningen som skal infunderes og behandlingens varighet.
- Katetre i størrelsene 14 til 24G kan brukes med motoriserte injeksjonssprøyter opp til 300 psi.

#### 3. KONTRAINDIKASJONER:

Ingen kjente.

#### 4. ADVARSEL:

- For korrekt bruk må HELSEPERSONELLET VÆRE OPPLÆRT I VENEPUNKSJONS PRAKSIS, og må følge bruksanvisningen. Hvis bruksanvisningen ikke følges nøye, kan det føre til dødsfall eller alvorlig skade på pasient og/eller helsepersonell.
- Slik forhindres faren for emboli:
  - KATETERET MÅ IKKE SKJÆRES AV og skarpe instrumenter må ikke benyttes i nærheten av kateteret.**
  - Innføringsnålen må aldri settes inn i kateteret på nytt, da den kan stikke hull.**
- Slik unngås utilsiktede nålestikk:
  - IKKE BØY NÅLEN under innsetting, trøying eller når katetersettet skal tas ut.**
  - Hvis venepunksjonen ikke er vellykket, kobles sikkerhetsmekanismen inn og både nål og kateter kastes.**
  - Dersom utstyret mot formodning ikke låses ut, skal spissen umiddelbart kastes i en godkjent beholder for skarpe gjenstander.**

- Nålen er ikke ment å skulle brukes med en ledewire – slik bruk vil hindre at spissbeskyttelsen aktiveres.
- Spissbeskyttelsen må ikke håndteres før eller etter bruk.

#### 5. FORSIKTIGHETSREGLER:

- Produktet er sterilt, ikke-toksisk og ikke-pyrogen så sant ikke emballasjen er åpnet, våt eller beskadiget. Må kastes hvis den er åpnet, våt eller beskadiget.
- Påse at kateteret er gjennomgående åpent før motorisert injeksjonssprøyte brukes. Bruk av injeksjonssprøytetrykk høyere enn 300 psi kan forårsake lekkasje og/eller skade på utstyret. Kateteret må ikke få knekk eller tettes til mens det benyttes motorisert injeksjonssprøyte. Påse at injektoren er korrekt kalibrert og at den stopper automatisk ved et trykk over 300 psi.

#### 6. FORSIKTIGHETSREGLER:

- Dette utstyret er utformet slik at risikoen for utilsiktede nålestikk skal være minst mulig. I tillegg til denne bruksanvisningen anbefales det at helsepersonellet følger anbefalingene som CDC har fastsatt og dessuten de amerikanske OSHA-standardene eller tilsvarende lokale standarder

for blodbårne patogener ved oppstart, vedlikehold og avhending av IV-katetre for å unngå risiko for eksponering for blod.

- Følg gjeldende retningslinjer og prosedyrer i sykehuset vedrørende innsetting, stell og uttak av katetre.

#### 6.3 Kateteret er kortere enn innføringsnålen. Derfor kan det forekomme

tilbakestrømming av blod før kateterspissen er helt inne i blodkaret. Om nødvendig kan kateteret og nålen føres samlet litt innover for å sikre at kateteret går helt inn i venen. For å unngå utilsikket punksjon av bakre vegg i blodkaret, kan nålen senkes noe så den ligger parallelt med huden.

- Påse at væskeadministrasjon/koplingstilknøyning er sikker for å forhindre lekkasje.

- Påse at kateteret ligger stabilt i pasienten. Dårlig stabilisering kan føre til manglende kartilgang.

#### 7. BRUKSANVISNING:

**På grunn av faren for eksponering for blodbårne patogener må standard forholdsregler følges når IV-kateteret plasseres, brukes og tas ut.**

- Velg og klargjør innstikkestedet i samsvar med sykehusets retningslinjer. Bruk turniké.
- Hylsen tas ut med en rett bevegelse utover, utstyret ses deretter over. Påse at den fargekodete kateterkoplingen er helt påsatt og verifiser at skjæringen på nålen vender oppover.
- Hold enheten i det gjennomsiktige sylindrerformede glimtkammeret. Påse at det flate avsnittet av nålekoplingshuset og nåleskjæringen er orientert oppover.
- Blodkaret forankres ved at huden trekkes forsiktig opp og nålen settes inn i huden og blodkaret i passende vinkel.
- Hvis blodet strømmer tilbake inn i glimtkammeret er dette tegn på at nålen er kommet inn i blodkaret.
- Vinkelen minskes og enheten føres forsiktig inn for å sikre at kateteret kommer inn i blodkaret.
- Turnikéet tas av.
- Press med fingeren mot blodåren distalt for kateterspissen og hold kateterkoplingen fast før nålen tas ut, ta så nålen ut ved å trekke den rett bakover. Spissbeskyttelsen vil da automatisk dekke til nålespissen. Merk: Det vil kjennes lett motstand mens den beskyttede nålen tas ut av kateterkoplingen.
- Merk: Sett ikke spissbeskyttelsen inn i koplingen igjen etter at den er tatt ut.**
- IV-administrasjonsslangen koples til og innstikkestedet stelles i samsvar med sykehusets retningslinjer.
- Enheten kastes umiddelbart i en punkterings- og lekkasjesikker engangsbeholder for skarpe gjenstander.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, designmerket Jelco og designmerket Smiths Medical er varemerker som tilhører Smiths Medical. Symbolet © angir at varemerket er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office og i visse andre land. Alle andre navn og merker som er nevnt, er varemerker, handelsnavn og servicemerker som tilhører de respektive eiere. Det er ingen forbindelse mellom Smiths Medical og Intuitive Surgical.  
© 2012 Smiths Medical. Med enerett.

no

Til engangsbruk.

**Til engangsbruk: Medisinsk utstyr krever særskilte materialeegenskaper for å fungere etter hensikten. Disse egenskapene er kun verifisert etter engangsbruk. Eventuelle forsøk på å gjenprosessere utstyret for gjentatt bruk vil kunne ha negativ effekt på utstyret eller føre til at funksjonsevnen forringes.**

**Steril så lenge enheten er uåpnet og uskadd. Destrueres etter engangsbruk. Må ikke resteriliseres.**