

seca 210

seca
Precision for health

Gratulerer!

Med målematten seca 210 har De kjøpt et presist og samtidig robust lengdemåleapparat for spedbarn.

Målematten seca 210 er produsert for bruk hos leger, på sykehus og ved hjemmebesøk av jordmødre og leger.

Målematten kan rulles sammen og krever dermed kun lite plass. Dessuten befinner det seg hull i mattens hodeanslag, slik at matten kan henges opp på en vegg.

Sikkerhet

Før den nye målematten tas i bruk skal sikkerhetsinformasjonene nedenfor leses nøye.

Følg informasjonene i bruksanvisningen.


- La aldri spedbarnet ligge på målematten uten tilsyn.
- Utfør lengdemålingen kun på et underlag som spedbarnet ikke kan falle ned fra.
- Påse at målematten rengjøres og desinfiseres regelmessig, slik at en overføring av smittsomme sykdommer unngås.
- For å utføre en nøyaktig lengdemåling er det ideelt sett nødvendig med to personer.

Betjening

Måling:

1. Spedbarnet legges på målematten. Spedbarnets hode må ligge inntil målemattens hodeanslag (1).
2. Med høyre hånd skyves fotanslaget (2) i retning av spedbarnets føtter. Med venstre hånd holdes spedbarnet i ro.

3. Benene strekkes ut ved å trykke spedbarnets knær forsiktig ned mot mattens bunn med venstre hånd.
 4. Med høyre hånd legges fotanslaget (2) rett vinklet mot spedbarnets fotsåler.
 5. Kroppslengden avleses på markeringen på målemattens bunn (3).
- Ved å overholde skrittene ovenfor oppnås en nøyaktighet på minst +/- 5 mm.

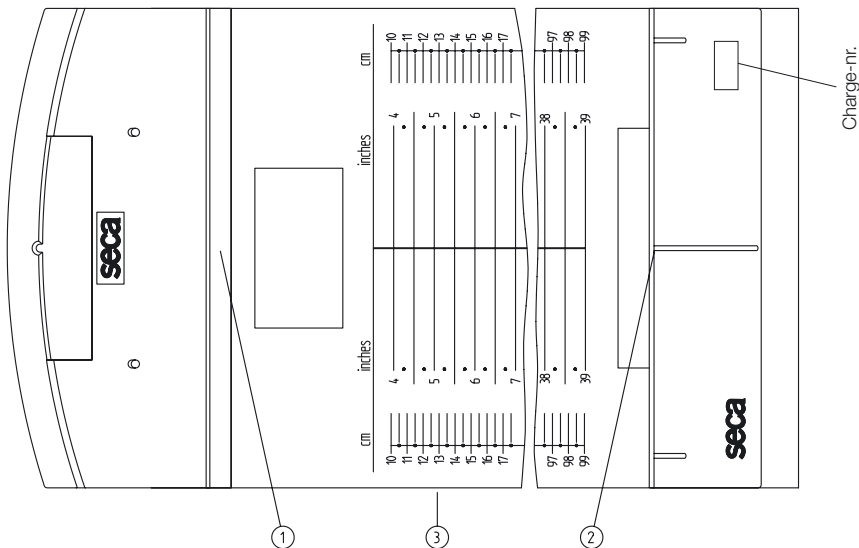

Rengjøring

Målematten skal rengjøres etter behov med et husholdnings-rengjøringsmiddel eller et vanlig desinfeksjonsmiddel. Følg instruksene fra produsenten.

Tekniske data

Måleområde:	100-990 mm / 4-39 tommer
Deling:	5 mm / 1/4 tomme
Nøyaktighet:	bedre enn ± 5 mm
Dimensjoner (b x h x d):	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Egenvekt:	Ca. 500 g
Temperatur- område:	+10°C til +40°C
Medisinsk produkt jf. direktivet 93/42/EEC:	Klasse I med målefunksjon

Avfallsbehandling

Hvis målematten ikke lenger kan brukes, informerer kommunen gjerne om nødvendige tiltak for riktig avfallsbehandling.

Garanti

For mangler som er å tilbakeføre til material- eller produksjonsfeil gjelder en garantifrist på to år fra levering. Alle bevegelige deler, som f.eks. batterier, kabler, nettapparater, oppladbare batterier etc. er unntatt fra garantien. Mangler som faller inn under garantien, utbedres gratis for kunden mot fremleggelse av kjøpskvitteringen. Andre krav kan ikke imøtekommes. Utgifter til transport frem og tilbake belastes kunden hvis apparatet befinner seg på et annet sted enn kundens adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gjøres gjeldende hvis hele originalemballasjen brukes under transporten og varen sikres og festes i emballasjen på samme måte som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare på alle emballasjedeler.

Garantien ugyldiggjøres hvis apparatet åpnes av personer som ikke er uttrykkelig autorisert av seca.

Kunder i utlandet bes i garantitilfeller ta direkte kontakt med forhandleren i vedkommende land.

CE-konformitetserklæring

Mekanisk lengdemåleapparat

Modell seca 210

Charge-nr.: Se målematte

Målematten oppfyller de gjeldende kravene i direktivet 93/42/EEC om medisinske produkter.

seca gmbh & co. kg.



Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: www.seca.com

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-02-222 h/08 L

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria