



GIMA

Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TRANSABDOMINAL AMNIOCENTESIS NEEDLE

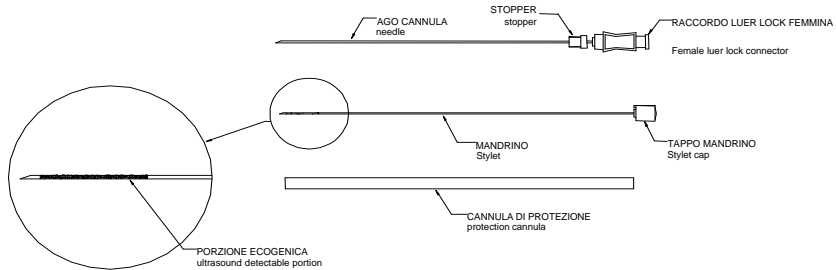

Bruksanvisning

Påse at mandrinen er lukket. Stikk nålen inn med loddrett vinkel for å følge ultralydsporet (identifisert tidligere) opp til fostercisternen. Fjern mandrinen og sett på en 20 cc sprøyte. Sug ut væsken med et langsomt og moderat trykk. Sett mandrinen inn igjen. Ha fostervannet opp i et tørt sterilt reagensrør og oppbevar det ved en temperatur på 37 oC.

Advarsel: må brukes i samråd med legen. Må brukes med en gang etter at pakken har blitt åpnet. Produktet kan inneholde spor av nikkell.

REF 770228 (Gima code 29636) - 770222 (Gima code 29637) -
770201 (Gima code 29638) - 770201 (Gima code 29639) -
770223 (Gima code 29640) - 770202 (Gima code 29641)

CE 0476

STERILE R



RI.MOS s.r.l.
viale Gramsci, 29
41037 Mirandola (MO) Italy

