



Littmann®  
Classic III™  
Stethoscope



# 3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskop bruksanvisning

Gratulerer med kjøpet av ditt nye 3M™ Littmann® Classic III™ Stetoskop.

Littmann Classic III-stetoskopet gir overlegen akustisk ytelse kombinert med eksepsjonell allsidighet. Stetoskopets innovative design har en fleksibel membran i ett stykke på hver side av stetoskophodet. Den store siden kan anvendes for voksne pasienter, mens den lille siden er spesielt nyttig for pediatrik vurdering. I tillegg kan barmesiden av stetoskopet lett konverteres til en tradisjonell klokke ved å skifte ut den fleksible membranen med varmeringen til klokken, levert med stetoskopet. For mer informasjon, se [www.littmann.com](http://www.littmann.com).

## Symbolforklaring

 Konsulter bruksanvisningen.

 Fremstilt uten naturgummi-lateks.

## Bruksanvisning


### Sett stetoskopet i ørene

Stetoskopets hodesett er vinklet for å passe med anatomien til en typisk ørekanal og er utformet til å gi en behagelig, akustisk tettende passform. Øreproppene bør peke fremover når de settes inn i ørene.




### Juster hodesettets spenning

Om nødvendig kan du justere spenningen i hodesettet for å sikre en tett, men behagelig passform i ørene.

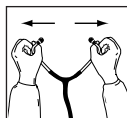

For å redusere fjærspenningen i hodesettet, dra ørebøylene fra hverandre. Gjenta dette til ønsket spenning er oppnådd.

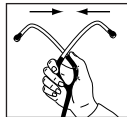

For å øke fjærspenningen, klem ørebøylene sammen. Gjenta dette til ønsket spenning er oppnådd.


NO

## Velg den aktive siden av stetoskophodet.

Littmann Classic III stetoskop har et tosidig stetoskophode. Kun én side av stetoskophodet er akustisk aktivt om gangen, dette er identifisert av et merke på stammen/halsen av stetoskopet. Roter stetoskophodet for å bytte mellom den aktive siden.


## Littmann fleksibel membran – Lytt til lav- og høyfrekvente lyder

Begge sidene av stetoskophodet er utstyrt med den proprietære fleksible Littmann-membranen som gjør det mulig å fremheve enten lav eller høyfrekvente lyder ved å justere trykket mot pasienten.

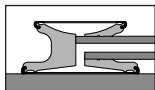

### Lave frekvenser:

For å fremheve lavere frekvenslyder, bruk lett trykk mot pasienten.

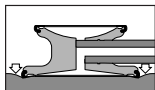

### Høye frekvenser:

For å fremheve høyere frekvenslyder, bruk fast trykk mot pasienten.

## Konverter til en tradisjonell åpen klokke



Den minste siden av stetoskophodet kan brukes sammen med Littmann fleksibel membran eller kan konverteres til en tradisjonell åpen klokke med varmeringmansjett, levert sammen med stetoskopet.



For å fjerne Littmanns fleksible membran, klem til på kanten av membranen med neglene til tommelen og pekefingeren. Trekk og løft membranen av stetoskophodet.



For å montere varmeringen på klokken, plasser én side av mansjetten på kanten av stetoskophodet, og strekk den over og rundt stetoskophodets kant.




For å montere Littmanns fleksible membran på nytt, fjern varmeringen fra klokken. Sett inn den fleksible kanten av den fleksible membranen inn i sporet på kanten og sakte rull kanten rundt og over stetoskophodets kant.

## Rengjøring, desinfisering og oppbevaring

Rengjør stetoskopet mellom hver pasient med enten en klut med 70 % isopropyl alkohol eller bruk en engangsserviett med såpe og vann. Det er beste praksis å bruke en engangsserviett når stetoskopet rengjøres for å fjerne organiske materialer.

En 2 % blekemiddelløsning kan anvendes til å desinfisere stetoskopet. Men, stetoskop som inneholder røde pigmenter i slangefargen (vinrødt, rosa, plomme, fersken, bringebær, appelsin, etc.), gir en svak misfarging etter de er utsatt for blekemiddel. Bare bruk blekemiddelløsning på begrenset grunnlag og/eller når det er nødvendig pga. blekemidlets destruktive natur.

De fleksible membraner, varmeringen og ørepropper kan fjernes for grundig rengjøring (påse at alle deler og overflater er tørre for montering). For å fjerne øreproppene fra hodesettet, dra godt. For å montere øreproppene, trykk den lille siden av øreproppen godt opp på ørebøylen til den klikker helt på plass.

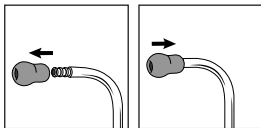

Ikke senk stetoskopet ned i noen væske.

Ikke utsett stetoskopet til noen steriliseringsprosess.

Unngå å oppbevare stetoskopet i sterk varme.

## Littmann stetoskop service og garantiprogram

Registrer stetoskopet ditt online på:  
<http://www.littmann.com/warranty-registration>

Littmann Classic III stetoskop garanteres mot feil i materialet og produksjon i en periode på fem (5) år. Innenfor garantiperioden, utføres reparasjoner uten kostnad ved retur av stetoskopet til 3M, unntatt i tilfeller av åpenbart misbruk eller utilsiktet skade.

For service og reparasjon i USA, kan du gå til [www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) eller ring 1-800-292-6298. Hvis du er utenfor USA, gå til [www.littmann.com](http://www.littmann.com) for kontaktinformasjon til ditt lokale 3M-kontor.


3M, Littmann, L Littmann logoen, L, og Classic III er varemerker tilhørende 3M.

Brukt under lisens i Canada.

© 2015, 3M. Alle rettigheter forbeholdt.

NO



Made in U.S.A. by  **3M Health Care**,  
2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144  
(U.S.A.) 1-800-228-3957 Visit our website [www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Not Made  
With Natural  
Rubber Latex

Consult  
instructions  
for use

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L,  
and Classic III are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

© 2015, 3M. All rights reserved.

Issue Date: 2014-07

34-8716-5219-3



**3M Deutschland GmbH**  
**Health Care Business**

Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
Germany