


BRUKSANVISNING FOR MINISYKKEL

1. Ta hovedkomponenten forsiktig ut av esken. Se bilde 1.
2. Legg ut hovedkomponenten på bakken og sett i skruknott A som vist på bildet. Se bilde 2.
3. Vri på skruknott A slik at aksel B settes under trykk (mot venstre for å øke trykket, motsatt for å redusere trykket). Vri på kalkulatorknapp C og vri aksel B. Den vil umiddelbart være klar. Se på bilde 3 (se bruksanvisningen til kalkulatoren for detaljer).
4. Dra tappen 0 innover etter bruk og legg sammen som vist på bilde 5.
- 5 Merk:
 - (1) Inspiser den og se til at den står stabilt og i vater før den tas i bruk.
 - (2) Ikke glem at trykket må være på minimum når man starter opp og deretter økes til man når ønsket trykk.
 - (3) Egnede personer: voksne, barn, eldre.

ADVARSEL : Ikke stå oppreist på minisykkelen, da det vil skade maskinen.

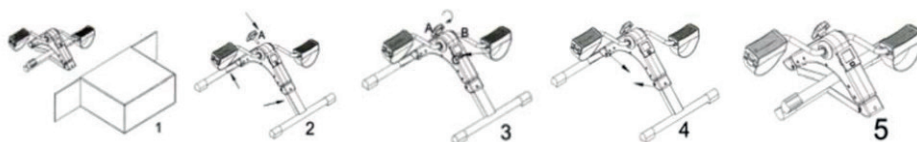

BRUKSANVISNING FOR TRENINGSCOMPUTER

SPESIFIKASJONER:

TIME -----00: 00-99:59MIN
 COUNT-----0-9999
 REPS/MIN-----0-9999
 CALORIE -----0-9999KAL

KEY FUNCTION:

MODE: Denne tasten lar deg velge og låse en ønsket funksjon. Hold inne tasten i 4 sekunder for å tilbakestille alle funksjoner.


BRUKSPROSEDYRE:

AUTO PÅ/AV: Systemet slår seg på når en tast slippes opp, eller når signal mottas fra hastighetssensoren. Monitoren vil automatisk slå seg av hvis det ikke mottas noen signaler på 4 minutter.


FUNKSJON:

TIME Trykk på MODE-knappen inntil ">" peker på TIME. Når hastighetssensoren mottar et signal, starter den sammenregningen og akkumulerer treningstid automatisk når treningen starter.
COUNT Når ">" peker på COUNT, vil treningscomputeren vise stegene. Når hastighetssensoren mottar et signal, starter den sammenregningen og akkumulerer treningstid automatisk når treningen starter.
REPS/MIN Trykk på MODE-knappen inntil "<" peker på REPS/MIN. Når hastighetssensoren mottar et signal, starter den sammenregningen og akkumulerer treningstid automatisk når treningen starter.
CALORIE Ved å trykke på MODE-knappen inntil ">" peker på CAL. Når hastighetssensoren mottar et signal, starter den sammenregningen og akkumulerer kalorier automatisk når treningen starter.
SCAN Når ">" peker på SCAN, vil treningscomputeren automatisk vise følgende funksjoner i den viste rekkefølgen: TIME (tid) -----COUNT (teller)-----STRIDES (skritt)-----CALORIES (kalorier)


MERK 1. Batterispes.:1.5V, LR44 (1 stk) - 2. Ved feilaktig visning på monitoren, vennligst sett inn batteriene på nytt. - 3. Prosedyre for innsetting av batteri:

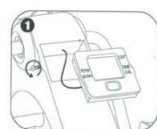


Løse og fjern skruene på hver side av skjermenheten, og fjern deretter skjermenheten forsiktig fra sokkelen.

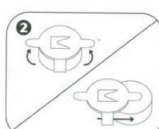

Løft opp batteridekselet på baksiden av skjermenheten og skyv ut batteriet

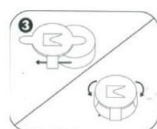

Sett inn et nytt 1.5 V AG13-batteri med den positive polen ned, og lukk dekket.

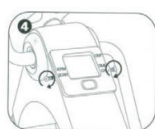

Sett skjermenheten tilbake i sokkelen og fest den med skruen

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard 12-måneders B2B-garanti er gjeldende.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151