



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

JEDNORAZOWY STANDARDOWY FARTUCH CHIRURGICZNY SMMS

POLSKI

Nazwa produktu Jednorazowy standardowy fartuch chirurgiczny SMMS

Kod produktu FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Rozmiar produktu Jednostka: cm

KOD GIMA	21046	21047	21048	21049
KOD FULL GUARD	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Rozmiary	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Długość (od ramienia do dolnej krawędzi)	120	120	130	140
Szerokość (jednowarstwowy)	140	150	150	160
Długość paska	65	65	65	69
Długość rękawa	58	59	59	61
Odczylenie od rozmiaru	±2	±2	±2	±2

Model produktu Rodzaj fartucha. M/L/XL/XXL

Struktura i skład W produkcie zastosowano włókninę SMMS o gramaturze 50g. Składa się z części przedniej, tylnej, rękawów, paska i mankietów. Proces technologiczny polega na cięciu, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wiązaniach, rzepach, mankietach, składaniu, uszczelnianiu.

Przeznaczenie Przedmioty te są sterylizowane metodą EO i służą jako bariera przed przenikaniem cieczy i drobnoustrojów pomiędzy pacjentem a salą operacyjną, innymi urządzeniami chirurgicznymi oraz personelem sali operacyjnej.

Przeciwwskazania Produkty są przeznaczone do jedno-

razowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, produkt jest mokry lub spleśniały. Nie używać.

Jak korzystać z produktu Otwórz opakowanie i wyjmij produkt, delikatnie potrząśnij fartuchem, podnieś boki kołnierza, włoż ręce do rękawów, wyciągnij ramiona do przodu i zawiąż paski.

Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyżej niż 80%.


Ostrzeżenie

- Ten produkt jest produktem do utylizacji, nie używać ponownie.
- Ten produkt jest jednorazowego użytku, nigdy nie udostępniaj go innym.
- Zabrania się używania, gdy opakowanie lub produkty są uszkodzone.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

















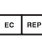



Ważność 3 lata.

Data produkcji Patrz data na opakowaniu

Termin ważności Patrz data na opakowaniu

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

 REF	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w suchym miejscu
 LOT	Kod partii		Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745		Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
	Producent		Data produkcji		Wyrób medyczny
	Sterylizowane tlenkiem etylenu		Data ważności		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Granica wilgotności		Przeczytaj instrukcje użytkownika		Jedno urządzenie, nie używaj ponownie
	Granica temperatury		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Delikatny, obchodź się ostrożnie
	Tą stroną do góry		Unikalny identyfikator urządzenia		

GIMA 21046
GIMA 21047
GIMA 21048
GIMA 21049



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic
Development Zone, Xianning City, Hubei
Province, China
Made in China



FGS-SG-SM50-M
FGS-SG-SM50-L
FGS-SG-SM50-XL
FGS-SG-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



STERILE EO

MD



0123