



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA VETERINARIA - MEDIA**  
**DIGITAL VET SCALE - MEDIUM**  
**BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE**  
**BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA**  
**ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA**  
**VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT**  
**ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - СРЕДЕН**  
**VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR**  
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ**  
**ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN**  
**ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS**  
**SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA**  
**SCALA VETERINARĂ – MEDIE**  
**VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER**

**REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/  
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

**Momert Zrt.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/  
Distribuoány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

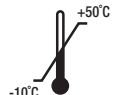

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić powołanie się na zawarte w niej informacje w przyszłości. Upewnić się, że osoby, które używają produktu, zapoznały się z wszystkimi instrukcjami.

### WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA:

- Sprawdzić, czy bateria została włożona lub wymieniona z zachowaniem odpowiedniej biegunowości.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu, wyjąć baterię.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest używane.
- Przedmiotowe urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez opiekuna. Dzieci powinny być stale nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Produktu używać wyłącznie zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wskazanym w Instrukcji Obsługi.
- Urządzenia używać wyłącznie na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Przed czyszczeniem, montażem lub demontażem pokrywy wyłączyć urządzenie i wyjąć baterię!
- Do czyszczenia urządzenia nie używać substancji ściernych lub chemicznie agresywnych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli nie działa poprawnie lub jeżeli zostało upuszczone, uległo uszkodzeniu lub zostało narażone na kontakt z cieczą. Przekazać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Urządzenie jest odpowiednio wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania komercyjnego.
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, jak grzejniki, piece, itp. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Produkt jest delikatnym urządzeniem pomiarowym. Chronić przed uderzeniem lub spadnięciem.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

### NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUCENTA MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ NAPRAWY GWARANCYJNEJ!

#### SPECYFIKACJE:

- Precyzyjny system pomiarowy
- Automatyczne resetowanie do zera
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiej mocy
- Wskaźnik przeciążenia

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 1szt. bateria litowa CR2032 3V (w zestawie)  
 Maksymalna mierzona waga: 3-100 kg  
 Przyrosty ważenia: 100g  
 Rozmiar wyświetlacza: LCD średnica = 8,0 cm, 3,15 cala  
 Platforma: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm  
 Jednostki masy: kg, lb, st  
 Temperatura robocza/przechowywania: 10-40°C/-10-50°C

#### INSTRUKCJE OPERACYJNE

Przed pierwszym użyciem wagi usunąć osłonę z baterii, która znajduje się w tylnej części wagi. Ustawić wagę na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. W przypadku ustawienia na powierzchni miękkiej ( np. na dywanie ) waga może nie wskazać dokładnej wartości.

Uruchomić, naciskając stopą na środkową część platformy.

Na wyświetlaczu pojawi się najpierw pływające wskazanie "8" i następnie wartość "0,0".

Poczekaj na wyświetlenie wartości "0,0"!

Umieścić zwierzę na wadze.

Waga zwierzęcia pojawi się na wyświetlaniu i zamiga dwa razy. Zmierzona waga pozostanie wyświetlona przez 10 sekund.

Jeżeli po włączeniu pomiar wagi nie zostanie wykonany, urządzenie automatycznie się wyłączy po 60 sekundach.

#### WYMIANA BATERII

Baterię należy wymienić, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

**LO**

Otworzyć komorę baterii znajdującą się w tylnej części wagi i ostrożnie wyjąć baterię, wycofując czarny, plastikowy element przytrzymujący. Element przytrzymujący znajduje się w górnej części baterii. Uważać, aby nie uszkodzić metalowego elementu przytrzymującego. Wymienić baterię na nową. Zużyta baterię utylizować prawidłowo.

BATERIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ!

#### OSTRZEŻENIE O PRZECIĄŻENIU

W przypadku przeciążenia waga wyświetli następujący komunikat:

**Err**

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnię urządzenia czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać detergentów lub twardych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia! Nigdy nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, nie płukać i nie zanurzać w wodzie!

#### NAPRAWA I KONSERWACJA

Wszystkie konserwacje i naprawy, które wymagają uzyskania dostępu do wewnętrznych części produktu, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany punkt serwisowy.

#### OCHRONA ŚRODOWISKA

- Materiały opakowaniowe i urządzenie wycofane z eksploatacji mogą być poddane recyklingowi.
- Opakowanie użyte do transportu może być utylizowane jako odpad sortowany.
- Worki z polietylenu muszą być poddane recyklingowi.



**Utylizacja:** Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

#### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.