

**CALIBRO PER ORTOPEDIA
ORTHOPAEDIC CALIPER
PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE
CALIBRE ORTOPÉDICO
MEDIDOR PARA ORTOPEDIA
ORTHOPÄDIE-MESSSCHIEBER
SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA**

**Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do
utilizador - Benutzerhandbuch - Instrukcja użytkownika**

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente

questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de

utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

REF 10460 (GIMA 27325)



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



WSTĘP

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie Klientowi jak największej ilości informacji na temat fałdomierza do pomiaru tkanki tłuszczowej, a także instrukcji obsługi i konserwacji w celu zagwarantowania wydajności i sprawności SUWMIARKI ORTOPEDYCZNEJ.

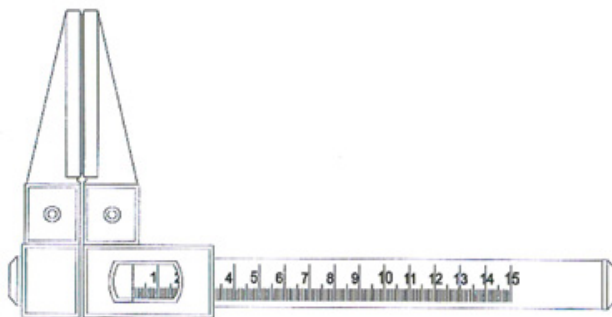
Instrukcja obsługi musi być utrzymywana w dobrym stanie i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA to przyrząd, którego funkcją jest pomiar średnicy lub długości kości ludzkiego ciała w cm, **z dokładnością ± 1 mm**.

Zakres pomiaru wynosi 0-150 mm, co 1 mm, z tolerancją ± 5 mm

SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA wykorzystuje do pomiaru system suwakowy i składa się z **anodyzowanego aluminiowego** pręta milimetrowego i dwóch plastikowych „końcówek”.

**INSTRUKCJE OBSŁUGI**

Zbliżyć dwie końcówki suwmiarki do mierzonej części ciała, przesuwając ruchomą końcówkę, aby zetknęła się z kością; odczytać wartość wskazywaną przez wskaźnik na skali z podziałką.

KILKA PRZYKŁADÓW ZASTOSOWANIA

Średnica kości kolanowej



Średnica kości łokciowej

OSTRZEŻENIA/KONSERWACJA

SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA powinna być używana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Nie używać przyrządu, jeśli jest on uszkodzony. Unikać samodzielnych napraw. W razie potrzeby skontaktować się z producentem.

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić wszystkie części i elementy wchodzące w skład produktu. Sprawdzić, czy wszystkie są obecne i w idealnym stanie.

Czyścić SUWMIARKĘ ORTOPEDYCZNĄ szmatką zwilżoną substancjami, które nie uszkadzają aluminium (np. alkohol - płyn do mycia szyb). SUWMIARKA została zaprojektowana z myślą o trwałości: jest odporna na większość produktów chemicznych, z wyjątkiem ketonów metylowoetylowych (MEK), rozcieńczalników i zmywaczy do paznokci.

SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA musi być zawsze przechowywana w futerale w środowisku, w którym nie występuje wilgoć. Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

OPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH (brak w zestawie)

Nr Elementu	Opis części
1	Końcówki
2	Ruchomy uchwyt
3	Wspornik stały
4	Aluminiowy pręt z podziałką
5	Plastikowa nasadka zamykająca

W celu wymiany komponentów, należy wysłać przyrząd do naszej siedziby.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA jest zgodna z Rozporządzeniem 2017/745

	Kod produktu		Numer partii		Uwaga: Uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami (ostrzeżeniami) dotyczącymi obsługi
	Przechowywać z dala od działania promieni słonecznych		Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu		Numer seryjny
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem 2017/745		Producent		Przeczytać instrukcję obsługi
	Wyrób medyczny		Data produkcji		Importowane przez

WARUNKI GWARANCJI FIRMY GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B Gima.