



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

METRO MISURA NEONATI
BABY HEIGHT MEASURE
TOISE POUR NOURRISSONS
MEDIDOR DE ESTATURA PARA BEBÉS
MEDIÇÃO DA ALTURA DO BEBÊ
GRÖSSENMESSER FÜR BABYS
POMIAR WZROSTU DZIECKA
CSECSEMŐ HOSSZMÉRŐ
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ

قياس طول الطفل

REF

27331



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



0476



Wzrostomierz dla niemowląt i noworodków firmy GIMA to urządzenie precyzyjne do pomiaru wzrostu niemowląt i noworodków w cm i oceny krzywej wzrostu. Wzrostomierz dla niemowląt i noworodków przeznaczony jest do stosowania w poradniach pediatrycznych, szpitalach dziecięcych lub podczas wizyt domowych lekarzy pediatrów. Na górnym wsporniku mocującym znajdują się otwory do zawieszenia maty na ścianie, gdy nie jest używana. Mata może mierzyć 10-99cm z przybliżeniem ± 5 mm.

UŻYTKOWANIE


Jak wykonać pomiar

1. Niemowlę położyć na macie z podziałką po prawidłowym ustawieniu plastikowych ograniczników w pionie pod kątem 90° w stosunku do skali z podziałką. Główkę niemowlęcia oprzyj o plastikowy ogranicznik, trzymając dobrze niemowlę lewą ręką.
 2. Prawą ręką przybliż ogranicznik na końcu podziałki do stóp niemowlęcia.
 3. Uważaj, aby nóżki niemowlęcia były proste. Zaleca się delikatne dociśnięcie lewą ręką kolan niemowlęcia do powierzchni maty.
 4. Gdy końcowy ogranicznik znajduje się na spodzie stóp dziecka ustawionych pod kątem prostym, odczytaj wzrost wskazany na spodzie maty z podziałką.
- Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, można osiągnąć znaczny poziom dokładności.


INTERPRETACJA

Pomiar wzrostu noworodka jest przydatny do określenia prawidłowej krzywej wzrostu poprzez obliczenie percentyli, powiązując wzrost z wagą. „Wagę i wzrost” niemowląt można porównać za pomocą krzywych odniesienia zwanych Tanner-Whitehouse. Te krzywe identyfikują linie (percentyle), które definiują zakres uważany za normalny i akceptowalny w zależności od wieku.

Waga: chłopcy od 0 do 3 lat

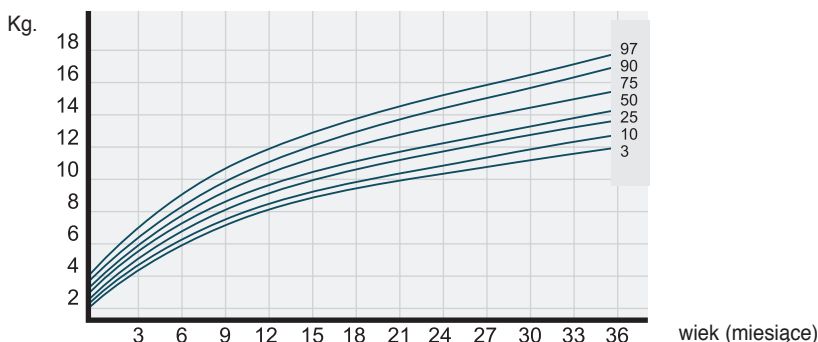

Waga: dziewczynki od 0 do 3 lat

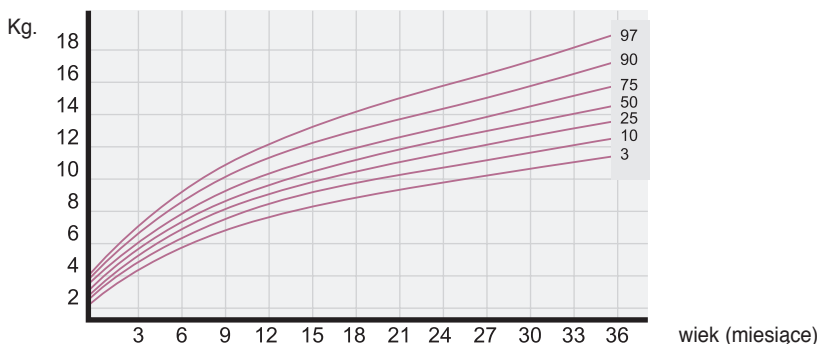

Wskazane jest, aby krzywa wzrostu nie znajdowała się zbyt wysoko ani poniżej średniej (percentyl 50). Percentyl 50 (linia środkowa) wzrostu oznacza, że 50% dzieci w ich wieku jest wyższych, a pozostałe 50% niższych. Użyteczność tych krzywych polega na uwidocznieniu ewentualnych różnic, które mogą prowadzić do wysuwania przypuszczeń (a tym samym do zalecenia wizyty u lekarza prowadzącego) otyłości, braku wzrostu kości lub niskiego wzrostu.

CZYSZCZENIE

Czyść matę łagodnym środkiem myjącym i miękką szmatką.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Nigdy nie zostawiaj niemowlęcia leżącego na macie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Wykonuj pomiar wyłącznie na bezpiecznych powierzchniach podparcia (z których niemowlę nie może spaść).
- Regularnie czyść i dezynfekuj matę z podziałką.

Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu: -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Wilgotność otoczenia podczas pracy: 15~90%

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania i transportu: 15~95%

	Producent		Kod partii
	Numer katalogowy		Granica temperatury
	Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE		Granica wilgotności
	Przeczytaj instrukcje użytkowania		Przechowywać w suchym miejscu
	Ostrzeżenie — Zobacz instrukcję obsługi		Przechowywać z dala od światła słonecznego

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.