


# **FOOTSWITCH** UDI 8 03 36 38 3 20 7 30

REF 00305.04 L-E cut N-E coag IP 67 WATER PROOF 1



cable 5 mt  
LED SpA  
Via M.T. Cicerone 138  
03100 Frosinone (LT) - ITALY

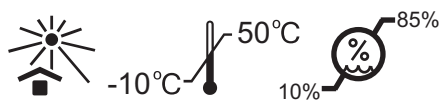

IT EN ES FR DE PT PL IA00305-04W\_ML1 ed. &68 %' 20'' (C) LED SpA

(PL) **PODWÓJNY PRZEŁĄCZNIK NOŻNY WODOODPORNY (300-400)**

Produkt ten jest dostarczany do sterowania nożnego kompatybilnych jednostek elektronicznych.

Sprawdź stan produktu przed użyciem (rys. Wyrzuć uszkodzony produkt).

Ten produkt jest kompatybilny z różnymi wersjami urządzeń, z którymi należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.

Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podłączenie  
- Włóż wtyczkę sterownika nożnego do właściwego gniazda w jednostce elektronicznej, zwracając uwagę na kierunek wkładania (Rys. A 1-2).  
- Aby zablokować wtyczkę należy dokręcić nakrętkę (Rys. A 3).

Włączyć urządzenie i wykonać kilka prób naciskając na sterownik nożny (Rys. A 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(PL) **NACIŚNIĘCIE = AKTYWACJA / ZWOLNIENIE = BRAK AKTYWACJI**  
**ŻÓŁTY = CIĘCIE / NIEBIESKI = KOAGULACJA**