

# FOOTSWITCH

REF 00305.06\_S

1-2 cut  
2-3 coag  
4-5 cc  
6 nc

**SURGEON**

IP 67  
WATER PROOF




EXPLOSION PROOF

cable 5 mt



MADE IN ITALY

LED SpA  
Via M.T.Cicerone 138  
03100 Frosinone (LT) - ITALY

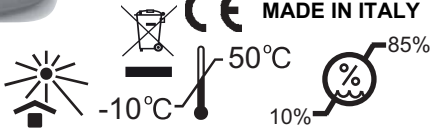

IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-06\_Sc\_ML1  
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A

**PL** PODWÓJNY PRZEŁĄCZNIK NOŻNY WODOODPORNY (TOUCH / TOUCH HP 300-400)

Produkt ten jest dostarczany do sterowania nożnymi kompatybilnych jednostek elektronicznych.

Sprawdź stan produktu przed użyciem (rys. Wyrzuć uszkodzony produkt).

Ten produkt jest kompatybilny z różnymi wersjami urządzeń, z którymi należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.

Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podłączenie

- Włóż wtyczkę sterownika nożnego do właściwego gniazda w jednostce elektronicznej, zwracając uwagę na kierunek wkładania (Rys. A 1-2).
- Aby zablokować wtyczkę należy dokręcić nakrętkę (Rys. A 3).

Włączyć urządzenie i wykonać kilka prób naciskając na sterownik nożny (Rys. A 4).



**PL** NACIŚNIĘCIE = AKTYWACJA / ZWOLNIENIE = BRAK AKTYWACJI  
ŻÓŁTY = CIĘCIE / NIEBIESKI = KOAGULACJA