


INSTRUKCJA UŻYWANIA MINI ROWERKA

1. Ostrożnie wyjąć korpus mini rowerka z pudełka. Patrz obrazek 1.
2. Ustawić korpus mini rowerka na płaskim podłożu i włożyć śrubę pokrętła A, jak pokazano na obrazku. Patrz obrazek 2.
3. Obrócić śrubą pokrętła A tak, aby uzyskać odpowiedni opór na osi B (w lewo, aby zwiększyć nacisk, w prawo, aby zmniejszyć nacisk). Nacisnąć na przycisk licznika C i obrócić oś B, aby natychmiast włączyć działanie. Patrz obrazek 3 (patrz instrukcje licznika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji).
4. Po użyciu, pociągnąć za sworzeń 0, do wewnątrz, i złożyć jak pokazano na obrazku 5.
5. Uwaga:
 - (1) Przed użyciem sprawdzić i upewnić się, że rowerek jest ustawiony stabilnie i stosownie wyrównany;
 - (2) Nie zapomnieć o tym, że na początku używania opór musi być minimalny, następnie można go zwiększyć do pożądanej wielkości;
 - (3) Przewidziani użytkownicy: dorośli, dzieci, osoby starsze;

OSTRZEŻENIE: Nie stawać podczas używania mini rowerka, aby uniknąć uszkodzenia maszyny.

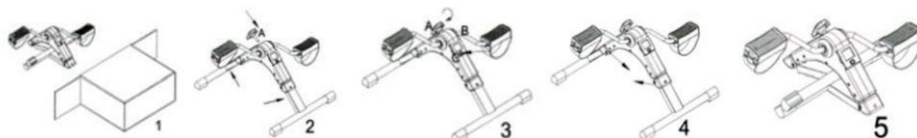

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TRENINGOWEGO

SPECYFIKACJE:

TIME -----00: 00-99:59MIN
 COUNT-----0-9999
 REPS/MIN-----0-9999
 CALORIE -----0-9999KAL

FUNKCJE PRZYCSKÓW:

TRYB: Ten przycisk umożliwia wybranie i zablokowanie na pożądanej funkcji. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 4 sekundy, aby zresetować wartości funkcji.


PROCEDURY OPERACYJNE:

AUTO ON/OFF: System włącza się po naciśnięciu na dowolny przycisk lub w przypadku gdy odbierze polecenie od czujnika prędkości. Monitor wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 4 minuty nie odbierze żadnego docierającego sygnału.

FUNKCJE:

TIME Po naciśnięciu na przycisk MODE, aż znak ">" wskaże TIME. Kiedy czujnik prędkości odbierze jakikolwiek sygnał, rozpocznie liczenie i automatycznie zakumuluje czas treningu w chwili rozpoczęcia ćwiczeń. **COUNT** Kiedy znak ">" wskaże COUNT, komputer wyświetli kroki. Kiedy czujnik prędkości odbierze jakikolwiek sygnał, rozpocznie liczenie i automatycznie zakumuluje obliczenia treningowe w chwili rozpoczęcia ćwiczeń. **REPS/MIN** Po naciśnięciu na przycisk MODE aż znak "<" wskaże REPS/MIN. Kiedy czujnik prędkości odbierze jakikolwiek sygnał, rozpocznie liczenie i automatycznie zakumuluje obliczenia treningowe w chwili rozpoczęcia ćwiczeń. **CALORIE** Po naciśnięciu na przycisk MODE aż znak ">" wskaże CAL. Kiedy czujnik prędkości odbierze jakikolwiek sygnał, rozpocznie liczenie i automatycznie zakumuluje kalorie spalone podczas treningu w chwili rozpoczęcia ćwiczeń. **SCAN** Kiedy znak ">" wskaże SCAN, komputer automatycznie wyświetli następujące funkcje, w podanej kolejności: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

INFORMACJA 1.Spec. baterii:1,5V, LR44 (1szt) - 2. Jeżeli monitor nie wyświetla poprawnie, ponownie zainstalować baterie. - 3. Procedura instalacji baterii:

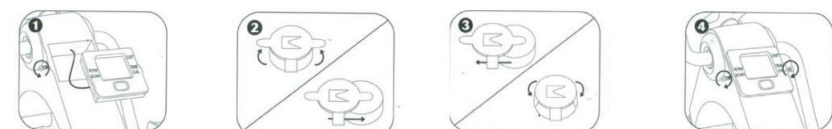

Odkręć i wyjmij śruby po obu stronach modułu ekranu, a następnie ostrożnie wyjmij moduł ekranu z gniazda.

Z tyłu jednostki ekranowej podnieś zaczepy baterii i wsuń baterię

Włóż nową baterię 1,5 V AG13, biegunem dodatnim skierowanym w dół i zamknij zatrzask.

Umieść ponownie jednostkę ekranującą w gnieździe i zabezpiecz śrubą

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151