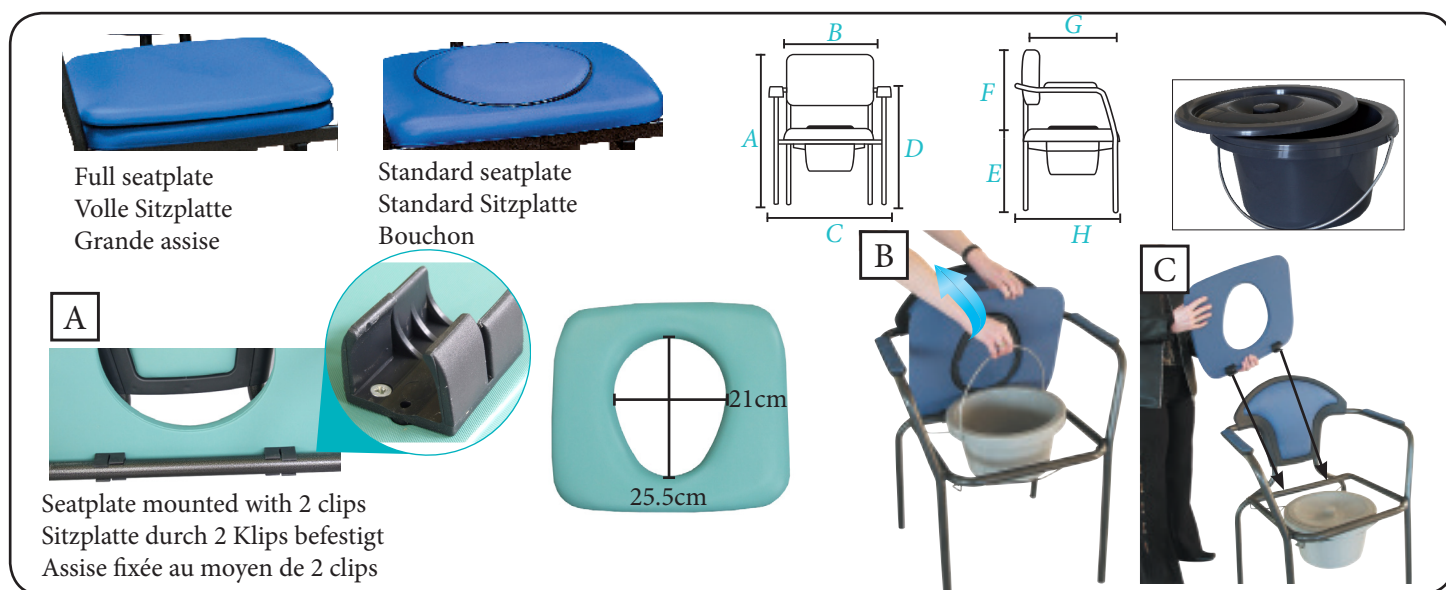




| Marks                                                | Designations                            | A        | B       | C       | D        | E        | F       | G       | H     | Weight  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3005**                                               | Open Standard seatplate                 | 86 cm    | 51.5 cm | 60.5 cm | 72 cm    | 52 cm    | 38 cm   | 39 cm   | 58 cm | 6.6 kg  | 130 kg                                                                               |
| 3003**                                               | Open Full seatplate                     |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3015**                                               | Open Adjustable with standard seatplate | 86/97 cm | 51.5 cm | 60.5 cm | 72/83 cm | 52/63 cm | 38 cm   | 39 cm   | 58 cm | 6.8 kg  | 130 kg                                                                               |
| 3014**                                               | Open Adjustable with full seatplate     |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3300**                                               | Club with standard seatplate            | 91 cm    | 42 cm   | 54 cm   | 67 cm    | 45 cm    | 50 cm   | 44 cm   | 53 cm | 8 kg    | 130 kg                                                                               |
| 3000**                                               | Club with full seatplate                |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3400**                                               | Confort with standard seatplate         | 91 cm    | 42 cm   | 54 cm   | 67 cm    | 45 cm    | 50 cm   | 44 cm   | 53 cm | 9 kg    | 130 kg                                                                               |
| 3100**                                               | Confort with full seatplate             |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3030**                                               | Even with standard seatplate            | 87.5 cm  | 51.5 cm | 64.5 cm | 75 cm    | 51 cm    | 38.5 cm | 40 cm   | 42 cm | 7.5 kg  | 130 kg                                                                               |
| 3031**                                               | Even with full seatplate                |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3200**                                               | New club with standard seatplate        | 84 cm    | 53 cm   | 61 cm   | 73 cm    | 52 cm    | 35 cm   | 40 cm   | 49 cm | 7 kg    | 130 kg                                                                               |
| 3201**                                               | New club with full seatplate            |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |
| 3001**                                               | Club XXL with standard seatplate        | 92 cm    | 65 cm   | 71 cm   | 67 cm    | 46.5 cm  | 46 cm   | 44 cm   | 53 cm | 10 kg   | 160 kg                                                                               |
| 3101**                                               | Confort XXL with standard seatplate     |          |         |         |          |          |         |         |       | 10.5 kg |                                                                                      |
| 3062**                                               | Club XXL with full seatplate            | 92 cm    | 55 cm   | 71 cm   | 67 cm    | 46.5 cm  | 46 cm   | 44 cm   | 53 cm | 10 kg   | 160 kg                                                                               |
| 3162**                                               | Confort XXL with full seatplate         |          |         |         |          |          |         |         |       | 10.5 kg |                                                                                      |
| 3046**                                               | Best Up                                 | 94.5 cm  | 44 cm   | 47 cm   | 54 cm    | 48.5 cm  | 50 cm   | 39.5 cm | 45 cm | 9.4kg   | 130kg                                                                                |
| 3646**                                               | Best Up XXL                             | 88 cm    | 75 cm   | 87 cm   | 75 cm    | 56 cm    | 59 cm   | 44 cm   | 59 cm | 9.5kg   | 160 kg                                                                               |
| Dimension of the hole: Width = 21 cm Depth = 25.5 cm |                                         |          |         |         |          |          |         |         |       |         |                                                                                      |

### 1. Instrukcja bezpieczeństwa

- ♥ Zawsze konsultuj się z twoim lekarzem lub dostawcą aby określić właściwe ustawienie i stosowanie przyrządu.
- ♥ Nie magazynować na zewnątrz i nie wystawiać na długotrwałe działanie słońca (Uwaga: nie pozostawiać produktu w samochodzie w przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz!!!).
- ♥ Nie używać urządzenia w ekstremalnie wysokich temperaturach (powyżej 38°C lub poniżej 0°C)
- ♥ Przed użyciem upewnij się, że masz właściwie umieszczone siedzisko na krześle.
- ♥ Sprawdź dokładnie wszystkie części tego produktu (śruby, rurki, podkładki)
- ♥ Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby są dokręcone
- ♥ Korzystaj z produktu tylko we właściwy sposób. Nie stawaj na krześle.
- ♥ ZAWSZE przestrzegaj limitu wagi wskazanego na opisie produktu.
- ♥ Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w tym urządzeniu. Stosuj tylko oryginalne części zamienne i pozwól to zrobić serwisowi technicznemu.
- ♥ Po rozłożeniu lub złożeniu krzesła, upewnij się przed zastosowaniem, że jest bezpiecznie rozłożone w pozycji „OTWARTE” oraz wypoziomowane to podłoża. Niektóre krzesła są już zmontowane.
- ♥ NIE ZAWIESZAJ niczego na krześle.
- ♥ ZAWSZE przetestuj aby upewnić się, że krzesło i załączniki są właściwie

i bezpiecznie zmontowane w miejscu zastosowania.

- ♥ W przypadku dłuższego nie używania krzesła pracownik techniczny powinien je sprawdzić przed ponownym zastosowaniem.
- ♥ Nie korzystać za zewnątrz, krzesła powinno być użytkowane w domu.
- ♥ Nie instaluj i nie usuwaj wiaderka jeżeli pacjent siedzi na krześle! Wysokie ryzyko urazu.
- ♥ Zachować ostrożność podczas usuwania poręczy aby nie uszkodzić palców.
- ♥ Sprawdź krzesło przed zastosowaniem, w przypadku wątpliwości zapytaj twojego lekarza lub dostawcy.
- ♥ Korzystaj z krzesła tylko na płaskim i stabilnej podłożu.
- ♥ Nie wolno siadać na poręczach.
- ♥ Nie wychylać się aby zapobiec utracie równowagi.

## 2. Indikacja-Kontraindikacja

Toaletne stolice mogą sę korzystać kod kuće ili u domovima za njegu kako bi se pomoglo osobi koja ima poteškoća doći do kupaonice donoseći WC u spavaću sobu. Standardne, sklopive ili na kotačima, one će se koristiti samo u zatvorenem prostoru.

### Indikacja

Koristi se u kući kad je pacjent previše slab da bi došao do kupaonice.

### Kontraindikacja

Nemojte koristiti stolicu za toalet u slučaju:

- Kognitivni poremećaj
- Gubitak ravnoteže
- Utvrđivanje oštećenja

## 3. Montaż

Tylko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać. Zapytaj obsługę techniczną jak użytkować produkt i upewnij się, że zrozumiałeś ich instrukcje.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie wahaj się spytać ponownie.

Są dwa sposoby wkładania / wyjmowania wiaderka:

1 – z lewej lub prawej strony siedziska należy wsunąć w metalowy wspornik (Dostępne tylko w wersji XXL).

2 – podnieś siedzisko i wyjmij wiaderko od góry.

Zamknij wiaderko pokrywą przed jego przeniesieniem.

Siedzisko może być łatwo usunięte do czyszczenia lub wymiany ponieważ jest połączone tylko dwoma klipsami.

Po założeniu pokryw na otwór, krzesło toaletowe może być użytkowane jako zwykłe krzesło.

## 3. Czyszczenie

Produkt powinien być czyszczony regularnie używając łagodnych środków czyszczących oraz miękkiej szmatki.

## 4. Materiały

Produkt wykonany jest ze stalowych rurek pokrytych epoksydową farbą oraz PVC. Krzesło dostarczane jest wraz z wiaderkiem. Niektóre modele wyposażone są w przesuwane poręcze.

## 5. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

## 6. Specyfikacja techniczna

Produkt jest biokompatybilny. Test: EN-ISO 111 99-1