



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ОНЈЕКИРЈА - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1


Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Montaż kółek

Wyrównać sworzeń koła z otworem montażowym znajdującym się w dolnej części wózka i wprowadzić koło. Wprowadzić śrubę do otworu montażowego i dokręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

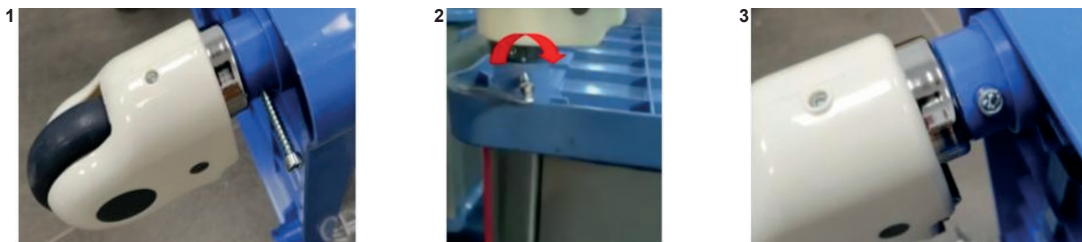

2. Sposób używania kółek

Blokowanie kółka: Po ustawieniu wózka anestezjologicznego w pożądanym miejscu, stopą nacisnąć na przycisk ON i zablokować kółko po usłyszeniu „kliknięcia”, jak pokazano na rysunku poniżej.

Odblokowanie kółka: Stopą nacisnąć na przycisk OFF i odblokować kółko po usłyszeniu „kliknięcia”.



3. Usuwanie usterek

Najczęstsze usterki	Możliwe przyczyny	Metody rozwiązywania
Utrudnione poruszanie całym wózkiem	1. Hamulec nie został zwolniony i kółko jest zablokowane 2. Kółko uległo uszkodzeniu	1. Zwolnić hamulec, jak wskazano w 2.1 2. Wymienić kółko, jak wskazano w 1.2

4. Konserwacja

- Aby zapewnić bezpieczne używanie wózka anestezjologicznego, należy wykonywać jego regularne kontrole pod kątem bezpieczeństwa. Zaleca się sprawdzenie, co sześć miesięcy, czy połączenia nie uległy poluzowaniu i czy operacje mogą być wykonywane poprawnie.
- Po osiągnięciu końca życia wózka anestezjologicznego, części korpusu wózka wykonane z metalu i tworzyw sztucznych mogą być poddane recyklingowi.
- Często oczyszczać i osuszać wózek, aby utrzymywać go w stanie stałej czystości. Do czyszczenia nie używać przyrządów o ostrych krawędziach lub noży, aby uniknąć zarysowania panelu.
- W przypadku przypadkowego zabrudzenia wózka, należy go oczyścić. Do czyszczenia wózka anestezjologicznego nie używać preparatów alkalicznych lub korozyjnych substancji chemicznych, które mogą wywołać rdzewienie powierzchni ze stali nierdzewnej.
- Regularnie sprawdzać kółka i unikać uderzenia o nie lub ich przeciążenia, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zakaz wymuszania hamowania kółek, aby uniknąć uszkodzenia systemu hamowania.
- Zużycie gumowej powierzchni koła może być stwierdzone w drodze kontroli wzrokowej. W przypadku owinięcia się włókien i innych materiałów wokół koła, usunąć śruby i nakrętki koła, oczyścić z zanieczyszczeń i sprawdzić, czy łożysko koła nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli części nie uległy uszkodzeniu, ponownie je zamontować i kontynuować używanie.
- W zależności od okresu eksploatacji, zużycia i zmęczenia materiałów, koła można wymienić. Upewnić się, że sworznie i nakrętki osi zostały umiejscowione i zamocowane poprawnie. W miarę możliwości, użyć podkładek blokujących lub nakrętek blokujących, aby pomóc sobie w wykonaniu czynności.
- W przypadku kółek wyposażonych w hamulce, należy regularnie sprawdzać, czy hamulce funkcjonują poprawnie. Raz dziennie lub przed każdym użyciem sprawdzić hamulce. Jeżeli wózek anestezjologiczny jest wyposażony w kilka kółek z hamulcem, za każdym razem można zablokować wyłącznie po jednym kółku, co pozwoli na dokonanie kontroli. Ponadto, należy sprawdzać, każdorazowo na pojedynczym kółku, czy hamulce funkcjonują skutecznie. Jeżeli hamulec nie funkcjonuje poprawnie, z powodu zużycia lub uszkodzenia kółek, należy natychmiast wymienić kółka i ponownie przetestować system hamowania.
- Jeżeli mechanizm systemu hamowania kółka ulegnie uszkodzeniu i kółko wymaga naprawy lub wymiany, skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym lub z autoryzowanym sprzedawcą. Przy każdej wymianie koła należy sprawdzić, czy hamulce kółek funkcjonują poprawnie.

5. Pakowanie, transport i przechowywanie

- Wózek jest pakowany zgodnie z postanowieniami umowy lub norm mających zastosowanie dla produktu.
- Podczas transportu wózka unikać pośpiesznych czynności i gwałtownych drgań. Zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego i deszczu.
- Wózek musi być przechowywany w następujących warunkach:
 - Temperatura środowiska: +5°C ~ +40°C.
 - Wilgotność względna: ≤ 85%.
 - Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Serwis posprzedażowy

- Należy poprawnie przechować faktury i dokumentację załączoną do produktu, gdyż będą one wymagane w przypadku konieczności skorzystania z warunków gwarancyjnych lub wykonania konserwacji na produkcie.
 - W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu podczas używania, natychmiast skontaktować się z naszą firmą, aby uzyskać szybką i precyzyjną pomoc techniczną oraz wykonać konserwację.
 - W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynikającego z nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego użycia, produkt jest objęty gwarancją na jeden rok, licząc od dnia sprzedaży, oraz dożywotnią obsługą serwisową, pod warunkiem okazania wymaganej dokumentacji lub faktury.
 - W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania spowodowanego problemami z jakością, podczas okresu gwarancyjnego liczonego od dnia zakupu, produkt zostanie darmowo naprawiony przez naszą firmę.
- Serwisowanie jest zapewniane przez producenta przez cały okres życia produktu: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD