


VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO DE CATEGORIA III

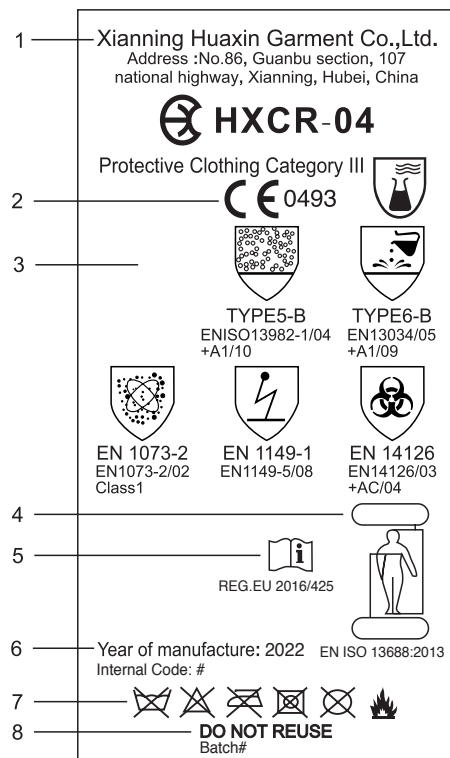

INSTRUÇÕES DE USO (CÓDIGO DO PRODUTO: HXCR-04)

Marcação:

Cada macacão é identificado com uma etiqueta interna, que indica o tipo de proteção oferecida e outras informações.

1. Nome do fabricante.
2. Marcação CE – O macacão está em conformidade com os requisitos para equipamentos de proteção individual de categoria III de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425. A testagem do protótipo e o subsequente registro CE foi feito na Shirley® Certification Services (Número do Organismo Notificado 2895).
3. “Tipos” de proteção para o corpo inteiro alcançados pela Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. definidos pelas normas europeias para o Vestuário de Proteção Química: Tipo 5:EN 13982-1:2004, Tipo 6:EN 13034:2005. Os macacões foram testados contra perigos biológicos (EN14126:2003) e ra-

dioativos (EN1073-2:2002) e são antiestáticos (EN1149-5:2018) e, para serem eficazes, devem ser utilizados com partículas de processamento e acessórios compatíveis.

4. Esta vestimenta tem uso limitado de roupas de proteção fabricadas para atender aos requisitos gerais de roupas de proteção da norma EN ISO 13688: 2013.

Tamanho das peças de vestuário.

Tamanho	Peito (cm)	Altura (cm)
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194

5. O usuário deve ler estas instruções de uso.
6. Ano de fabrico.
7. Símbolos de cuidados internacionais: Não lavar, passar a ferro, lavar em máquina, lavar a seco ou alvejar. Manter afastado de chamas e do calor.
8. Adequado apenas para uso único - não reutilizar.

TABELA DE DESEMPENHO

Propriedades físicas do tecido		Classe
Resistência à abrasão	EN 530 Meth.2	Classe 1
Resistência a rachaduras	ISO 7854 B	
Resistência ao desgaste trapezoidal	MD	Classe 4
	XD	
Resistência a puncturas	EN863	Classe 2
Resistência à tração	MD	Classe 1
	XD	Classe 1
Proteção contra a radiação	EN1073-2:2002	Classe 1
Resistência à infecção (partículas sólidas)	ISO 22612	Classe 2
Resistência à ignição	EN 13274-4	Aprovado
Método de prueba de las propiedades químicas del tejido	Penetração	Repelência
Resistência a produtos químicos EN ISO 6530	Classe 3	Classe 3
Ácido sulfúrico 30%	Classe 3	Classe 3
Hidróxido de sódio 10%	Classe 3	Classe 3
O-xileno	Classe 3	Classe 3
Butano-1-ol		
Desempenho no teste de traje inteiro		
Tipo 5 Vazamento interno	IL 82/90≤30%&TILS 8/10≤15%	
Método conforme definido por EN ISO 13982-1:2004	Aprovado	
Tipo 6 Borrifamento leve		
Método conforme definido por EN 13034:2005	Aprovado	
EN 14126:2003		
Barreira a agentes infecciosos EN 1073-2:2002	Aprovado	
Barreira a partículas radioativas EN 1149-5:2018 Antiestático	Aprovado	
Proteção contra agentes infecciosos EN14126		

ISO 16603	Classe 6
ISO 16604	Classe 6
EN ISO 22610	Classe 6
ISO 22611	Classe 3
ISO 22612	Classe 3

Áreas de uso:

Macacões projetados para a proteção contra substâncias perigosas e contaminações tanto dos produtos quanto do pessoal. São tipicamente utilizados para a proteção contra partículas secas e borrifamentos e espirros de baixo risco. A determinação da adequação do macacão é de responsabilidade final do usuário. O traje pode estar contaminado no momento da remoção, e deve ser removido de modo a evitar a contaminação do usuário.

Limitações:

Ao utilizar o macacão com outro EPI e para estar em total conformidade com os requisitos EN para vestuários de Tipo 5/6, todas as aberturas, como as dos pulsos, tornozelos, pescoço etc., devem estar firmemente seladas com fita adesiva. A adequação para o tipo de proteção necessária e as combinações corretas de acessórios e equipamentos complementares do macacão são de julgamento exclusivo do usuário. Se houver contaminação, desgaste ou danos, o macacão deve ser removido e adequadamente descartado o mais rápido possível. O usuário deve sempre assegurar-se de verificar a integridade do macacão antes de vesti-lo. Deve ser considerada a possibilidade de estresse por calor em condições de temperatura muito alta. O estresse por calor pode ser reduzido ou eliminado pelo uso adequado de roupas de baixo e equipamentos de ventilação. O calor e o frio extremos podem afetar negativamente o desempenho deste vestuário. O macacão não deve ser utilizado quando houver risco devido a determinados produtos químicos perigosos que não foram testados. Embora possa ser oferecida uma proteção limitada contra vários produtos químicos, consulte o desempenho físico do macacão com relação aos testes de Tipo 5 e 6. O usuário também deve usar proteção respiratória, botas e luvas compatíveis resistentes a produtos químicos. As luvas devem cobrir os punhos elásticos. O usuário deve selecionar o tamanho apropriado para permitir a liberdade de movimento para o risco previsto. Se necessário, entre em contato com o Fabricante/Distribuidor para obter aconselhamento.

Armazenagem e descarte:

O macacão pode ser armazenado de acordo com as práticas normais de armazenamento, mas recomenda-se o armazenamento em um local seco afastado de fontes de luz, calor e luz solar direta. As restrições para o descarte dependem exclusivamente da contaminação durante o uso. O fabricante não se responsabiliza por qualquer uso ou descarte impróprios do vestuário.

Vencimento:

Recomenda-se que o produto seja usado dentro de um período de 3 anos a partir da data de fabrico/produção indicada na embalagem.

Aprovações:

Aprovações CE por:
(Organismo notificado: 2895)
Shirley® Port Tunnel Business Park,
Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

REF	Código produto
LOT	Número de lote
	Fabricante
	Consulte as instruções de uso
	Data de fabrico
	Data de validade
CE	Equipamentos de proteção individual de categoria III de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425

REF

HXCR-04(S) (GIMA 21070)	MACACÃO ISOLANTE BÁSICO S - descartável
HXCR-04(M) (GIMA 21071)	MACACÃO ISOLANTE BÁSICO M - descartável
HXCR-04(L) (GIMA 21072)	MACACÃO ISOLANTE BÁSICO L - descartável
HXCR-04(XL) (GIMA 21073)	MACACÃO ISOLANTE BÁSICO XL - descartável
HXCR-04(XXL) (GIMA 21074)	MACACÃO ISOLANTE BÁSICO XXL - descartável

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section, 107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com