

# BIOPSY PUNCH



(PT) Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

(PT) Estéril. Apenas para UTILIZAÇÃO ÚNICA.


Se forem necessárias várias biópsias ou amostras do mesmo doente, deve-se utilizar um novo dispositivo de cada vez.

(PT) Diâmetros disponíveis:  
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm

- Não voltar a esterilizar ou reutilizar devido ao risco de infeções.
- Não utilizar se a embalagem blister esterilizada estiver comprometida ou danificada.

1.


(PT) A biópsia por punch é um método normalmente utilizado para realização de biópsias cutâneas.

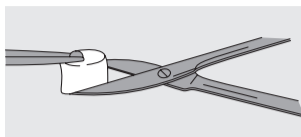


c.

(PT) Agarre suavemente a peça com a ajuda de uma pinça anatómica, evitando a sua destruição. Se necessário, use uma tesoura ou uma lâmina de bisturi para separar completamente a peça.

2.

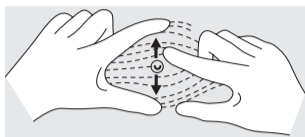


a. (PT) Estirar a pele para evitar as pregas em redor da lesão.

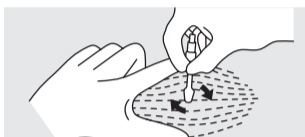

b.

(PT) Segure o punch entre o polegar e o dedo indicador. Coloque-o na superfície da pele, exercendo força moderada, pressione para baixo num movimento de rotação no sentido dos ponteiros do relógio.

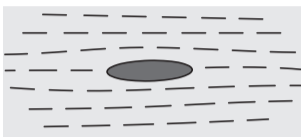

d.

(PT) Para feridas cirúrgicas  $\leq 4$  mm pressione suavemente ou encerre com a ajuda de um penso hidrocoloide. Para feridas cirúrgicas  $\geq 4$  mm encerre com sutura, clipe ou tiras adesivas ("steristrips") clinicamente indicadas para o efeito.

3.



(PT) Esterilizado com óxido de etileno por:  
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)  
Clocherane, Youghal Road,  
Dungarvan,  
Co. Waterford,  
Ireland



4.

(PT) Ver embalagem ou cartonagem para:



5.

(PT) GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos Lda.,  
Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º3,  
Arquiparque - Miraflores, 1495-131 Algés, PORTUGAL.