



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - MEDIA
DIGITAL VET SCALE - MEDIUM
BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE
BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA
ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA
VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT
ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - СРЕДЕН
VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN
ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS
SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA
SCALA VETERINARĂ – MEDIE
VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER

REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/
Distribuovány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

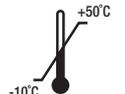



Antes de começar a usar o produto, leia atentamente o manual do usuário. Guarde o manual em local seguro para referência futura. Certifique-se de que terceiros que utilizam o produto estejam familiarizados com estas instruções.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de respeitar a polaridade indicada na bateria ao inserir ou substituir a bateria.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, remova a bateria.
- Não deixe a unidade sem supervisão durante o uso.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham a experiência e o conhecimento necessários, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho. por uma pessoa responsável. para sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Use o produto apenas para o uso pretendido especificado no manual do usuário.
- Utilize a unidade somente depois de colocá-la sobre uma superfície horizontal estável.
- Antes de limpar, montar ou desmontar a tampa, desligue o aparelho e retire a bateria!
- Não use abrasivos ou produtos químicos agressivos para limpar a unidade.
- Não use a unidade se ela não estiver funcionando corretamente ou se tiver caído, danificada ou exposta a líquidos. Leve a unidade a um centro de serviço autorizado para teste e reparo.
- A unidade destina-se apenas ao uso doméstico. Não se destina ao uso comercial.
- Mantenha a unidade longe de fontes de calor, como radiadores, fornos, etc. e não a exponha à luz solar direta ou à umidade.
- Não toque na unidade com as mãos úmidas ou molhadas.
- O produto é um dispositivo de medição frágil. Tenha cuidado para não esmagá-lo ou deixá-lo cair.
- Não repare o aparelho sozinho. Contate um centro de serviço autorizado.

SE VOCÊ NÃO OBSERVAR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE, SUA REIVINDICAÇÃO DE GARANTIA PODE SER REJEITADA!

ESPECIFICAÇÕES

- Sistema de medição de precisão
- Zerar automaticamente
- Desligamento automático
- Indicador de bateria fraca
- Indicador de sobrecarga

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão: 1 bateria de lítio CR2032 de 3V (incluída)

Peso máximo de medição: 3-100kg

Incrementos de peso: 100 g

Tamanho da tela: LCD diâmetro = 8,0 cm, 3,15 polegadas

Plataforma: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm

Unidades de medida: kg, lb, st

Temperatura de operação/armazenamento: 10-40°C/-10-50°C

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de usar a balança pela primeira vez, remova a aba isolante da bateria localizada na parte traseira da balança.

Coloque a balança sobre uma superfície plana, resistente e perfeitamente nivelada. Se a balança for colocada sobre uma superfície macia (por exemplo, carpete), o valor da medição pode não ser preciso.

Para iniciar a balança, toque no centro da plataforma com um pé.

Ao ligá-lo pela primeira vez, "8" e depois "0.0" aparecem no display.

Aguarde até que o valor "0,0" seja exibido!

Coloque o animal de estimação na balança.

O peso do animal aparecerá no display e piscará duas vezes. O peso medido permanece visível durante aproximadamente 10 segundos.

Se a balança não for usada depois de ligada, ela desligará automaticamente após 60 segundos.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria deve ser substituída quando o display mostrar:



Abra o compartimento da bateria na parte traseira da balança e remova cuidadosamente a bateria retraindo a aba de fixação de plástico preto. A aba de fixação está localizada na parte superior da bateria. Não quebre a aba de metal. Substitua a bateria usada por uma bateria nova. A bateria descarregada deve ser descartada de maneira adequada.

AS BATERIAS NÃO SÃO COBERTAS PELA GARANTIA!

AVISO DE SOBRECARGA

Se a balança estiver sobrecarregada, será exibido o seguinte:



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe a superfície da unidade com um pano úmido. Não utilize produtos de limpeza ou objetos duros, pois podem danificar a superfície do aparelho!

Não limpe o aparelho com água corrente, não enxágue nem mergulhe em água!

REPARO E MANUTENÇÃO

Manutenção ou reparos mais complexos que exijam acesso aos componentes internos do produto devem ser realizados por um centro de serviço qualificado.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

- Os materiais de embalagem e os aparelhos obsoletos devem ser reciclados.
- A caixa utilizada para transporte pode ser encaminhada para coleta seletiva de resíduos.
- Os sacos de polietileno devem ser entregues num centro de eliminação.



Eliminação: O produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Os usuários deverão descartar os equipamentos a serem sucatados, entregando-os ao ponto de coleta indicado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia padrão Gima B2B de 12 meses.