

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Parabéns

Ao adquirir a esteira de medição seca 210 você passou a dispor de um aparelho de medição do comprimento de lactentes exacto e, ao mesmo tempo, robusto.

A esteira de medição seca 210 foi especialmente concebida para consultórios de pediatria, hospitais pediátricos ou para as visitas das parteiras ou dos médicos pediatras ao domicílio.

A esteira de medição pode-se enrolar, ocupando, portanto, pouco espaço. Para além disso, o seu encosto para a cabeça dispõe de furos que permitem pendurar a esteira na parede.

## Segurança

Antes de utilizar esta nova esteira de medição, dedique um pouco do seu tempo à leitura das seguintes indicações de segurança:

Respeite as indicações constantes das Instruções de Uso.


- Nunca deixe o lactente sozinho na esteira, sem qualquer vigilância.
- Efectue a medição, apoiando o aparelho sobre uma base suficientemente estável para que não haja o perigo de o lactente cair.
- É fundamental que a esteira de medição seja limpa e desinfectada regularmente, a fim de impedir a transmissão de doenças contagiosas.
- Para que a medição seja o mais exacta possível, o ideal é dispor da ajuda de uma outra pessoa.

## Utilização

### Operação de medição:

1. Coloque o lactente na esteira de medição, de maneira a que a sua cabeça toque no respectivo encosto (1).
2. Com a mão direita, faça deslizar o encosto dos pés (2) em direcção aos pés do lactente, segurando-o com a outra mão.
3. Estique-lhe as pernas, pressionando ao de leve nos joelhos da criança, com a mão esquerda, em direcção à esteira.
4. Com a mão direita, apoie o encosto dos pés (2) perpendicularmente à sola dos pés da criança.
5. Leia o comprimento do corpo, olhando para a marca existente na parte inferior da esteira (3).

Se seguir escrupulosamente estes cinco passos, estará assegurada uma precisão superior em cerca de +/- 5 mm.

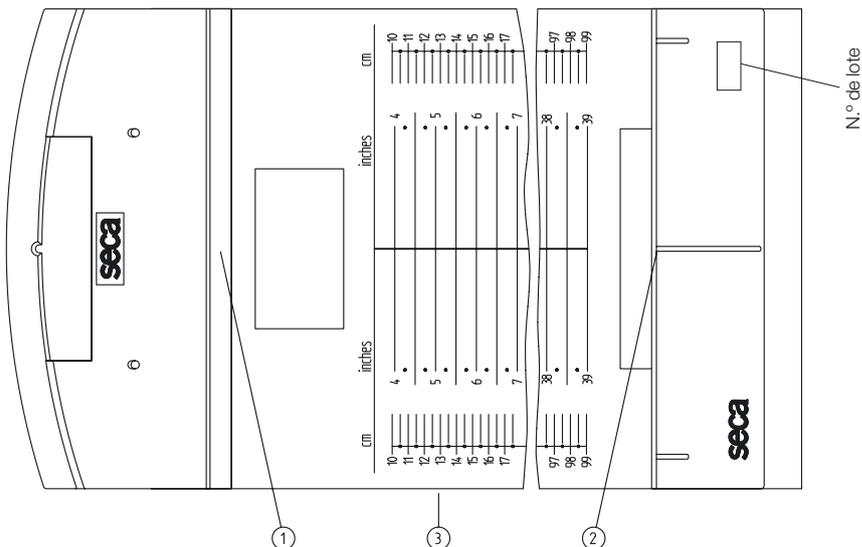

## Limpeza

Limpe a esteira de medição sempre que for preciso, usando um produto de limpeza doméstico ou um qualquer desinfectante existente à venda. Observe as indicações dos fabricantes desses produtos.

## Dados técnicos

Campo de medição:	100 - 990 mm / 4 - 39 "
Divisão:	5 mm / 1/4 "
Precisão:	superior a $\pm 5$ mm
Medidas (L x A x P)	300 mm x 140 mm x 1340 mm
Peso próprio:	aprox. 500 g
Gama de temperaturas:	+10°C a +40°C
Artigo médico segundo a Directiva 93/42/CEE:	classe I com função de medição

## Eliminação

Quando a esteira de medição deixar de ser utilizada em definitivo, existe a hipótese de a reciclar, em vez de a misturar com o lixo normal. Contacte, para o efeito, os serviços competentes da sua câmara municipal.

## Garantia

A garantia para falhas decorrentes de defeito do material ou de fabrico é de dois anos, a partir da data do fornecimento. Excluem-se todas as partes móveis, como sejam pilhas, cabos, alimentadores, acumuladores, etc.. As falhas abrangidas pela garantia serão corrigidas gratuitamente mediante a apresentação do talão de compra. Não serão tidas em conta outras reclamações. Os custos de transporte de e para as instalações do cliente, caso se aplique, ficará a cargo do cliente. No caso de danos de transporte, a garantia só se aplica se tiver sido utilizada a embalagem original completa para acondicionar a mercadoria, de forma bem imobilizada e fixa, tal como se encontrava originalmente. Por este motivo, guarde todos os componentes da embalagem.

A garantia cessa se o aparelho tiver sido aberto por pessoas não expressamente autorizadas, pela seca, para o efeito.

Solicitamos aos nossos clientes de fora da Alemanha que, caso tenham direito à garantia, se dirijam directamente ao revendedor do país onde se encontram.

## Declaração de Conformidade


Aparelho mecânico de medição do comprimento

Modelo seca 210

N.º de lote: vide esteira de medição

A esteira de medição cumpre os requisitos prescritos pela Directiva do Conselho 93/42/CEE sobre artigos médicos.

seca gmbh & co. kg.

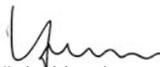  
Sönke Vogel  
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria