

PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

Montagem/desmontagem:

1. Para montar a Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos, introduza a extremidade da pinça na fonte de luz ao alinhar os pinos na extremidade da pinça com as ranhuras dentro da fonte de luz. Empurre e torça FIRMEMENTE para baixo no sentido dos ponteiros do relógio até a rotação parar. Esta ação irá bloquear a pinça no devido lugar e ativar a luz. NOTA: Este produto é um dispositivo acionado por mola; a montagem incorreta pode causar a ejeção da ponta da pinça.
2. Para fixar a lente de ampliação, engate a lente no tubo da fonte de luz de forma a que a parte superior da lente apresente um ângulo em direção à ponta da pinça.
3. Para desmontar, empurre a pinça e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para remover a pinça da fonte de luz. A luz apaga-se quando a pinça é removida.


Instruções para a remoção de corpos estranhos

1. Examine o ouvido ou nariz para determinar a localização do corpo estranho.
2. Monte a Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos de acordo com as instruções.
3. Introduza a ponta da Pinça com luz até alcançar o corpo estranho. Quando se encontrar no respetivo lugar, aperte o punho com mola para agarrar o objeto e puxe delicadamente retirando-o do orifício.
4. Repita o exame e determine a localização de qualquer porção residual do corpo estranho.
5. Repita o procedimento até remover o corpo estranho.
6. Remova e elimine a pinça de uma única utilização.

A ponta da Pinça com luz para a remoção de corpos estranhos destina-se a ser utilizada num único paciente.

A fonte de luz e a lente de ampliação destinam-se a ser utilizadas em vários procedimentos. Não elimine a fonte de luz ou a lente de ampliação. É fornecida uma fonte de luz e uma lente em cada embalagem do produto.

LIGHTED FORCEPS FOR FOREIGN BODY REMOVAL - USER INSTRUCTIONS
BELEUCHTETE PINZETTE ZUR FREMDKÖRPERENTFERNUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG
FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO
PINCE ÉCLAIRÉE POUR L'ÉLIMINATION DE CORPS ÉTRANGERS - MODE D'EMPLOI
PINZA CON LUCE PER LA RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI - ISTRUZIONI PER L'USO
PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

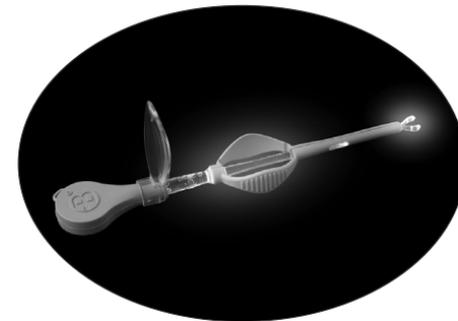

B BIONIX®

+1 419 727 8997

www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patent Pending



EC REP Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com