

INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DE CERUME

Posicione o paciente confortavelmente na mesa de exame. As crianças pequenas deverão ser colocadas no colo ou no ombro dos pais durante o procedimento.

Utilize um otoscópio para examinar o canal auditivo e a membrana do tímpano. Verifique se há cerume no canal auditivo.

Selecione uma cureta para os ouvidos com o tamanho adequado para o paciente:


White FlexLoop** para crianças e para adultos, fins gerais;
Blue InfantScoop** para bebês e para crianças;
Green MicroLoop® para retirar o cerume mais duro de crianças mais velhas e de adultos;
Yellow CeraSpoon** para remoção rápida de grandes quantidades de cerume;
Red AngleLoop** para remover o cerume existente em locais pouco acessíveis;
Purpule VersaLoop** para precisão suave e o
Orange ControLoop** para uma direção e controle preciso durante a operação de curetagem.

Endireite o canal auditivo, puxando gentilmente o ouvido para cima e afastado do paciente. Utilize a cureta com cuidado para soltar e retirar cerume do canal auditivo. Utilize um otoscópio para reexaminar frequentemente o canal auditivo durante este procedimento, porque o cerume pode mudar de posição ou deslocar-se durante a operação de curetagem.

Verifique se ainda existe algum cerume dentro do canal auditivo. Se for o caso, repita o procedimento de curetagem até ter sido removido cerume suficiente para permitir um exame adequado da membrana do tímpano.

ATENÇÃO: interrompa a operação de curetagem imediatamente se houver sangramento, irritação ou outro tipo de traumas no canal auditivo ou na membrana do tímpano.

INSTRUCTIONS FOR CERUMEN REMOVAL
INSTRUCCIONES PARA REMOVER CERUMEN DE LOS OÍDOS
CONSIGNES D'ELIMINATION DU CERUMEN
ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL CERUME
ANLEITUNG ZUR ENTFERNUNG VON OHRENSCHMALZ
INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DE CERUME

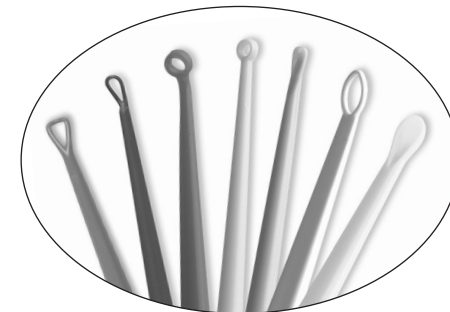

B BIONIX®

+1 419 727 8997

www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 11/30/2016 • RM95-0005 • *Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com