



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



en	English	pp. 1	sl	Slovenski	pp. 33
fr	Français	pp. 3	et	Eesti	pp. 35
de	Deutsch	pp. 5	lv	Latviesu	pp. 37
it	Italiano	pp. 7	lt	Lietuviskai	pp. 39
es	Español	pp. 9	ro	Romana	pp. 41
nl	Nederlands	pp. 11	hr	Hrvatski	pp. 43
sv	Svenska	pp. 13	bg	Български	pp. 45
da	Dansk	pp. 15			
no	Norsk	pp. 17			
fi	Suomi	pp. 19			
pt	Português	pp. 21			
el	Ελληνικά	pp. 23			
pl	Polski	pp. 25			
hu	Magyar	pp. 27			
cs	Čeština	pp. 29			
sk	Slovensky	pp. 31			

# Estetoscópio Digital CORE 3M™ Littmann®

## Guia de Início Rápido

Transfira a Eko App na Apple App Store® ou na Google Play Store®.

Ative a Tecnologia Sem Fios Bluetooth® no telefone ou tablet, inicie a app, e ative o estetoscópio CORE.


Eko

## Na caixa

- Ligação digital Eko CORE e Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Conjunto adicional de Olivas de Fixação Macia de Encaixe Justo 3M Littmann (pequenas)
- Anel antifrio
- Cabo de carga USB
- Guia de Início Rápido

## Olivas

Insira as olivas para a frente.

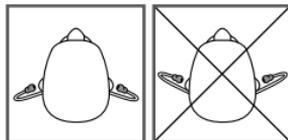

## Volume

Utilize os botões (+) e (-) para ajustar o volume. Existem 7 passos no volume.

## Ligar e desligar

Quando o Estetoscópio CORE está desligado, atua como um estetoscópio não amplificado.

Para ligar o Estetoscópio CORE, prima o interruptor de alimentação. A luz começa a piscar. Ouvirá agora o som amplificado e filtrado nas olivas.

## Funcionalidades de telemedicina e IA

A Eko disponibiliza telemedicina e IA que exigem uma subscrição do software (quando disponível vendido em separado).

Pode configurar uma subscrição online em [ekohealth.com](http://ekohealth.com)

## Cancelamento de ruído ativo

O Estetoscópio CORE inclui cancelamento de ruído ativo para remover ruído ambiente do ambiente circundante. O cancelamento de ruído ativo pode ser ativado ou desativado através da Eko App.



## Notificações

(●) (a piscar)

O estetoscópio CORE está ligado e à procura de dispositivo

● (amarelo)

O estetoscópio CORE está desligado e a carregar

(●●) (amarelo)

O estetoscópio CORE tem pouca bateria

○

O estetoscópio CORE está ligado e conectado

● (verde)


O estetoscópio CORE está totalmente carregado

(●●) (azul)

O estetoscópio CORE está a gravar

## Gravação

Quando ligado à Eko app, prima o botão (o) para iniciar a gravação.

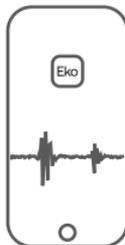

## **Carga**

Conecte o cabo micro USB ao estetoscópio CORE e utilize um carregador USB 5 V com certificação UL ou marcação CE. O estetoscópio CORE irá demorar cerca de 2 horas para carregar na totalidade. A luz passa para verde quando o dispositivo tiver a carga completa.

## **Manual do Utilizador**

Reveja o Manual do Utilizador antes de utilizar o Estetoscópio Littmann CORE. Para ver o manual aceda a: [ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Consulte [HCBRegulatory.3M.com](http://HCBRegulatory.3M.com) para obter informações adicionais acerca dos dispositivos 3M.

## **Assistência e Suporte**

Nos EUA, aceda a [littmann.com/service](http://littmann.com/service) ou ligue para 1-800-228-3957. Se não estiver no território dos EUA, aceda a [littmann.com](http://littmann.com) para obter o contacto do seu escritório da 3M local.

pt

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc.  
Google Play e o logotipo Google Play são marcas comerciais da Google LLC.  
Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG  
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

**3M Company**  
2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

EC REP **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

**Eko Devices, Inc.**  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

EC REP **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.  
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11  
34-8726-3344-0