




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

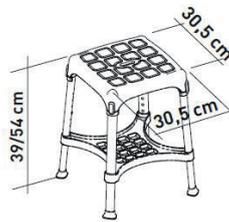

cessidades. As versões equipadas com disco rotativo garantem uma maior liberdade de movimento, sem ter de se levantar do banco. Graças também à sua flexibilidade, os bancos podem ser posicionados em pisos irregulares, típicos de muitas bases de duche. Os bancos estão disponíveis em três modelos diferentes. Os bancos podem ser facilmente deslocados graças ao seu peso leve. Os bancos podem ser completados com uma almofada macia que torna a sua utilização mais confortável. As almofadas macias e os discos rotativos são vendidos separadamente, como acessórios.

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES:

Os produtos da linha Bancos são um auxiliar válido para os idosos, para os utilizadores de cadeira de rodas, para as pessoas com mobilidade reduzida na zona lombar, nos joelhos e nas ancas, e para todos aqueles que têm dificuldade em manter uma posição ereta durante as fases de higiene pessoal diária no duche. O utilizador deve ter autonomia de equilíbrio durante os movimentos necessários para passar para a posição sentada e de pé, bem como ter uma capacidade adequada para permanecer sentado. Não é recomendável a utilização dos bancos no caso em que o utilizador tenha problemas de equilíbrio ou de percepção.

PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR: 170Kg

AVISOS E INDICAÇÕES DE SEGURANÇA:

- O peso máximo do utilizador, indicado nestas instruções de montagem, não deve ser excedido.
- Antes de cada utilização, o utilizador deve verificar se o banco está montado corretamente e em posição estável.
- O banco só pode ser utilizado em superfícies livres de obstáculos.
- Durante a montagem do produto é necessário seguir escrupulosamente o que está indicado no Manual de utilização.
- Pode aumentar o risco de ferimentos nos dedos durante as fases de montagem.
- Não se balanceie durante a utilização do banco; pode provocar escorregamento, tombamento ou cedência das pernas.
- Mantenha sempre o banco sobre as 4 pernas.
- Não modifique de forma alguma o banco ou qualquer um dos seus componentes.
- Não utilize o banco se estiver danificado ou alterado de alguma forma.
- Após a utilização, o banco deve ser retirado da base de duche para evitar quaisquer obstruções.
- Não utilize o banco para outros fins que não os previstos.
- O banco não deve ser guardado ao ar livre.
- Evite o contacto direto com feridas abertas ou pele danificada para prevenir possíveis infeções.

INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e higienização. A fim de garantir uma utilização segura e adequada ao cumprimento das normas de higiene, é necessário que o utilizador realize estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador deve certificar-se da integridade estrutural tanto do dispositivo como de todos os seus componentes e verificar a fixação dos parafusos. Para a limpeza e higienização é necessário seguir os seguintes procedimentos:

1. Calce as luvas
2. Antes de proceder a uma higienização precisa, remova qualquer sujidade evidente.
3. Utilize água ou detergentes não agressivos para o procedimento de limpeza.
4. Limpe com um pano seco e limpo.

Em alternativa, o produto pode ser higienizado numa máquina de lavar louça doméstica à temperatura máxima. A almofada macia deve ser lavada rigorosamente à mão.

CONDIÇÕES DE REUTILIZAÇÃO :

O produto é adequado para ser reutilizado por outros utilizadores. Antes de ser utilizado por outros utilizadores, o produto deve ser limpo e higienizado corretamente. Antes de ceder o produto a terceiros, o produto deve ser verificado por revendedores qualificados.

PROCEDIMENTO DE ELIMINAÇÃO CORRETO:

Não elimine o produto através do lixo doméstico normal. Dirija-se às autoridades locais para saber o procedimento de eliminação correto.

SINALIZAÇÃO DE INCIDENTES:

Se ocorrer um incidente grave relacionado com a utilização deste dispositivo, contacte o fabricante através do endereço info@imglobaldesign.com e a autoridade responsável no seu país.

PORTUGUÊS






FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:

Os produtos da linha Bancos permitem ao utilizador ter uma maior autonomia e independência na utilização do duche durante a higiene pessoal diária, reduzindo a fadiga muscular devido à posição ereta bem como os riscos de escorregamento e de acidentes. As versões equipadas com pés de borracha antiderrapagem garantem uma maior aderência ao piso, enquanto os modelos com pernas reguláveis em altura permitem aos utilizadores alterar facilmente a altura total do banco de acordo com as suas ne-

REF	Código produto	LOT	Número de lote
CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Fabricante
SN	Número de série		Data de fabrico
MD	Dispositivo médico		Consulte as instruções de uso

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

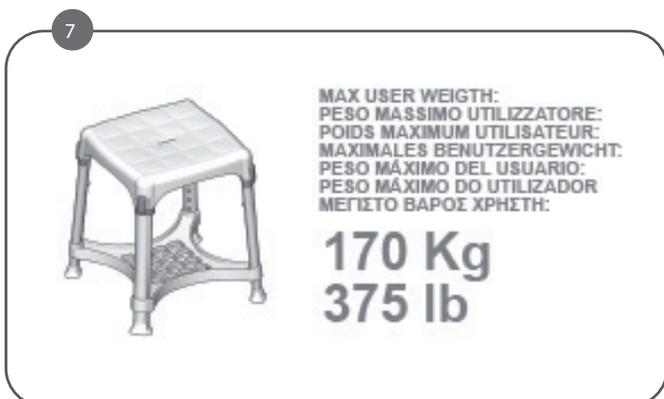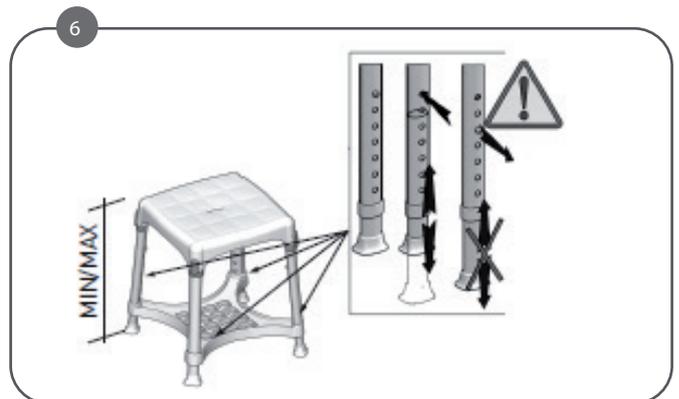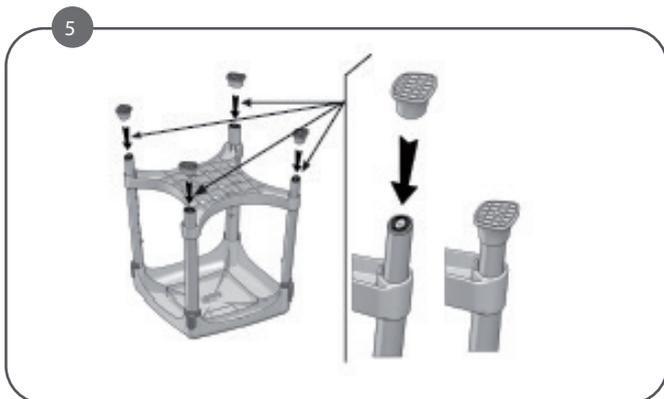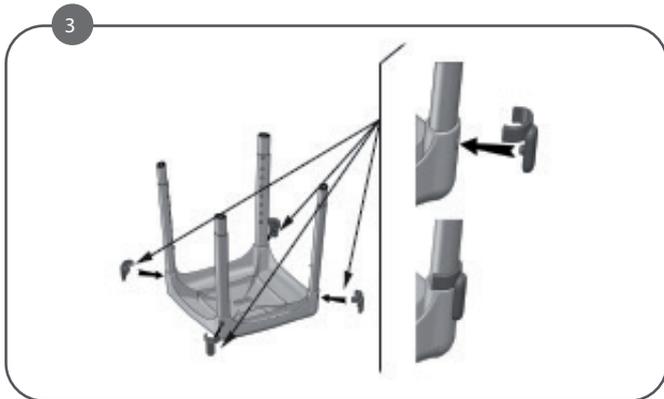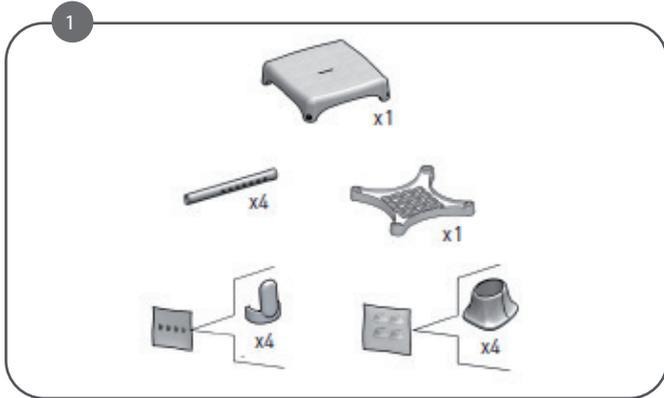

LM GLOBAL DESING Ltd.
 Suite 123, The Capel Building
 Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
 Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

