

**SEDIA COMODA E DOCCIA
COMMUNE AND SHOWER CHAIR
CHAISE D'AISANCE ET DE DOUCHE
SILLA WC Y DUCHA
CÓMODA E CADEIRA DE DUCHE
KOMMODE UND DUSCHSTUHL
KOMMOD OCH DUSCHSTOL
ΚΟΜΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΤΟΥΣ**

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.


Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10635081 (Gima 43193)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China

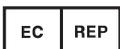

Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10678103

CADEIRA SANITÁRIA DE ELEVAÇÃO DE ALUMÍNIO

Peças do produto



1. Encosto
2. Apoio de braço
3. Assento em PU
4. Tubo da perna
5. Pé

Instruções de segurança

- Leia estas instruções de utilização com atenção.
- Todos os componentes devem ser verificados relativamente a danos e ajustados de forma segura antes da utilização.
- Aprovado exclusivamente para utilização no interior.
- Roupas ou partes do corpo podem ficar presas ao sentar, ao levantar, ao inserir o bacio, bem como ao levantar os apoios de braços e ao bloqueá-los no lugar.
- Se for necessário ultrapassar os limiares, faça-o devagar e com cuidado, caso contrário as rodas podem ser danificadas!
- Ao usar uma cadeira sanitária com rodas, utilize sempre os travões de estacionamento.
- Durante a transferência para dentro/fora da cadeira sanitária com rodas, os apoios para os pés devem ser virados para o lado de fora do caminho.
- Nunca utilize os apoios para os pés como apoio para se levantar - perigo de capotamento!
- Evite a utilização não autorizada, por exemplo, por crianças.
- Tome nota do peso máximo permitido por utilizador.
- Esta informação pode ser encontrada nos dados técnicos

deste manual de instruções, bem como na placa de identificação

Montagem

Passo 1

Fixe o encosto à armação, pressionando os botões de pressão e deslizando os tubos do encosto para os tubos situados sob o assento.



**Passo 2**

Fixe as pernas à armação pressionando os botões de pressão para os tubos situados em cada lado das pernas.

Certifique-se de que o botão de pressão “encaixe” corretamente nos orifícios e esteja estável e ajustado da mesma maneira.

Dados técnicos

Produto	CADEIRA SANITÁRIA DE ELEVAÇÃO DE ALUMÍNIO
Número do produto	HE10635081
Capacidade de peso (lbs/kg)	300 lbs / 136kg
Tamanho do produto (mm) C x L x A	(521-558)×(692-730)×(850-955) mm
Peso do produto (lbs/kg)	7,1 kg
Material do encosto	PU
Material do assento	PU
Material da almofada do braço	Espuma EVA
Material da armação	Alumínio
Cor da armação	Prateado
Quantidade na caixa (peça)	1
Peso do produto incluindo a caixa (lbs/kg)	8,0 kg
Tamanho da caixa C x L x A	645*585*395 mm

Símbolos

	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Armazenar em local fresco e seco
	Fabricante		Data de fabrico
	Número de lote		Código produto
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Representante autorizado na União Europeia
	Dispositivo médico		Consulte as instruções de uso
	Número de série		Distribuído por

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses