



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI**  
**2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE**  
**TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS**  
**2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH**  
**CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES**  
**MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES**

---

---

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller:  
**Anji Sukar Furniture Co., Ltd.**  
Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang Province, China. P.C.: 313300  
peter@zjruixiang.com

GIMA 44000, 44001, 44002, 44003


**REF** WT221A

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/importado por:  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1  
20060 - Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com  
Made in China



## PRECAUÇÕES

1. Realizar periodicamente a manutenção da mesa. Assegurar-se de que todos os parafusos estão presos e de que o cabo não está deteriorado ou gasto. Assegurar-se de que não há rachaduras na estrutura de madeira.
2. Não sobrecarregar a mesa além do limite de peso recomendado. A sobrecarga pode resultar em ferimentos sérios ao utilizador. Carga máxima de trabalho de 200 kg.
3. Não usar produtos de limpeza à base de álcool para limpar o vinil. Eles podem danificar o material em vinil. Usar água morna e sabão para limpar e, em seguida, enxugar bem.
4. Ao usar a mesa, assegurar-se de que todas as quatro pernas estão no mesmo nível. Usar as pernas desniveladas pode fazer com que a mesa fique instável e causar ferimentos.
5. Não permitir que a mesa de massagem seja montada e desmontada por crianças, a menos que estejam sob a sua supervisão.
6. Ter cuidado ao usar objetos afiados, pois podem furar a cobertura. Manter a cobertura da mesa afastada de itens afiados.

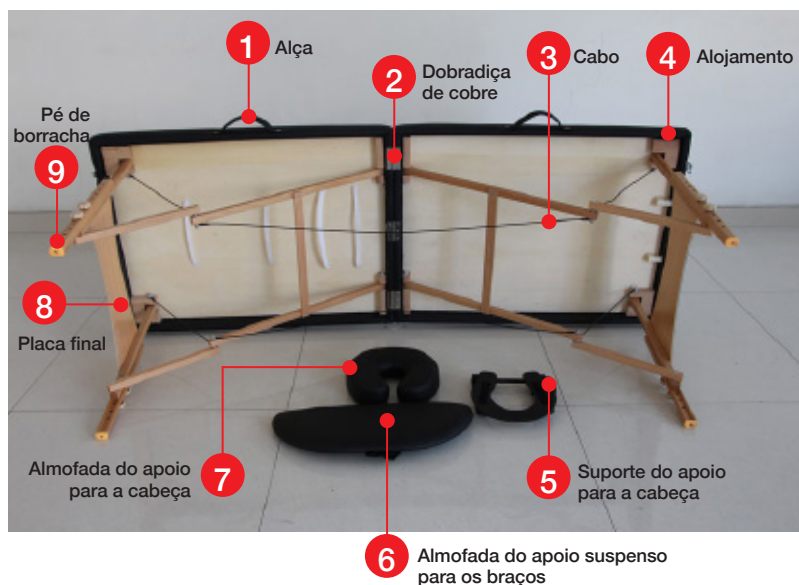

## MONTAGEM DA MESA

Seguir as etapas abaixo:



1



2



3



4



5



6

1. Soltar a trava.
2. Deitar a mesa sobre sua lateral com dois pés de borracha no chão. Abrir a mesa com as quatro pernas estendidas o máximo possível. Retirar todos os acessórios.
3. Colocar a mesa na posição vertical, com todas as pernas apoiadas no chão.
4. Encaixar os acessórios nos alojamentos correspondentes e fixar o apoio suspenso para os braços ou a tipoia no suporte do apoio para a cabeça.
5. Soltar a alça lateral e empurrá-la quando o apoio para a cabeça tiver sido ajustado na posição desejada.
6. A mesa já está pronta para o uso.

A altura da mesa pode ser ajustada. Para isso, girar os manípulos das pernas e retirar a perna móvel para ajustar a altura, selecionando os furos corretos na perna móvel. Em seguida, reinserir a perna e apertar firmemente os manípulos. Todas as quatro pernas devem ser ajustadas do mesmo modo, uma por uma, assegurando-se de que todas estejam no mesmo nível de altura.

## FECHAMENTO E TRANSPORTE DA MESA

1. Levante el respaldo hasta la posición máxima y luego empújelo hacia abajo, bloquee el pestillo.
2. Saque todos los accesorios.
3. Coloque la camilla sobre un lado con las dos patas de goma en el suelo.
4. Coloque todos los accesorios debajo de la correa elástica bajo el revestimiento.
5. Doble las patas de cada extremo internamente presionando los brazos de soporte correspondientes.
6. Doble la camilla hacia arriba y bloquee el pestillo.
7. La camilla se puede llevar como una maleta tomándola del asa.



**Advertencia:** Si el bastidor/piernas/estructura de la camilla están dañados de alguna manera, no se debe usar la camilla. El uso de esta camilla cuando está dañada puede causar heridas o lesiones graves a usted o a su paciente. Debe repararse inmediatamente.



### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.