



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 3 SEZIONI
3 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 3 SECTIONS
3-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE TRES SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 3 SEÇÕES

GIMA 44011, 44013

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller:

Anji Sukar Furniture Co., Ltd.

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

REF WT321A

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/importado por:

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1

20060 - Gessate (MI) - Italy


gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Made in China



PRECAUÇÕES

1. Realizar periodicamente a manutenção da mesa. Assegurar-se de que todos os parafusos estão presos e de que o cabo não está deteriorado ou gasto. Assegurar-se de que não há rachaduras na estrutura de madeira.
2. Não sobrecarregar a mesa além do limite de peso recomendado. A sobrecarga pode resultar em ferimentos sérios ao utilizador. Carga máxima de trabalho de 220 kg.
3. Não usar produtos de limpeza à base de álcool para limpar o vinil. Eles podem danificar o material em vinil. Usar água morna e sabão para limpar e, em seguida, enxugar bem.
4. Ao usar a mesa, assegurar-se de que todas as quatro pernas estão no mesmo nível. Usar as pernas desniveladas pode fazer com que a mesa fique instável e causar ferimentos.
5. Não permitir que a mesa de massagem seja montada e desmontada por crianças, a menos que estejam sob a sua supervisão.
6. Ter cuidado ao usar objetos afiados, pois podem furar a cobertura. Manter a cobertura da mesa afastada de itens afiados.

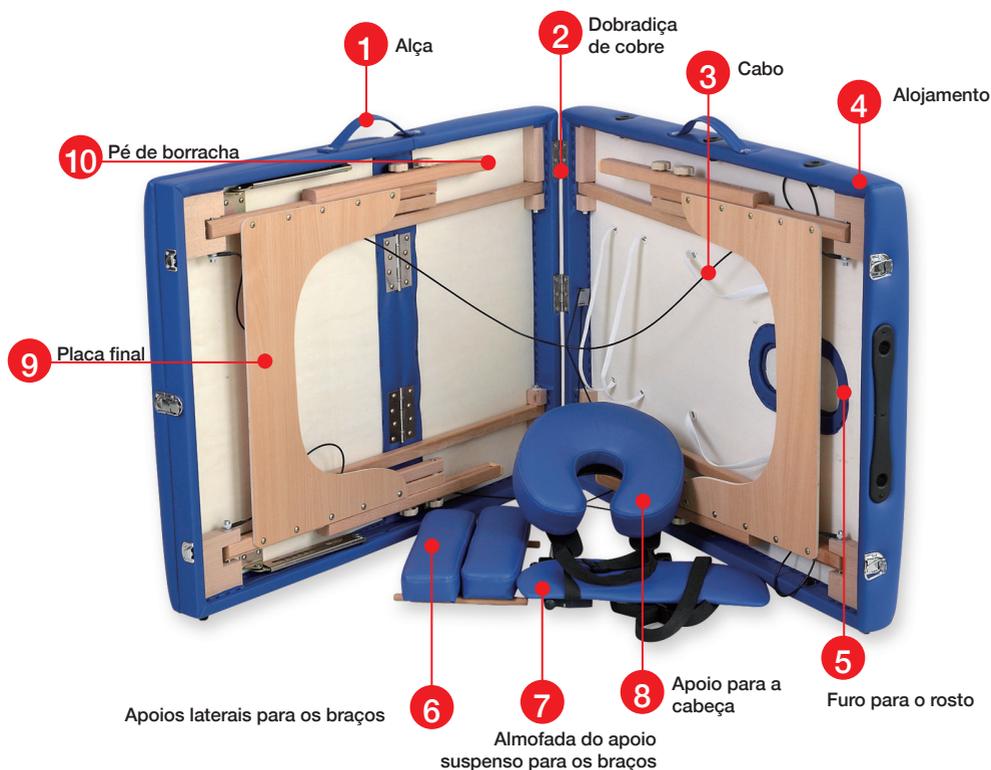

MONTAGEM DA MESA

Seguir as etapas abaixo:



1



2



3



4



5



6

1. Soltar a trava.
2. Deitar a mesa sobre sua lateral com dois pés de borracha no chão. Abrir a mesa com as quatro pernas estendidas o máximo possível. Retirar todos os acessórios.
3. Colocar a mesa na posição vertical, com todas as pernas apoiadas no chão.
4. Encaixar os acessórios nas posições correspondentes e prender o apoio suspenso para os braços ou a tipoia no suporte do apoio para a cabeça.
5. Erguer o apoio para as costas lenta e uniformemente até a posição desejada.
6. A mesa já está pronta para o uso.

A altura da mesa pode ser ajustada. Para isso, girar os manípulos na perna e retirar a perna móvel para ajustar a altura, selecionando os furos corretos na perna móvel. Em seguida, reinsserir a perna e apertar firmemente os manípulos. Todas as quatro pernas devem ser ajustadas do mesmo modo, uma por uma, assegurando-se de que todas estejam no mesmo nível de altura.

FECHAMENTO E TRANSPORTE DA MESA

1. Erguer o apoio para as costas para a posição máxima e empurrá-lo para baixo, prendendo a trava.
2. Retirar todos os acessórios.
3. Deitar a mesa sobre a sua lateral, com dois pés de borracha no chão.
4. Prender todos os acessórios à faixa elástica sob o compensado superior.
5. Dobrar as pernas internamente em cada extremidade, pressionando os braços de suporte correspondentes.
6. Dobrar a mesa para cima e prender a trava.
7. A mesa pode ser carregada como uma mala segurando-se a alça.

Advertência: Se a armação/pernas/estrutura da mesa estiverem danificadas de qualquer maneira que seja, a mesa não deve ser usada. O uso da mesa danificada pode causar danos ou ferimentos sérios a si e a seu paciente. Conserte-a imediatamente.



CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.