



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SEDIA PER MASSAGGI PIEGHEVOLE
FOLDABLE MASSAGE CHAIR
CHAISE DE MASSAGE PLIANTE
FALTBARER MASSAGESTUHL
SILLA DE MASAJE PLEGABLE
CADEIRA DE MASSAGEM DOBRÁVEL

GIMA 44050

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:

Anji Sukar Furniture Co., Ltd.

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang

Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

REF MC006

Importato da/imported by/importé par/importado por

GIMA S.p.A

Via Marconi, 1 – 20060

Gessate (MI) – Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China




PRECAUÇÕES

1. Realizar periodicamente a manutenção da cadeira. Assegurar-se de que todos os parafusos estão presos e de que o cabo não está deteriorado ou gasto. Assegurar-se de que não há rachaduras na estrutura de metal.
2. Não sobrecarregar a cadeira além do limite de peso recomendado. A sobrecarga pode resultar em ferimentos sérios ao utilizador. Este produto foi testado para suportar uma carga máxima de trabalho de 120 kg.
3. Não usar produtos de limpeza à base de álcool para limpar o vinil. Eles podem danificar o material em vinil. Usar água morna e sabão para limpar e, em seguida, enxugar bem.
4. Ao usar a cadeira, assegurar-se de que todas as quatro pernas estão no mesmo nível. Usar as pernas desniveladas pode fazer com que a cadeira fique instável e pode causar ferimentos.
5. Não permitir a montagem ou a desmontagem da cadeira de massagem por crianças, a menos que estejam sob a sua supervisão.
6. Ter cuidado ao usar objetos afiados, pois podem furar a cobertura. Manter a cobertura da cadeira longe de objetos afiados.




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Seguir as etapas abaixo:

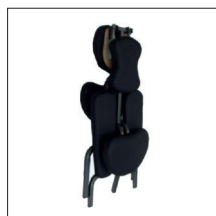

a

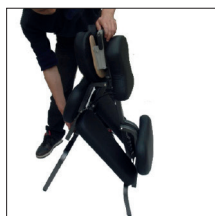

b



c




d




e




f

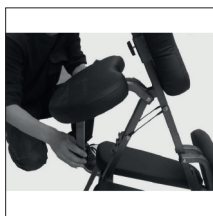


g

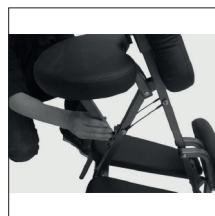


h

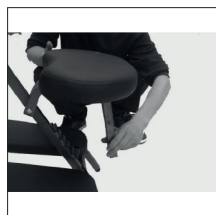

i

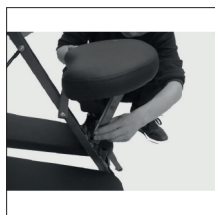

j

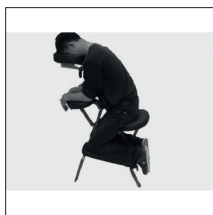

k

1. Remover a cadeira de massagem da caixa de papelão, conforme mostrado na imagem a.
2. Abrir as quatro pernas da cadeira e assegurar-se de que elas estão niveladas ao se apoiarem no chão, conforme mostrado nas imagens b e c.
3. Ajustar o suporte do apoio de cabeça em uma direção que permita que o utilizador se sinta confortável, conforme mostrado na imagem d.
4. Ajustar a posição do apoio para o peito e fixá-la usando o manípulo preto atrás do apoio para o peito, conforme as etapas mostradas nas imagens e e f.
5. Ajustar a almofada do assento em uma posição confortável usando o suporte do assento, conforme mostrado nas imagens g e h.
6. Ajustar o apoio para as mãos em uma posição confortável usando o suporte do apoio para as mãos, conforme mostrado nas imagens i e j.
7. A cadeira de massagem portátil já está pronta para o uso.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.