




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CAMAS DE CONSULTA ECONÓMICAS

Guia para utilização

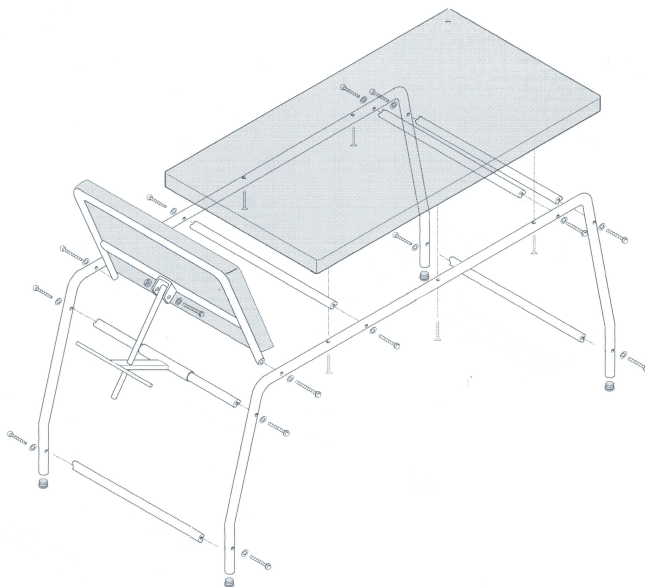

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

REF 44450 - 44451 - 44455 - 44456



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy



- 44450** - Cama económica pintada a preto
- 44451** - Cama económica pintada a branco
- 44455** - Cama económica cromada azul
- 44456** - Cama económica cromada bege

INTRODUÇÃO

A cama económica de consulta destina-se ao uso em instalações de saúde, comunitárias, lares; especialmente adequado para consultórios/ambulatórios.

Aos fins da Diretiva 2007/47/EC a cama é abrangida nos DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASSE CLASSE I.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A cama tem dimensões reduzidas; o colchão, lavável e ignífugo, é composto por duas partes, uma primeira parte fixa e uma segunda parte reclinável em várias posições.

Componentes

- 2 pernas
- 1 travessa com elevação do encosto
- 5 travessas
- Acolchoamento encosto
- Acolchoamento assento

INSTRUÇÕES

A cama é fornecida completamente desmontada

1. Pegar nas 2 pernas e começar a fixar as travessas, incluindo a travessa com elevação do encosto, através de parafusos.
2. Por último, fixar os acolchoamentos à estrutura através de parafusos.



Ficha técnica

2016	44450 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA PRETA 44451 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA BRANCA 44455 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA AZUL 44456 - CAMA CONSULTA ECONÓMICA BEGE	
DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	Cama de consulta de dimensões reduzidas, estudada para consultórios/ambulatorios. O colchão é composto por duas partes, uma primeira parte fixa e uma segunda parte reclinável em várias posições.	
DESCRIÇÃO DE CADA ITEM	Estrutura e itens de metal	- Estrutura em tubular de aço obtido a partir de fita a frio de dimensões 30x1,5 mm - Estrutura cromada ou pintada com pó epoxídico cor branco RAL 9010
	Tecido e acolchoado	- Dimensões 61x50 - 61x130 - Acolchoado composto por aglomerado de partículas h.14 mm e borracha h.40 mm - Material lavável LEDEFLEX GAZEBO/AE (Composição: 87%PVC – 13% CO) em CLASSE 1 - Cores disponíveis: Preto 991, Branco 9010, Azul 4915, Bege 151
	Medidas	180 x 61 x h75 cm
	Peso	29 Kg
	Capacidade máxima	90/100 Kg
	Normas de limpeza (tecidos)	Limpar com tecido humedecido e ensaboado e enxaguar bem com água limpa. Não usar solventes, lixívia e detergentes químicos ou sprays de brilho.
	Notas	Cores e características poderão ser alteradas para melhorias e/ou modificações

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO

- Respeitar as capacidades máximas indicadas nas fichas técnicas.
- **Quando se regula a altura do encosto, verificar que ninguém introduza mãos, pernas, etc. dentro da área de deslocação: risco de esmagamento**
- Evite o contacto direto com feridas abertas.
- Apoiar o paciente apenas quando a rede está completamente horizontal em todas as suas partes.
- Deslocar a cama sem levantá-la do pavimento.
- Se a cama possui rodas, certificar-se que não haja rodas travadas antes de deslocá-la.
- É proibido o uso em ambientes abertos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para conservá-la da melhor forma possível, recomenda-se que se evite a exposição prolongada aos raios solares; o contacto com ambientes

salinos; o depósito em ambientes muito húmidos.

- Verificar que as porcas do bloqueio das pernas estejam bem apertadas.
- Inspeccionar periodicamente todos os pontos de fixação.
- Limpar o colchão com tecido humedecido e ensaboado e enxaguar bem com água limpa.
- Não usar solventes, lixívia e detergentes químicos ou sprays de brilho.
- Limpar a cama sem utilizar produtos abrasivos. Secar com cuidado.
- Se for necessária a desinfestação, utilizar apenas produtos adequados não corrosivos.
- Utilizar apenas peças sobressalentes originais.

GARANTIA

- A cama é garantida por dois anos para defeitos de material e de processamento, excluindo as partes de consumo.
- Adulterações ou danos causados por uma utilização errada da cama comportam a anulação imediata da garantia.
- O presente dispositivo médico foi criado exclusivamente para as modalidades mencionadas cima. Qualquer outra utilização será considerada imprópria.
- Não se responde por danos a pessoas e coisas decorrentes de utilização imprópria do dispositivo.