



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HALAT IZOLANT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

ROMÂNĂ

Denumire produs Halat izolant de unică folosință

Cod produs FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

Mărime produs Unitate: cm

COD GIMA	21131	21132
COD PROTECȚIE TOTALĂ	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Mărimi	115x137 (M)	120x150 (L)
Lungime (de la umăr la tiv)	115	120
Lățime (monostrat)	137	150
Lungime talie	180	180
Lungime mânecă	58	59
Deviere	±2	±2

Model produs Tip halat. M/L

Structură și compoziție Produs realizat din 25 g de polipropilenă nețesută. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare.

Utilizare prevăzută Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în cabinete medicale, secții, cabinete de consultație, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.

Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mu-

cegăit. Nu folosiți.

Cum se folosește produsul Deschideți ambalajul și scoateți produsul, scuturați ușor halatul, ridicăți părțile laterale ale gulerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și strângeți cordoanele.

Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

⚠️ Avertisment

1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți.
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu alte persoane.
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

















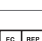



Termen de valabilitate 3 ani.


Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj

Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

 REF	Cod produs		A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
 LOT	Număr de lot		Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Producător		Data fabricației		Dispozitiv medical
	Nesteril		Valabil până la data de		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Limită de umiditate		Citiți instrucțiunile de utilizare		Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	Limită de temperatură		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene		Fragil, manevrați cu atenție
	Această parte în sus		Manevrați cu atenție		

 **FGIS-PP25-M (GIMA 21131)**
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbHGneisenaustraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

