



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
جاجز نم يلاتي جيدي نازيم
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÁG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Φτιαγμένο από/
GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CARACTERISTICI ȘI SPECIFICAȚII


- Auto ON
- Auto OFF
- Unități de măsurare a greutatei: kg, lb, st:lb
- Capacitate: 150kg/330lb/23st:8lb
- Gradație: 0,1kg/0,2lb/0,2lb (1lb, ≥20st)
- Indicații de suprasarcină: " — — — — — "
- Indicație baterie descărcată "Lo"
- Sursă de alimentare: 1 x baterie CR2032

Afișaj complet LCD




PENTRU SCHIMBAREA BATERIEI

- Asigurați-vă că bornele +/- sunt așezate corect.
 - Folosiți instrumentul potrivit pentru scoaterea bateriei din compartiment dacă este necesar.
- Vă rugăm să îndepărtați banda izolatoare înainte de utilizare.

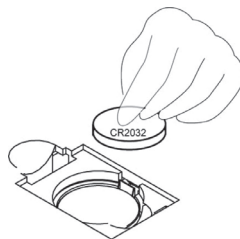

TASTE FUNCȚIONALE

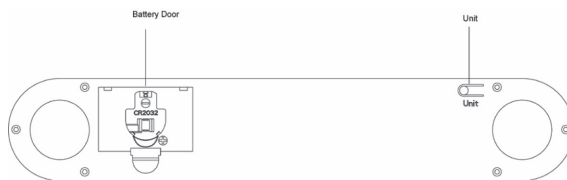

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Apăsați tasta UNIT pentru a porni și selecta unitatea.
2. Așezați cântarul pe o suprafață solidă și dreaptă; lăsați cântarul să se oprească automat.
3. Utilizatorul stă direct pe platforma cântarului. Acesta va pălpâi și se va bloca pe LCD după ce greutatea este constantă, apoi se va opri automat după 10 secunde.
4. Dacă nu există nicio operațiune, se va opri automat.
5. Când nu îl folosiți, vă rugăm să îl așezați drept, apoi nu puneți niciun element pe cântar.



VĂ REAMINTIM:

Nu folosiți cântarul pe covor

Pentru a garanta o cântărire exactă, atunci când mutați cântarul, vă rugăm mai întâi să porniți (sau să apăsați) și să așteptați oprirea, apoi puteți să vă urcați din nou pe platforma cântarului și vă puteți măsura greutatea. În caz contrar, va adăuga greutatea proprie a cântarului.



ELIMINARE:

Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice. Pentru informații suplimentare despre punctele de reciclare, contactați autoritățile locale, centrul local de reciclare sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Dacă echipamentul nu este eliminat corect, pot fi aplicate amenzi sau penalități în conformitate cu legislația și reglementările naționale.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.