



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA VETERINARIA - MEDIA**  
**DIGITAL VET SCALE - MEDIUM**  
**BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE**  
**BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA**  
**ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA**  
**VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT**  
**ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - ΣΡΕΔΕΗ**  
**VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR**  
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ**  
**ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN**  
**ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS**  
**SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA**  
**SCALA VETERINARĂ – MEDIE**  
**VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER**

**REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/  
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

**Momert Zrt.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/  
Distribuoány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

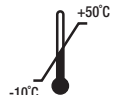



Vă rugăm să studiați cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru consultări ulterioare. Asigurați-vă că alte persoane care folosesc produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată a bateriei la introducerea și înlocuire.
- Dacă nu veți utiliza aparatul o perioadă mai lungă de timp, este necesar să scoateți bateria.
- Nu lăsați unitatea nesupravegheată atunci când este utilizată.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția situației în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizați produsul numai în scopul specificat în manualul de utilizare.
- Utilizați unitatea numai pe o suprafață orizontală stabilă.
- Înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriți unitatea și scoateți bateria!
- Nu utilizați substanțe abrazive sau agresive chimic pentru curățarea unității.
- Nu utilizați unitatea dacă nu funcționează corect sau dacă produsul a fost scâpat, deteriorat sau expus la orice lichide. Duceți unitatea la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Unitatea este potrivită numai pentru uz casnic. Aceasta nu este proiectată pentru funcționare comercială.
- Țineți unitatea departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, cuptoare etc. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu atingeți unitatea cu mâinile ude sau umede.
- Produsul este un dispozitiv de măsurare fragil. Aveți grijă să nu îl scăpați sau să cadă.
- Nu reparați singur aparatul. Contactați un centru de service autorizat.

### NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR INDICATE DE PRODUCĂTOR POATE CONDUCE LA REFUZUL REPARAȚIEI ÎN GARANȚIE!

#### SPECIFICAȚII:

- Sistem de măsurare de precizie
- Resetare automată la zero
- Oprire automată
- Indicator de putere scăzută
- Indicator de suprasarcină

#### PARAMETRI TEHNICI

Tensiune electrică: 1 baterie cu litiu 3V, CR2032 (inclusă)  
Greutate măsurabilă maximă: 3-100 Kg  
Creșteri de cântărire: 100g  
Dimensiunea afișajului: diametru LCD = 8,0 cm, 3,15 inci  
Platformă: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm  
Unități de cântărire: kg, lb, st  
Temperatură de lucru/depozitare: 10 - 40 °C/-10 - 50 °C

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza cântarul pentru prima dată, vă rugăm să îndepărtați clapeta izolatoare de pe baterie din partea din spate a cântarului.

Așezați cântarul pe o suprafață plană, dură. Pe o suprafață moale (de exemplu: pe covor), cântarul poate afișa o valoare inexactă.

Pentru a porni cântarul, atingeți centrul platformei cu piciorul.

La început, afișajul va arăta un „8” care rulează, după care, pe afișaj va apărea mesajul „0,0”.

Așteptați până când apare mesajul „0,0”!

Așezați animalul de companie pe cântar.

Apoi, greutatea animalului dumneavoastră de companie va apărea pe afișaj printr-un mesaj intermitent de două ori. Greutatea măsurată poate fi vizualizată timp de aproximativ 10 secunde.

Dacă nu are loc nicio cântărire după pornirea cântarului, acesta se va opri automat după 60 secunde.

#### SCHIMBAREA BATERIEI

Bateria trebuie înlocuită atunci când ecranul arată:



Vă rugăm să deschideți suportul pentru baterie din partea din spate a cântarului și să scoateți ușor bateria, trăgând de clapeta de blocare din plastic negru. Clapeta de fixare este situată în partea de sus a bateriei. Nu rupeți clapeta metalică. Înlocuiți bateria cu una nouă. Bateria descărcată trebuie aruncată în locația potrivită.

BATERIILE NU SUNT INCLUSE ÎN GARANȚIE!

#### AVERTISMENT DE SUPRAÎNCĂRCARE

Când cântarul este supraîncărcat, se afișează următorul mesaj:



#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Suprafața unității poate fi curățată doar cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața unității!

Nu curățați niciodată unitatea sub jet de apă, nu o clătiți și nu o scufundați în apă!

#### REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE

Orice întreținere sau reparație extinsă care necesită acces la părțile interioare ale produsului trebuie efectuată de un centru de service autorizat.

#### PROTECȚIA MEDIULUI

- Materialele de ambalare și aparatele vechi trebuie reciclate.
- Cutia de transport poate fi aruncată ca deșeu sortat.
- Sacii din polietilenă vor fi predați pentru reciclare



**Eliminare:** Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice.

#### TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.