

**BILANCIA PESANEONATI A SCORRIMENTO MECCANICO
MECHANICAL SLIDING WEIGHT BABY SCALES
PÈSE-BÉBÉS MÉCANIQUES À POIDS COULISSANTS
BALANZA PESABEBÉS MECÁNICA DESLIZANTE
BALANÇAS DE BEBÉ MECÂNICA COM PESOS DESLIZANTES
MECHANISCHE SÄUGLINGSWAAGEN MIT LAUFGEWICHTEN
CÂNTAR MECANIC PENTRU COPII CU MECANISM GLISANT
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ**

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung
- Manual de utilizare - Εγχειρίδιο Χρήσης

Gima 27300

Fabbricante, Manufacturer, Fabricant, Fabricante, Hersteller, Producător, Παραγωγός:
VuXi Veigher Factory Co., Ltd.
Majiagiao, Guangfeng, Guangyi - 214011
Wuxi City, Jiangsu – People's Republic of China
Made in China

REF RGT-20A

Importato e distribuito da/Imported and distributed by/Importé et distribué par/Importado y distribuido por Importado e distribuído por/Importiert und vertrieben von/Importat și distribuit de/Εισαγωγή και διανομή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Cântarul dumneavoastră mecanic cu mecanism glisant este un produs de calitate și poate fi, de asemenea, utilizat și în domeniile unde nu sunt necesare cântări aprobate. Funcția cântarului este aceea de a măsura greutatea copilului. Doar personalul instruit va înregistra cel mai bun rezultat al procesului de cântărire. Asigurați-vă că cântarul este așezat pe o suprafață sigură și suficient de mare.

Bebelușul trebuie supravegheat tot timpul cât se află întins pe cântar. Cântarul este un instrument de precizie și trebuie tratat în consecință. Prin urmare, vă rugăm să citiți și să respectați întru totul instrucțiunile cuprinse în manualul de utilizare

• Specificații

Model	RGT-20A
Max.	20 kg
Divizie	10 g
Dimensiunea tăviței	57X30 (LXW) cm
Dimensiunea în ansamblu	57X33X28 (LXW XH) cm
Greutatea cântarului fără sarcină	6,5 kg


• Instalarea și utilizarea cântarului

Verificați conținutul cutiei


- Tăvița pentru bebeluși
- Platforma cântarului include 2 șuruburi de fixare pentru atașarea tăviței pentru bebeluși
- Manual de utilizare

Asamblare

Îndepărtați platforma de cântărire și tăvița pentru bebeluși din cutie și păstrați ambalajul în caz de necesitate

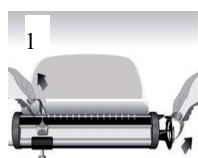

Pictograma 1: Îndepărtarea siguranței de transport a greutăților glisante și a barei de greutate glisante.
Greutățile glisante, precum și bara de ghidare pentru greutate sunt asigurate pentru transport. Scoateți cu grijă materialul de fixare. Asigurați-vă că bara de ghidare pentru greutate rămâne nemișcată.

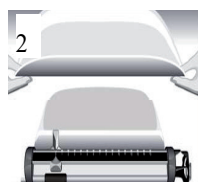


Pictograma 2: Montarea tăvii pentru bebeluși.
Slăbiți cele 2 șuruburi de fixare de la baza cântarului folosind o șurubelniță sau un poanson. Așezați tava pentru bebeluși pe bază, introduceți cele 2 șuruburi în orificiile corespunzătoare și strângeți-le bine din nou. **Acum eliberați bara de ghidare pentru greutate**




Pictograma 3: Calibrare aproximativă
Așezați cântarul în zona de lucru și asigurați-vă că suprafața pe care este așezat este uniformă. Pentru a obține cea mai precisă citire, este absolut necesară o setare corectă la zero. Pentru a face acest lucru, reglați ambele greutăți de ghidare

în poziția ZERO. Indicatorul (brațul) și brațul contorului trebuie să fie complet în linie. Dacă nu sunt aliniate, trebuie setată valoarea zero.

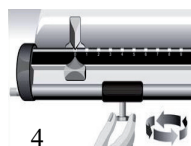

Pictograma 4: Pentru a face acest lucru, utilizați greutatea tară. Prin desfacerea piuliței moletate.

Greutatea tară poate fi ușor împinsă de fiecare parte a barei până când brațul și contrabrațul se aliniază destul de precis. Asigurați-vă că fixați din nou piulița moleată. Greutatea tară este, de asemenea, utilizată pentru a reduce greutatea obiectelor de pe tavă (de exemplu, un obiect vestimentar).

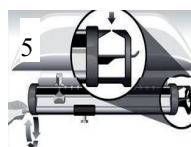

Ajustare fină
Pictograma 5: Indică poziția șurubului de calibrare fină.

Roțiți-l fie în partea dreaptă, fie în partea stângă și opriți-vă atunci când brațul și contrabrațul sunt aliniate 100%.

Atenție:

Ar trebui efectuată o setare periodică la zero conform instrucțiunilor anterioare. Acest lucru se aplică în special în situația când cântarul este utilizat într-un loc diferit, pe o suprafață diferită

Cântărire

- După ce calibrarea aproximativă și reglarea fină sunt realizate cu succes, bebelușul poate fi cântărit.
- Așezați bebelușul în tăvița.
- Glisați greutatea mare de ghidare conform greutății bebelușului.
- Folosind greutatea mică de ghidare, puteți determina cu ușurință greutatea exactă, împingând-o de-a lungul până când brațul și contrabrațul se aliniază complet.
- Greutatea exactă a bebelușului reprezintă suma celor două rezultate de greutate (greutatea de ghidare mai mare și mai mică).

• Verificarea calității

Produsele corespund directivelor CE aplicabile și standardelor europene pentru fabricarea și distribuirea în întreaga lume a echipamentelor de cântărire și măsurare conform celui mai recent standard tehnic, oferind o durată de viață lungă și fiabilitate continuă. Produsele corespund directivelor CE aplicabile și standardelor europene pentru fabricarea și distribuirea în întreaga lume conform celor mai recente standarde tehnice, asigurând o durată lungă de viață și fiabilitate continuă.

• Curățare, întreținere și reaprobare

Securitate

- Cântarul dumneavoastră pentru bebeluși este un instrument de precizie. Manevrați-l cu grijă.
- Nu-l scăpați, nu săriți pe el și nu lăsați obiecte grele să cadă pe el.
- Când utilizați cântarul, respectați întotdeauna cu precizie regulile și recomandările din acest manual de utilizare.
- Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în cântar.

Curățare

Pentru curățare, utilizați doar o cârpă umedă sau lichide de curățare obișnuite. Nu utilizați lichide de curățare agresive

Depozitare și transport

Păstrați toate componentele și piesele originale pentru un eventual retur al cântarului în vederea evitării oricărei posibile deteriorări în timpul transportului, care va duce automat la pierderea garanției.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.