



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASTA DI SOLLEVAMENTO PER DEGENTI - TUBO TONDO
LIFT POLE - ROUND TUBING

POTEAU DE LEVAGE - TUBE ROND

SOPORTE DE ELEVACIÓN - TUBO REDONDO

PENDURAL - TUBAGEM REDONDA

BETTGALGEN - RUNDSTANGEN

TIJĂ TELESCOPICĂ - ȚEAVĂ ROTUNDĂ

LYFTPOL - RUNDRÖRSSTRUKTUR

WYSIĘGNIK - Z OKRĄGLYMI RURKAMI

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ - ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.



LW10207 (GIMA 27664)



Mingguang Longway Technology Co., Ltd.
No. 59 Lingji Rd., Industrial Park, Mingguang, Anhui, China
Made in China



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





Greutatea suportată: 75kgs

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

Accesoriiile medicale Longway sunt dispozitive medicale menite să compenseze o dizabilitate sau incapacitate a utilizatorului imobilizat la pat.

Dispozitiv de sprijin cu bază la sol, adaptabil pentru orice tip de pat. Structura din oțel tubular vopsit, ce poate fi poziționată în funcție de nevoile pacientului, și triunghiul cu curea pentru reglarea înălțimii acestuia.

ATENȚIE (!):

- În caz de deteriorare sau defecțiune a produsului dumneavoastră, NU folosiți produsul și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele indicate în acest manual
- LONGWAY Medical își declină orice responsabilitate pentru eventualele consecințe care rezultă dintr-o utilizare incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- LONGWAY Medical își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document fără o notificare prealabilă
- Poate exista o variație de $\pm 3\%$. Abatere în ceea ce privește dimensiunile produselor.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- ⚠ • Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau vreă altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau măsurile de precauție, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana care deține cunoștințele tehnice adecvate înainte de a utiliza produsul, întrucât există riscul producerii de daune.
- ⚠ • Țineți produsul la distanță de sursele de căldură.
- ⚠ • Salvați acest document pentru consultări ulterioare.
- ⚠ • Aveți grijă atunci când copiii se află în apropiere și nu îi lăsați să se joace cu produsul.
- ⚠ • Nu depășiți sarcina utilă maximă.
- ⚠ • O atenție specială este întotdeauna necesară acolo unde există piese în mișcare care pot cauza blocarea membrului

și rănirea.

- ⚠ • Nu încercați să ridicați produsul cu ajutorul vreunei piese detașabile.
- ⚠ • Nu utilizați scaunul produsului în alt scop decât cel prevăzut.
- ⚠ • Tijele telescopice nu sunt destinate să suporte întreaga greutate a unei persoane.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru menționarea că Dispozitivele Medicale incluse în această declarație fac parte din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, după caz, standardele și legislația la care se face referire.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați cadrul să nu fie deteriorat pentru a putea garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Să nu existe fisuri sau rupturi ale cadrului).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați-vă distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Verificați dacă produsul este asamblat corespunzător și dacă toate șuruburile sunt sigure și bine strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a garanta utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează, vă rugăm să țineți cont de protecția mediului:

- 1) Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare indicat).
- 2) Contactați autoritățile publice, iar acestea vă vor informa cu privire la centrele de reciclare unde trebuie lăsat produsul dumneavoastră.
- 3) Eliminarea corectă a produsului contribuie la protecția mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE:

Pentru a garanta o utilizare în siguranță și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor acestuia. Pentru procedurile de curățare și igienizare, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Purtați mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua cu cea mai precisă dezinfectare.
3. Utilizați apă sau detergent ușor pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
5. NU lăsați produsul umed.
6. Nu utilizați substanțe de curățare chimice pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea suprafeței produsului
7. Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, slab
8. Protejați produsul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
9. Lubrifiere: produsul a fost proiectat pentru o întreținere minimă. Totuși, verificați la fiecare șase luni lubrifierea pieselor mobile și mecanice; acest lucru va asigura o durată optimă de viață a produsului.


ASAMBLARE:

OBSERVAȚIE: Imaginile pentru asamblare sunt cu titlu orientativ,

pentru a face montajul mai ușor. Ar putea exista mici diferențe față de produsul real.

Suportul cu baza LW10207 se livrează demontat și necesită următoarele operațiuni de asamblare:

1. Utilizați șuruburi de 2*M10*115mm pentru a fixa țeava dreaptă între tuburile piciorului stâng și drept;
2. Introduceți tija telescopică în spațiul prevăzut și utilizați șurubul de plastic pentru fixare;
3. Introduceți triunghiul cu curea ajustabilă în spațiul prevăzut.

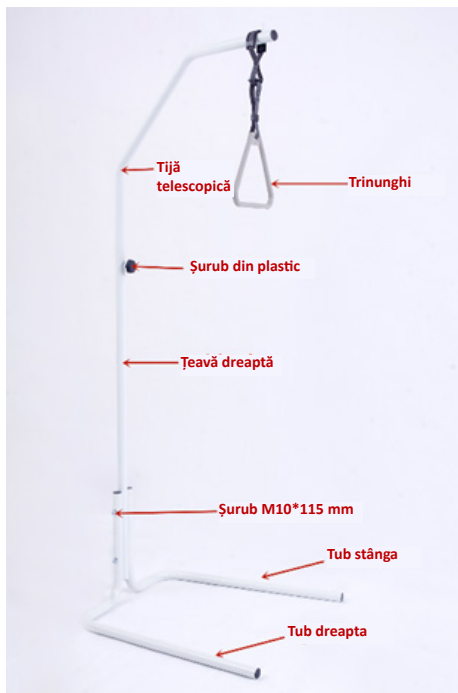

GARANȚIE:

Produsul este garantat pe o perioadă de un (1) an de la data cumpărării.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU SE aplică daunelor rezultate din utilizare greșită, întreținere defectuoasă, modificare, suprautilizare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE aplică pentru piesele care se pot uza ca urmare a folosirii sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezaastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare (unde este cazul) și de transportatori nu sunt acoperite de garanție.

Nu se vor efectua lucrări de service sau înlocuire piese de schimb decât dacă au fost inspectate de un departament de service autorizat sau de către producătorul produsului. Costurile de transport pentru produsele aflate în garanție trebuie plătite de către utilizatorul final - client sau distribuitor.

LEGENDA SIMBOLURILOR

	Producător
	Data fabricației
REF	Cod produs
LOT	Număr de lot
EC REP	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Citiți instrucțiunile de utilizare
CE	Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745
MD	Dispozitiv medical
UDI	Identificatorul unic al dispozitivului
	Smaltimento RAEE
	Importat de

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice