



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviskai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

Stetoscop electronic 3M™ Littmann® CORE

Ghid de pornire rapidă

Descărcați aplicația Eko din Apple App Store® sau din Google Play Store®.

Activați funcția Bluetooth® Wireless pe telefon sau tabletă, lansați aplicația și porniți stetoscopul CORE.


Eko

În cutie

- Accesorii digital Eko CORE și Stetoscopul Cardiology IV™ 3M™ Littmann®
- Set suplimentar de olive auriculare etanșe moi 3M Littman (mici)
- Inel non-chill pentru clopot
- Cablu de încărcare USB
- Ghid de pornire rapidă

Olive auriculare

Introduceți olivele auriculare pe direcția înainte.

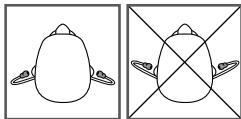

ro

Volum

Utilizați butoanele (+) și (-) pentru a regla volumul. Există 7 trepte de volum.

Pornire și oprire

Când stetoscopul CORE este oprit, acesta funcționează ca un stetoscop neamplificat.

Pentru a porni stetoscopul CORE, apăsați comutatorul de pornire. Indicatorul luminos va începe să lumineze intermitent. Acum veți auzi în olivele auriculare un sunet amplificat și filtrat.

Funcțiile telemedicină și IA

Eko oferă funcțiile telemedicină și IA, care necesită un abonament de software (unde este disponibil, vândut separat).

Vă puteți face un abonament online pe ekohealth.com

Anularea activă a zgomotului

Stetoscopul CORE include anularea activă a zgomotului, pentru a elimina zgomotul ambiant din mediul înconjurător. Anularea activă a zgomotului poate fi oprită sau pornită prin intermediul aplicației Eko.



Notificări

(•••) (luminează intermitent)

● (galben)

(•••) (galben)

stetoscopul CORE este pornit și caută dispozitivul

stetoscopul CORE este oprit și se încarcă

stetoscopul CORE are nivelul de baterie scăzut

○

stetoscopul CORE este pornit și conectat


● (verde)

stetoscopul CORE este complet încărcat

(•••) (albastru)
stetoscopul CORE înregistrează

Înregistrarea

Când sunteți conectat la aplicația Eko, apăsați butonul (o) pentru a începe înregistrarea.

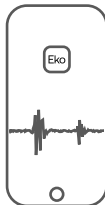

Încărcarea

Conectați cablul micro USB la stetoscopul CORE și utilizați un încărcător de perete USB certificat UL sau USB 5 V cu marcaj CE. Stetoscopul CORE va avea nevoie de aproximativ 2 ore pentru a se încărca complet. Indicatorul luminos se va aprinde verde, atunci când este complet încărcat.

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza stetoscopul CORE Littmann, revedeți manualul de utilizare. Pentru a citi manualul, accesați: ekohealth.com/getstarted
Pentru mai multe informații despre dispozitivele 3M, accesați HCBG regulatory.3M.com

Service și asistență

În SUA, accesați littmann.com/service sau sunați la 1-800-228-3957. Dacă sunteți în afara SUA, accesați littmann.com pentru a vedea informațiile de contact ale biroului dvs. 3M local.

Apple App Store este marcă comercială a Apple Inc.
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Bluetooth® este o marcă înregistrată a Bluetooth SIG
LBL 143 Rev. B



System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA





3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA



0537



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0