

RO - INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU MUTICUȚI DE CARTON DE UNICA UTILIZARE

UTILIZARE PREVIZATĂ: mușticulele de unică folosință sunt destinate utilizării împreună cu echipamentele de testare a funcției pulmonare și permit pacientului să susțină examenul fără a avea contact direct cu echipamentul.

Pacientul manipulează personal piesa bucală introducând-o în echipament. Piese bucale trebuie aplicate numai pe pielea intactă, curată și sănătoasă.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI: datele de identificare (referința, lotul și data producției) se află pe eticheta atașată cutiei.

UTILIZARE:

Urmați întotdeauna instrucțiunile spirometrului.

Introduceți piesa bucală în senzorul dispozitivului (turbină sau pneumatometru) fără a forța. Nu reutilizați niciodată piesa bucală pentru a evita expunerea pacientului la contaminare încrucișată.

Nu deschideți înainte de utilizare.

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.

Dispozitivul nu este potrivit pentru utilizare în pediatrie neonatală.

A se păstra într-un loc răcoros și uscat.

ELIMINAREA ȘI SECURITATEA: după utilizare, produsul trebuie aruncat în recipiente normale cu deseuri solide netoxice sau în deseurile generale din spitale.

CONTRAINDICAȚII: pe baza experienței și a rezultatelor diferitelor analize, nu există efecte adverse ca urmare a utilizării corecte a produsului.


PĂSTRARE: a se păstra într-un loc răcoros și uscat.

AVERTIZARE:

- Ambalarea în plic individual sigilat termic (single-wrap) garantează absența bacteriilor, care este monitorizată în mod regulat conform sistemului de calitate al producătorului. Dacă dispozitivul medical este reutilizat, există riscul de infecție încrucișată pentru pacientul care îl reutilizează.

- Dacă dispozitivul este reutilizat, există riscuri de infecție încrucișată pentru pacientul care îl reutilizează.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

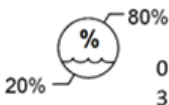

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750