

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. CONSULTAȚI UN MEDIC ÎNAINTE DE UTILIZARE.

CONTRAINDICAȚII: Nu este destinat persoanelor cu o greutate de peste 242 lbs (110 kg) - Nu este destinat în condiții de gheață sau alunecoase. - Nu este destinat persoanelor cu alergii la latex.

GHID DE INSTRUCȚIUNI: Pentru a desface bastonul, țineți de mâner și lăsați segmentele pliabile ale tijeii să se deschidă spre podea. Pentru a preveni căderile, este necesar să verificați întotdeauna dacă segmentele individuale ale tijeii (Fig. 1) sunt fixate în siguranță.

AVERTIZARE: NU dezasamblați corpul bastonului Trusty Cane™. Bastonul conține un cablu elastic în interior. Eliberarea necontrolată a cablului elastic


din interior poate provoca leziuni grave pentru părțile corpului neprotejate, în special pentru ochi. În cazul în care cablul elastic este tăiat, uzat sau deteriorat, întrerupeți utilizarea. NU întindeți cablul mai mult decât este necesar pentru a dezasambla sau asambla segmentele.

Pentru a regla înălțimea bastonului Trusty Cane™: Slăbiți sistemul de închidere (Fig. 2) prin răsucire, rotind în sens orar de câteva ori. Apăsăți butonul de blocare (Fig. 3) și trageți în sus de mâner pentru a-l lungi sau împingeți în jos de mâner pentru a-l scurta. Nu uitați să strângeți din nou sistemul de închidere prin răsucire după ce ajustați bastonul Trusty Cane™ la înălțimea dorită.

AVERTIZARE: Pentru a preveni căderile, asigurați-vă întotdeauna că segmentele individuale ale tijeii sunt fixate în siguranță în poziție și că butonul de blocare este complet acționat.

Pentru a plia bastonul Trusty Cane™: Bastonul Trusty Cane™ se pliază ușor la o dimensiune convenabilă pentru călătorii, separând cele 4 segmente individuale ale tijeii unul de celălalt. Țineți fiecare set de segmente de tijă lângă îmbinare și trageți-le separat (Fig. 4). Segmentele individuale ale tijeii se vor plia perfect împreună (Fig. 5)

Pentru a utiliza luminile de pe bastonul Trusty Cane™: Butonul din partea superioară a mânerului bastonului Trusty Cane™ (Fig. 6) activează luminile. Apăsarea butonului o dată va activa luminile, iar o a doua apăsare le va stinge. Luminile se vor stinge automat după 20 minute.

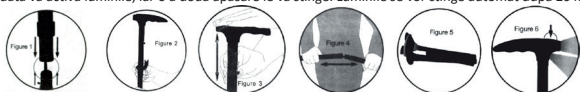

Întreținerea bastonului Trusty Cane™: Pentru a înlocui bateriile, folosiți o surubelniță Philips pentru a deschide compartimentul pentru baterii de sub mânerul bastonului Trusty Cane™. Scoateți bateriile descărcate și aruncați-le în mod corespunzător. Folosind 3 baterii AAA, aliniați + și - conform indicațiilor, altfel luminile nu vor funcționa. Puneți la loc capacul și strângeți șurubul de pe capacul bateriilor. Verificați periodic bastonul pentru a depista semne de uzură, inclusiv orice uzură a cablului elastic sau uzură a picioarelor de cauciuc. Dacă observați semne de uzură, întrerupeți imediat utilizarea.

AVERTIZARE: Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium).

TERMINI DE GARANȚIE GIMA: Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγμένο από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/importēja/Tuoja/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



