



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1


Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Instalarea roților pivotante



Aliniați bolțul roții cu gaura de montare de la baza căruciorului și introduceți roata. Introduceți șurubul în gaura de montare și strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic.

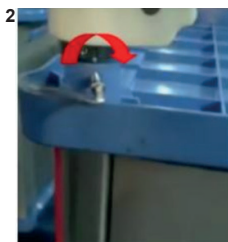

2. Metodă de utilizare a roților pivotante

Blocarea roții pivotante: După ce ați împins căruciorul pentru anestezie pe poziția dorită, apăsați cu piciorul butonul ON și blocați roata pivotantă în momentul în care auziți un „clic”, așa se observă în figura de mai jos.

Deblocarea roții pivotante: Apăsați cu piciorul butonul OFF și deblocați roata pivotantă în momentul în care auziți un „clic”.

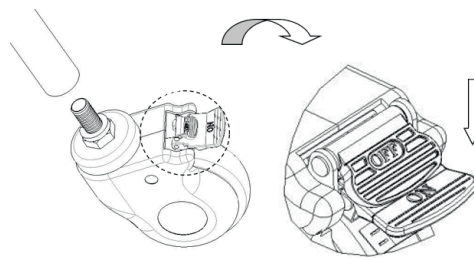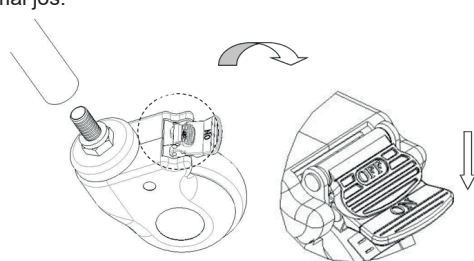

3. Soluționarea defecțiunilor

Avarii obișnuite	Cauze probabile	Metode de soluționare
Dificultăți de a mișca întregul cărucior	1. Roata pivotantă este blocată, fără a fi deblocat frâna 2. Roata pivotantă este defectă	1. Deblocați frâna - consultați secțiunea 2.1 2. Înlocuiți roata pivotantă - consultați secțiunea 1.2

4. Întreținere

- Pentru a utiliza în deplină siguranță căruciorul pentru anestezie, trebuie să efectuați cu regularitate o serie de verificări de siguranță ale căruciorului pentru anestezie. Se recomandă să îl verificați o dată la șase luni, pentru a vă asigura că racordurile nu sunt slăbite și toate manevrele se pot executa normal.
- Când cadrul căruciorului pentru anestezie se uzează și atinge o anumită durată de viață utilă, partea metalică a căruciorului pentru anestezie și părțile din plastic ale cadrului căruciorului pentru anestezie pot fi reciclate.
- Evitați zgârierea panoului cu instrumente cu muchii ascuțite sau cu bisturie și curățați-l frecvent, pentru a-l păstra curat și uscat.
- În caz de pătare accidentală a panoului cu murdărie, se recomandă curățarea acestuia. Nu folosiți produse chimice alcaline sau corozive pentru curățarea căruciorului pentru anestezie, pentru a evita ruginirea suprafeței din oțel inoxidabil.
- Verificați cu regularitate roțile pivotante evitând ciocnirea sau suprasolicitarea acestora, ce ar putea cauza avariarea roților pivotante.
- Se interzice forțarea frânării roților pivotante pentru a frâna, o astfel de manevră duce la avariarea sistemului de frânare.
- Uzura suprafeței cauciucate a roților se poate observa printr-o examinare vizuală. Este posibil ca unele fire de ață sau alte reziduuri să se înfășoare în jurul roții. În acest caz, scoateți șuruburile și piulițele roții, curățați-o de reziduuri și verificați dacă rulmentul roții s-a avariât. Dacă piesele nu sunt avariate, acestea pot fi reasamblate și utilizate.
- În funcție de timpul de utilizare, de uzură și de consum, decideți dacă roata pivotantă trebuie înlocuită. La nevoie, înlocuiți roțile și asigurați-vă că șuruburile și piulițele sunt bine asamblate și îmbinate. Dacă este posibil, folosiți șaibe de blocare sau contrapiulițe pentru a facilita această procedură.
- Pentru roțile pivotante prevăzute cu frâne, trebuie să verificați cu regularitate dacă frânele funcționează corect. Verificați frânele o dată pe zi sau înainte de fiecare utilizare. În cazul unui cărucior pentru anestezie echipat cu mai multe roți pivotante cu frâne, este posibilă blocarea unei singure roți de frânare o dată, permițându-vă astfel să încercați să împingeți căruciorul și să verificați corecta funcționare a fiecărei roți pivotante în parte. În caz de funcționare deficitară a frânei din cauza uzurii sau avarierii roților, înlocuiți imediat roțile și apoi testați din nou sistemul de frânare.
- În cazul în care mecanismul sistemului de frânare al roții pivotante este avariât, iar frâna trebuie reparată sau înlocuită, vă rugăm să vă adresați departamentului nostru de asistență post-vânzare sau unui reprezentant autorizat de compania noastră. Ori de câte ori se înlocuiesc frânele, trebuie să se testeze din nou eficiența de frânare a roților pivotante.

5. Ambalare, transport, depozitare

- Ambalarea căruciorului se face conform contractului sau standardului de produs.
- Evitați mișcările bruște, vibrațiile puternice și protejați căruciorul de razele soarelui și de ploaie în timpul transportului.
- Căruciorul trebuie depozitat în următoarele condiții:
 - Temperatură mediu ambient: +5°C ~ +40°C.
 - Umiditate relativă: ≤ 85%.
 - Presiune atmosferică: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Asistență post-vânzare

- Păstrați în siguranță documentele care însoțesc aparatul și factura de achiziționare a acestui produs, deoarece va trebui să prezentați aceste documente în momentul în care compania efectuează operațiuni de garanție și întreținere a produsului.
- În cazul în care întâmpinați vreo problemă de utilizare a produsului, adresați-vă din timp companiei noastre, în așa fel încât compania noastră să vă poată oferi cât mai curând cu putință asistență tehnică rapidă și precisă și servicii de întreținere.
- Produsul beneficiază, din momentul vânzării, dacă produsul este defect sau avariât în ciuda instalării și utilizării corecte conform specificațiilor, de o garanție gratuită de un an și de servicii de întreținere pe toată durata de viață utilă, cu condiția prezentării „certificatului” sau facturii.
- În termen de un an de la data achiziționării, dacă produsul este într-adevăr defect sau nu funcționează corect din cauza unor probleme de calitate, compania va oferi utilizatorilor o reparație gratuită a produsului.

Întreținere pe toată durata de viață utilă, asigurată de producătorul: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD