

**CARRELLO PORTAMEDICINALI  
MEDICINE TROLLEY  
CHARIOT MÉDICAL  
CARRO DE MEDICAMENTO  
CARRINHO DE MEDICAMENTOS  
MEDIZINWAGEN  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
WÓZEK MEDYCZNY  
ČĀRUCIOR MEDICAL**

**VOZÍK NA LÉKY  
MEDICINTEKNISK VAGN  
MEDICIJNWAGEN  
MEDICINSKA KOLICA  
GYÓGYSZERES KOCSI  
МЕДИЦИНСКА КОЛИЧКА  
LÄÄKEVAUNU  
MEDICININIS VEŽIMĒLIS**

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -  
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ  
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -  
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



## **Gima 45725**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /  
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođač / Gyártó / производител / Valmistaja  
/ Gamintojas:

**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjia-  
gang City, Jiangsu Province, China  
export@saikangmedical.com  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado  
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /  
Importovano / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja  
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

**REF SKR054-MT**


### 1. INSTALARE ROȚI

Aliniați șurubul roții cu orificiul de montare din partea de jos a căruciorului și introduceți roata. Introduceți șurubul în orificiul de montare și strângeți șurubul în sens orar.


**1****2****3**

### 2. UTILIZAȚI METODA ROȚILOR

Blocați roata: După ce împingeți căruciorul de medical în poziția dorită, apăsați butonul ON cu piciorul și blocați roata când auziți un „clic”, astfel cum se indică în figura de mai jos.

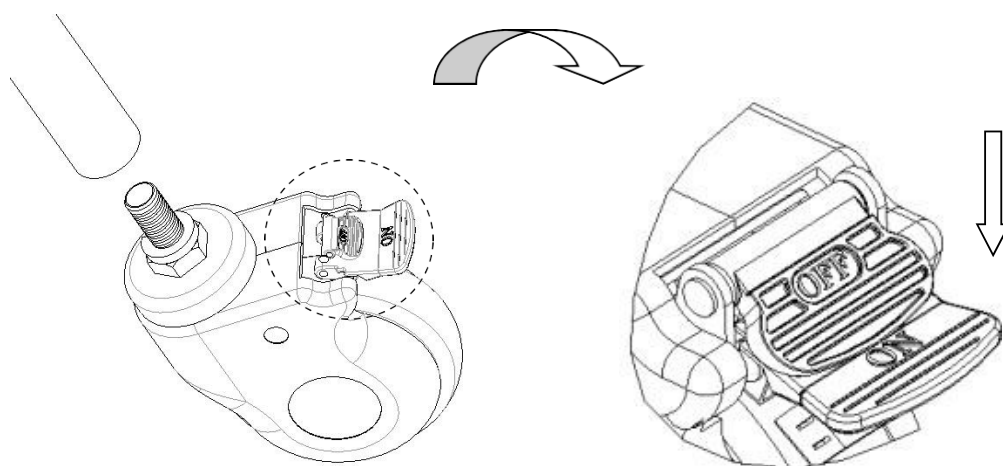

Deblocați roata: Apăsați butonul OFF cu piciorul și deblocați roata când auziți un „clic”.

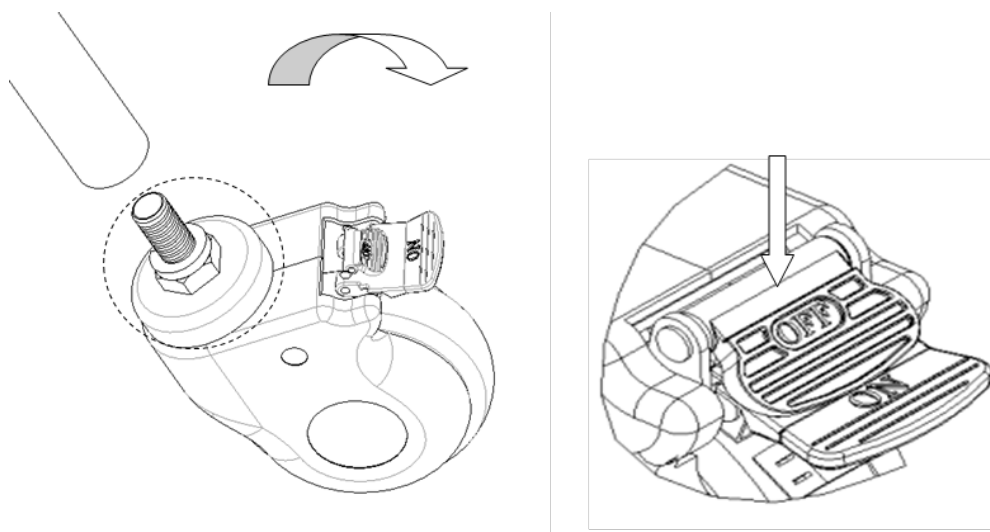

### 3. EXCLUDEREA DEFECȚIUNILOR

| Defecte comune                          | Motive probabile                                                          | Excludere metode                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Este dificil de mutat întregul cărucior | 1. Roata este blocată fără eliberarea frânei<br>2. Roata este deteriorată | 1. Eliberați frâna<br>2. Înlocuiți roata |

### 4. ÎNTREȚINERE

- Pentru a utiliza căruciorul medical de medical în siguranță, este necesar să se efectueze inspecții regulate asupra acestuia. Se recomandă să-l verificați la fiecare șase luni pentru a vă asigura că conexiunile nu sunt slăbite și că toate operațiunile sunt normale.
- Când cadrul căruciorului de medical se uzează, atingând o anumită durată de folosire, partea metalică a căruciorului de medical și părțile din plastic ale cadrului pot fi reciclate.
- Evitați zgârierea panoului cu dispozitive cu vârf ascuțit sau cuțite în timpul utilizării și curățați-l frecvent pentru a-l păstra curat și uscat.
- Dacă panoul este pătat accidental, se recomandă curățarea acestuia. Nu utilizați substanțe chimice alcaline sau corozive pentru a curăța căruciorul medical de medical, întrucât acestea vor provoca ruginirea suprafeței din oțel inoxidabil.
- Verificați în mod regulat roțile pentru a evita lovirea sau supraîncărcarea, ceea ce va duce la deteriorarea roților.
- Este interzisă forțarea frânării roților, ceea ce va cauza deteriorarea sistemului de frânare.
- Uzura suprafeței anvelopei roții poate fi detectată prin inspecție vizuală. Unele fire filate textile și alte resturi se pot înfășura în jurul roții; scoateți șuruburile și piulițele roții, curățați-le de resturi și verificați dacă rulmentul roții este deteriorat. Dacă piesele nu sunt deteriorate, le puteți reasambla și utiliza.
- Judecând după înlocuirea roții în funcție de timpul folosit și uzură, puteți înlocui roțile și să vă asigurați că șuruburile și piulițele axelor sunt corect așezate și conectate. Dacă este posibil, utilizați șaibe sau piulițe de blocare pentru a vă ajuta în acest proces.
- Pentru roțile echipate cu frâne, este necesar să se verifice regulat dacă frânele funcționează corect. Verificați frânele o dată pe zi sau înainte de fiecare utilizare. Pentru un cărucior medical de medical, echipat cu mai multe roți de frânare, doar o singură roată de frânare poate fi blocată la un moment dat, ceea ce vă va permite să încercați să împingeți căruciorul de medical și să verificați dacă performanța de frânare a fiecărei roți este bună. Dacă frânarea nu funcționează din cauza uzurii sau a deteriorării roților, înlocuiți imediat roțile și apoi testați din nou sistemul de frânare.
- Dacă mecanismul sistemului de frânare al roții este deteriorat și frâna trebuie reparată sau înlocuită, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență post-vânzare sau distribuitorul autorizat recomandat de societatea noastră. De fiecare dată când frânele sunt înlocuite, performanța de frânare a roților trebuie testată din nou.

### 5. AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

- Ambalarea căruciorului se realizează conform contractului sau standardului produsului.
- Evitați să vă grăbiți să ieșiți, de asemenea, evitați vibrațiile violente, lumina puternică a soarelui și ploaia în timpul transportului căruciorului.
- Căruciorul trebuie depozitat într-un mediu cu:
  - Temperatură ambiantă: +5 °C ~ +40 °C.
  - Umiditate relativă: ≤ 85%.
  - Presiune atmosferică: 70 kPa ~ 106 kPa.
  - Sarcina maximă este de 50 kg

### CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.