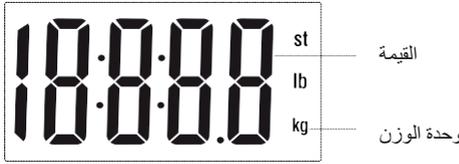


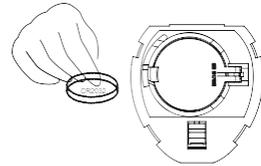
**BILANCIA IN PLASTICA ULTRASOTTILE
ULTRA SLIM PLASTIC BODY SCALE
BALANCE EN PLASTIQUE ULTRA MINCE
ULTRADÜNNE PERSONENWAAGE
BÁSCULA DE PLÁSTICO ULTRA FINA
BALANÇA DE PLÁSTICO SUPER FINA
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ
WAGA PLASTIKOWA ULTRACIENKA**

ميزان من البلاستيك رقيق جدا

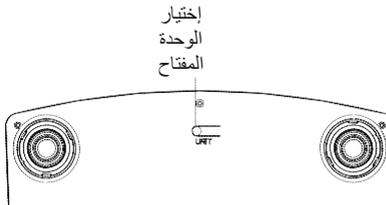
**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
دليل الإستعمال والرعاية****ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.**UWAGA:** przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i zrozumiałe**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.**REF** 27262Teme l'umidità
Keep away from humidityConservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlightFabbricante
ManufacturerGima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C.

شاشة عرض LCD FULL

الميزات والخصائص

- تشغيل أوتوماتيكي (Auto ON)
- LCD واسع جدا 40 x76 ملم
- وحدة القياس: كغم، رطل، حجر: رطل (kg, lb, st:lb)
- القدرة: 150 كغم/ 330 رطل / 23 حجر: 8 رطل
- السلم: (0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb, ≥20st)
- بلاغ فرط العبء: "----"
- بالغ بطارية فارغة الشحن: "Lo"
- بطارية: x CR20321

لتبديل البطارية


- التأكد من أن الأقطاب +/- صحيحة.
- استخدام أداة ملائمة لتسهيل عملية إزالة البطارية من موضعها الخاص إذا كانت هناك ضرورة.
- * يرجى إزالة الشريحة العازلة قبل الاستعمال.

مفاتيح الوظائف

إرشادات الاستعمال

- (1) الضغط على المفتاح UNIT لتشغيل واختيار الوحدة.
- (2) وضع الميزان على سطح متين ومسطح، والانتظار حتى ينطفئ الميزان أوتوماتيكيا.
- (3) الصعود مباشرة على قاعدة الميزان. شاشة العرض تتذبذب حتى يتم تحديد الوزن. بعد 10 ثواني تنطفئ أوتوماتيكيا.
- (4) في حالة عدم الاستخدام، تنطفئ أوتوماتيكيا.
- (5) خلال فترات عدم الاستخدام يتوجب حفظها بالوضع الأفقي دون وضع أي غرض فوقها.

تحذيرات:



عدم استخدام الميزان على سجاد

لهدف ضمان التبيين الدقيق للوزن، عند القيام بإزاحة الميزان ننصح بتشغيله (أو مسّه) وانتظار انطفائه. بعد ذلك يكون بإمكانكم الصعود على الميزان لقياس وزنكم. في الحالة العكسية، من الممكن أن يكشف وزن أكبر.



التصريف

ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلية الأخرى. من واجب المستهلكين القيام بتصريف الأجهزة المراد التخلص منها بإحضارها إلى مراكز التجميع المشار إليها والخاصة في تجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واستغلالها من جديد.

للحصول على المعلومات الإضافية الخاصة في مراكز التجميع، التوجه إلى بلدية مكان الإقامة، مركز خدمة تصريف النفايات المحلية أو إلى الحانوت الذي لديه تمّ الشراء. في حالة التصريف الخاطئ، قد تفرض الغرامات، بموجب القوانين الوطنية.

شروط الضمان GIMA

نهنكم على شرائكم لأحد منتوجاتنا. هذا المنتج يجيب إلى قيم النوعية العالية سواء لما يخص المواد أو عملية التصنيع. الضمان يكون صالح الفعالية لمدة 12 شهرا من تاريخ التزويد من قبل GIMA . خلال مدة صلاحية الضمان يتم القيام بعملية التصليح و/أو التبدل مجاناً لكافة العناصر التي تبدي العاهات لأسباب صناعية متأكد منها باستثناء تكاليف أجره الأيدي العاملة أو تكاليف السفر المحتمل لعمال الصيانة، تكاليف النقل والتغليف. تستثنى من الضمان كافة العناصر المعرضة للهلاك بسبب الاستعمال.

التبديل أو التصليح الذي يتم خلال مدة الضمان ليس لها مفعول تمديد مدة الضمان. الضمان يكون غير فعال في حالة: تصليح الجهاز من قبل أشخاص غير مؤهلين أو باستعمال قطع غيار غير أصلية، في حالة الخلل أو العاهات التي سببها الإهمال، الصدمات أو الاستعمال الغير ملائم للجهاز. GIMA لا تجيب على سوء الفعالية لأجهزة إلكترونية أو برامج سببها عوامل خارجية مثل: قفزات جهدية، مجالات كهرومغناطيسية، تدخلات راديو والخ .

يبطل مفعول الضمان فيما إذا تم الإخلال بالشروط المذكورة أعلاه وفي حالتهزغ أو محو أو تغيير رقم التسجيل (فيما إذا كان موجود). المنتوجات المعترية غير صالحة يجب أن ترجع فقط إلى البائع الذي لديه تمّ الشراء. سيتم رفض كل إرسال يتم بشكل مباشر إلى GIMA .